

Phonak Sky™ L-UP.

Ръководство за експлоатация

Phonak Sky L-UP
Phonak Sky L-UP Trial



Това ръководство за експлоатация важи за:

Безжични слухови апарати



Phonak Sky L90-UP

Phonak Sky L70-UP

Phonak Sky L50-UP

Phonak Sky L30-UP

Phonak Sky L-UP Trial



Подробна информация за слуховия апарат

❗ Ако няма поставена отметка и не знаете кой е моделът на вашия слухов апарат, моля, свържете се с Вашия слухопротезист.

Модели на слухови апарати

- ☐ Sky L-UP (L90/L70/L50/L30)
- ☐ Sky L-UP Trial

Размер на батерията

675
675

Накрайници

- ☐ Класическа отливка
- ☐ Универсален накрайник

Вашите слухови апарати са разработени от Phonak – световен лидер в производството на слухови апарати със седалище в Цюрих, Швейцария.

Тези първокласни продукти са в резултат от десетилетия изследователска дейност и опит и са проектирани вземайки предвид вашето благосъстояние. Благодарим Ви за прекрасния избор и Ви желаем да се радвате дълги години на удоволствието от чуването. Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, за да се запознаете и да се възползвате максимално от възможностите, които Вашето устройство предоставя. Не е необходимо обучение за боравенето с това устройство. Слухопротезистът ще помогне за настройването на това устройство според Вашите индивидуални предпочитания по време на консултацията за настройка.

Моля, свържете се с Вашия слухопротезист или представител на производителя за повече информация относно характеристиките, ползите, настройката, използването, поддръжката или ремонтите на Вашия слухов апарат и аксесоарите. Допълнителна информация може да се намери в спецификацията на продукта.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Съдържание

Вашият слухов апарат

- | | | |
|----|--------------------------|----|
| 1. | Кратко ръководство | 8 |
| 2. | Части на слуховия апарат | 10 |

Инструкции за използване на слуховия апарат


- | | | |
|-----|--|----|
| 3. | Маркировки за ляв и десен слухов апарат | 11 |
| 4. | Вкл./Изкл. | 12 |
| 5. | Батерии | 13 |
| 6. | Поставяне на слуховия апарат | 17 |
| 7. | Сваляне на слуховия апарат | 18 |
| 8. | Мултифункционален бутон с индикаторна светлина | 19 |
| 9. | Кратко описание на свързването | 21 |
| 10. | Първоначално сдвояване | 22 |
| 11. | Телефонни разговори | 25 |
| 12. | Самолетен режим | 30 |

Допълнителна информация


13.	Общ преглед на приложението myPhonak Junior	32
14.	Общ преглед на Roger™	33
15.	Слушане на публични места	34
16.	Условия на околната среда	35
17.	Грижа и поддръжка	37
18.	Смяна на крайника	40
19.	Обслужване и гаранция	41
20.	Информация за съответствието	43
21.	Информация и описание на символите	48
22.	Отстраняване на неизправности	54
23.	Важна информация за безопасността	56

1. Кратко ръководство


Смяна на батериите

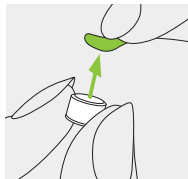

1.
Отстранете стикера от новата батерия и изчакайте 2 минути.

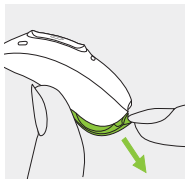


2.
Отворете капака на батерията. За информация относно предпазните батерията с вратички на батерията вижте глава 5.2.

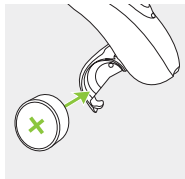


3.
Поставете батерията във вратичката на батерията с плоската страна нагоре.

Маркировки за ляв и десен слухов апарат

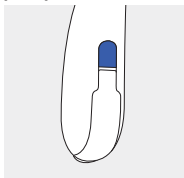


Синя маркировка за **ляв слухов апарат**.

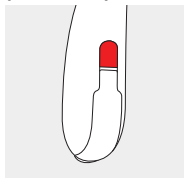


Червена маркировка за **десен слухов апарат**.

Вкл./Изкл.

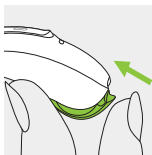


Вкл.

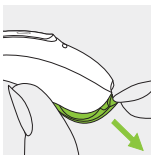

Изкл.

За информация относно предпазните вратички на батерията вижте глава 5.2.


Мултифункционален бутон с индикаторна светлина

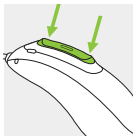

Бутонът има няколко функции. Той функционира като бутон за контрол на силата на звука и/или като бутон за смяна на програмата в зависимост от програмирането на слуховия апарат. Това се посочва в индивидуалните „Инструкции за слухов апарат“. Ако е сдвоен с телефон с активирана функция Bluetooth®, с кратко натискане се приема, а с продължително натискане се отхвърля входящо обаждане. За информация относно индикаторната светлинка вижте Глава 8.

Самолетен режим

За да влезете в самолетен режим, натиснете долната част на бутона 7 секунди, докато затваряте капака на батерията. За да излезете от самолетен режим, просто отворете и затворете отново капака на батерията.

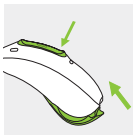

2. Части на слуховия апарат

На следващите илюстрации е показан моделът на слуховия апарат и съвместимите накрайници, описани в това ръководство за експлоатация.

Можете да определите вашия модел, като:

- Проверете „Подробна информация за Вашия слухов апарат“ на страница 3
- Сравнете Вашият накрайник и слуховия апарат със следните модели

Съвместими накрайници



Класическа
отливка




Универсален
накрайник

Sky L-UP / Sky L-UP Trial




3. Маркировки за ляв и десен слухов апарат

Има синя или червена маркировка на слуховия апарат да показва дали той е ляв или десен.

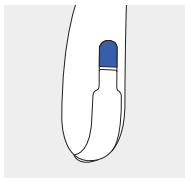

Синя маркировка
за **ляв слухов**
апарат.

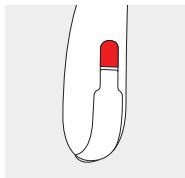


Червена маркировка
за **десен слухов**
апарат.

4. Вкл./Изкл.

Капакът на батерията служи и като превключвател за включване/изключване.


1.

Затворен капак на батерията = слуховият апарат е **вкл.**

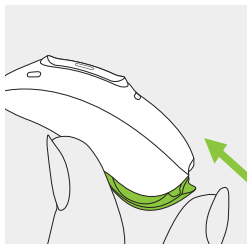

2.


Отворен капак на батерията = слуховият апарат е **изкл.**

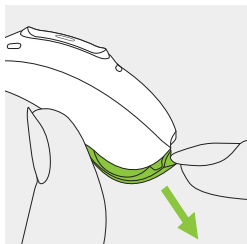


❶ При включване на слуховия апарат може да чуете мелодия за старт.

5. Батерии


5.1 Поставете батерия със стандартен капак на батериите

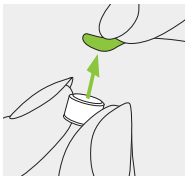

1. Отстранете стикера от новата батерия и изчакайте 2 минути.

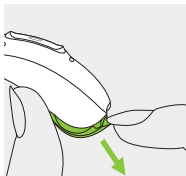

2. Отворете капака на батерията.

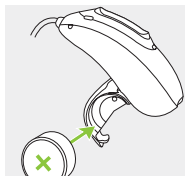

3. Поставете батерията в капака на батерията с плоската страна нагоре.

- ❗ Ако е трудно да затворите капака на батерията, проверете дали батерията е поставена правилно и дали плоската страна сочи нагоре. Ако не е поставена правилно, слуховият апарат няма да работи, а капакът на батерията може да се повреди. Плоската страна е маркирана със символ „+“ на стикера или на батерията.
- ❗ Ако е монтиран предпазен капак за деца под 36-месечна възраст, продължете да четете важната информация по-долу и вижте конкретните инструкции в глава 5.2 за поставянето на батерията.



Слабо захранване: ще чуете два писукащи сигнала и ще видите непрекъсната зелена мигаща светлина (ако е активирана), когато батерията е изтощена. Ще разполагате с около 60 минути, за да смените батерията (може да варира в зависимост от настройките на слуховия апарат и от батерията). Препоръчваме винаги да имате на разположение нова батерия.

Смяна на батерията

Този слухов апарат работи с батерия цинк-въздух размер 675.

Модел	Размер на цинк-въздух батерия	Цветна маркировка на опаковката	IEC код	ANSI код
Phonak Sky L-UP/L-UP Trial	675	синьо	PR44	7003ZD

❗ Уверете се, че използвате правилния вид батерия за Вашия слухов апарат (цинк-въздух). Вижте също глава 23.2 за допълнителна информация относно безопасността на продукта.


5.2 Поставяне на батерия с предпазен капак на батерията

Този слухов апарат може да бъде снабден с предпазен капак на батерията, ако е необходимо с оглед на безопасността (за деца под 36-месечна възраст).

Отваряне на капака на батерията


1.

Поставете върха на инструмента в малкия отвор в долната част на слуховия апарат.

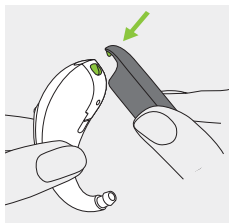

2.


Използвайте инструмента като лост, за да отворите капака на батерията, като приложите сила в посока на зелената стрелка.

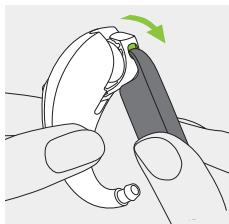

Поставяне на батерията


1.

Отстранете стикера от новата батерия и изчакайте 2 минути.

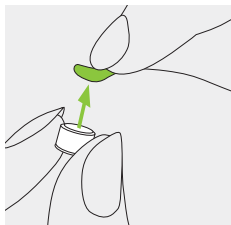


2.

Поставете батерията в капака на батерията с плоската страна нагоре.

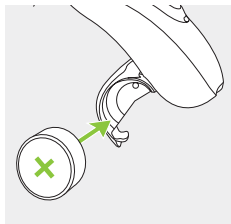

Затваряне на капака на батерията

Батерията ще бъде защитена само когато затворите капака на батерията по правилен начин. След като го затворите, винаги проверявайте дали капакът на батерията не може да се отвори с ръка.

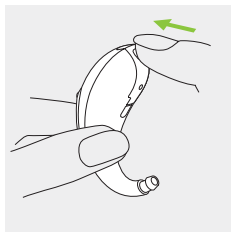


6. Поставяне на слуховия апарат

6.1 Поставяне на слуховия апарат с класическа отливка


1.

Доближете отливката до ухото си и поставете частта за слуховия канал на отливката във Вашия слухов канал.

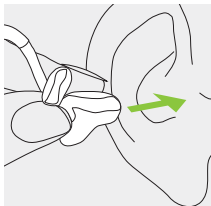


2.

Поставете слуховия апарат зад ухото си.

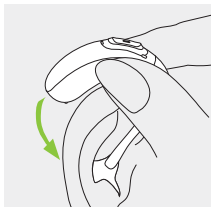

3.

Вкарайте горната част на отливката в горната част на вдлъбнатината на ухото си.

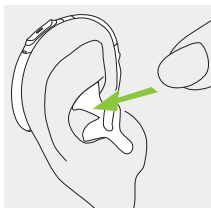


7. Сваляне на слуховия апарат

7.1 Сваляне на слухов апарат с класическа отливка


1.

Повдигнете слуховия апарат над горната част на ухото.

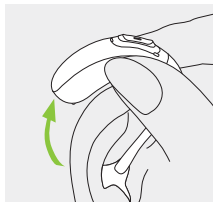

2.

Хванете отливката с пръсти и внимателно я отстранете.

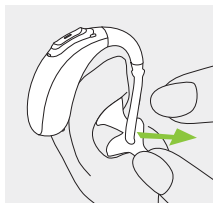


❗ Избягвайте да хващате тръбичката, за да отстраните слуховия апарат.

8. Мултифункционален бутон с индикаторна светлина

Мултифункционалният бутон има няколко функции.

Той функционира като бутон за контрол на силата на звука и/или като бутон за смяна на програмата в зависимост от програмирането на слуховия апарат. Това се посочва в индивидуалните „Инструкции за слухов апарат“. За копие на този документ се обърнете към Вашия слухопротезист.

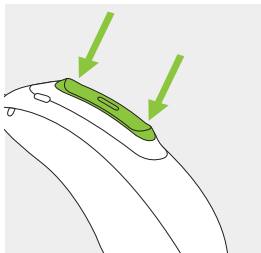

Ако слуховият апарат е сдвоен с телефон с активирана функция Bluetooth®, с кратко натискане на горната или долната част на бутона ще приемете входящ разговор, а с продължително натискане ще отхвърлите входящ разговор – вижте глава 11.

Индикаторна светлина

Индикаторната светлинка информира родители и болногледачи на малки деца за статуса на слуховия апарат. Индикаторната светлинка е вградена в мултифункционалния бутон и показва статуса на слуховия апарат, докато е включен.

Вашият слухопротезист може да активира/деактивира индикаторната светлинка по различни начини.


По-долу ще намерите пълния списък с предупрежденията за статусите на слуховия апарат. Помолете слухопротезиста съответно да постави отметки за активираните функции.

Статус на слуховия апарат	Изглед на индикаторната светлинка
☐ Слуховият апарат е включен	Повтарящо се единично мигане 
☐ Слуховият апарат е включен и Roger™ е достъпен	Повтарящо се двойно мигане 
☐ Ниско ниво на батерията*	Непрекъснато мигане 
☐ Промяна в нивото на звука (стартирана от дистанционно управление, от myPhonak Junior или от мултифункционалния бутон)	Едно мигане при усилване и намаляване на звука 
☐ Промяна в програмата (стартирана от дистанционно управление, от myPhonak Junior или от мултифункционалния бутон)	Едно мигане при промяна на програмата 

* Предупреждението за ниско ниво на батерията се стартира прибл. 60 минути, преди да е необходимо зареждането ѝ. Препоръчва се винаги да имате на разположение нова батерия.

9. Кратко описание на свързването

Илюстрацията по-долу показва опциите за свързване, налични за Вашия слухов апарат.

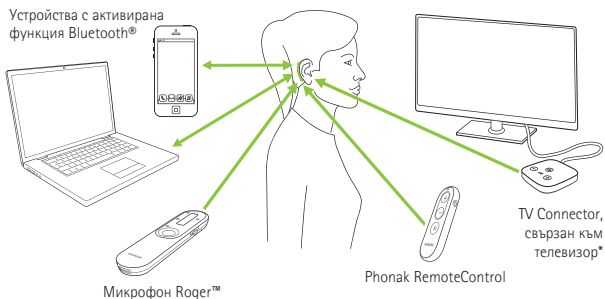

* TV Connector може да се свърже към аудиоизточник, например към телевизор, компютър или hi-fi система.

10. Първоначално сдвояване

10.1 Първоначално сдвояване към устройство с активирана функция Bluetooth®


- ① Необходимо е да извършите процедурата за сдвояване с всяко устройство с Bluetooth® безжична технология само по веднъж. След първоначално сдвояване Вашият слухов апарат ще се свързва автоматично към устройството. Първоначалното сдвояване може да отнеме до 2 минути.

1.

Уверете се, че безжичната технология Bluetooth® на Вашето устройство (напр. телефон) е включена, и пуснете търсене за устройства с включен Bluetooth® в менюто за настройка на свързването.

2.

Включете двата слухови апарата. Сега имате 3 минути да сдвоите Вашите слухови апарати с устройството.

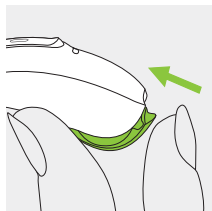

3.

Вашето устройство показва списък с устройства с активирана функция Bluetooth®. Изберете слуховия апарат от списъка, за да сдвоите едновременно и двата слухови апарата. Кратък звуков сигнал потвърждава успешното сдвояване.

❶ За повече информация относно инструкциите за сдвояването чрез безжична технология Bluetooth®, специфични за продукти на някои от най-известните производители на мобилни телефони, посетете: <https://www.phonak.com/en-int/support>


10.2 Свързване към устройството

След като е сдвоен с Вашето устройство, слуховият Ви апарат ще се свърже автоматично отново, когато е включен.

- ① Връзката ще бъде запазена, докато устройството е **ВКЛЮЧЕНО** и е в рамките на обхвата.
- ① Вашият слухов апарат може да бъде свързан с до две устройства и да бъде сдвоен с до осем устройства.

11. Телефонни разговори

Вашият слухов апарат се свързва директно с телефони с активирана функция Bluetooth®. Когато е сдвоен и свързан към Вашия телефон, ще чувате известия и гласа на обаждащия се директно в слуховия Ви апарат. Телефонните разговори са тип „свободни ръце“, което означава, че гласът Ви се улавя от микрофоните на слуховия апарат и се предават обратно в телефона.

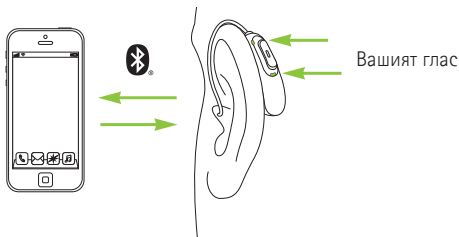


11.1 Как да се обадите по телефона

Въведете телефонния номер и натиснете бутона за избиране. Ще чуете тоналността при избиране в слуховия си апарат. Вашият глас се улавя от микрофоните на слуховия апарат и се предава към телефона.

11.2 Как да приемете повикване


При приемане на повикване в слуховия апарат ще се чуе известие за входящ разговор.

Обаждането може да бъде прието чрез кратко натискане на горната или долната част на мултифункционалния бутон на слуховия апарат (по-малко от 2 секунди) или директно на Вашия телефон.

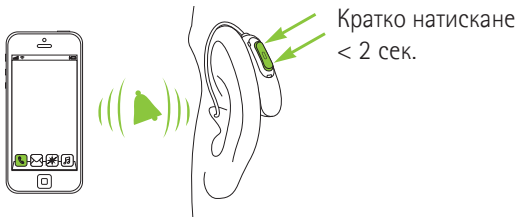


11.3 Как да приключите обаждане

Обаждането може да бъде приключено чрез продължително натискане на горната или долната част на мултифункционалния бутон на слуховия апарат (по-малко от 2 секунди) или директно на Вашия телефон.

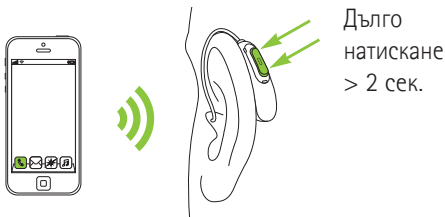

11.4 Отхвърляне на повикване

Входящо обаждане може да бъде отхвърлено чрез продължително натискане на горната или долната част на мултифункционалния бутон на слуховия апарат (повече от 2 секунди) или директно на Вашия телефон.

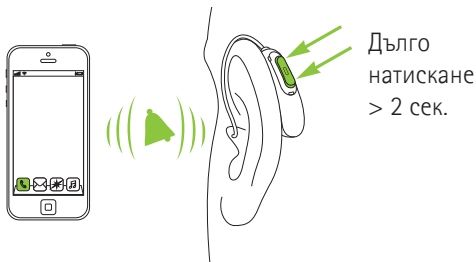

12. Самолетен режим

Вашият слухов апарат работи в честотния диапазон 2,4 GHz – 2,48 GHz. При пътуване със самолет някои превозвачи изискват всички устройства да бъдат превключени в самолетен режим. Влизането в самолетен режим няма да забрани нормалната функционалност на слуховия апарат, а само функциите за свързване чрез Bluetooth®.

12.1 Влизане в самолетен режим

За да се забрани функция за безжично свързване и да влезете в самолетен режим за всеки слухов апарат:



1.

Отворете капака на батерията.

За информация за относно предпазните вратички на батерията вижте Глава 5.2.

2.

Задръжте натиснат мултифункционалния бутон на слуховия апарат за 7 секунди, докато затваряте капака на батерията.

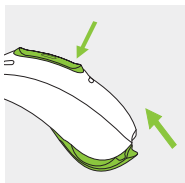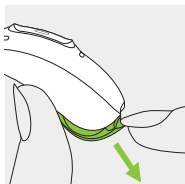


В самолетен режим слуховият апарат не може да се свърже директно към телефона ви.

12.2 Излизане от самолетен режим

За да се активира функция за безжично свързване и да влезете в самолетен режим за всеки слухов апарат:


1.

Отворете капака на батерията.
За информация относно предпазните вратички на батерията вижте Глава 5.2.

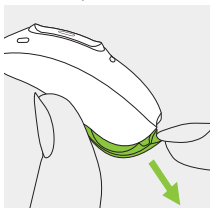

2.

Затворете отново капака на батерията.

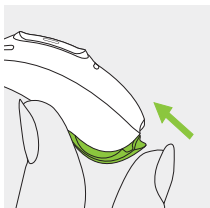

13. Общ преглед на приложението myPhonak Junior

За да научите повече за myPhonak Junior,
моля, посетете интернет страницата
www.phonak.com/junior-ug
или сканирайте QR кода



Моля, сканирайте QR кода, за да
инсталирате myPhonak Junior



14. Общ преглед на Roger™

Усетете подобряването на слуха с Roger™

Roger™ е интелигентна безжична технология, която предава реч директно до слуховите апарати, помагайки за преодоляване на разстоянието и шума. Микрофонът улавя гласа на говорещия и безжично го предава директно към приемниците Roger™* във Вашия слухов апарат. Това Ви позволява напълно да участвате в групови разговори, дори при много шумни среди, като ресторанти, срещи на работата и училищни дейности.

За да научите повече за технологията Roger™ и микрофоните, моля, посетете интернет страницата **www.phonak.com/roger** или сканирайте QR кода.



Микрофоните Roger™ се продават отделно.

* RogerDirect™ изисква инсталирането на приемниците Roger™ в слуховите апарати Phonak от слухопротезист.

15. Слушане на публични места

Вашият слухов апарат има опция за телебобина, която може да Ви помогне да чувате на различни обществени места, като църкви, концертни зали, влакови гари и правителствени сгради.



Когато видите този символ, има налична система с контур и тя е съвместима със слуховия Ви апарат. Моля, свържете се с Вашия слухопротезист за допълнителна информация и активиране на функцията за телебобина.

Как се използва функцията телебобина

Има два възможни начина за достъп до функцията за телебобина, която е настроена от Вашия слухопротезист. Директният достъп до програмата за телебобина е възможен чрез дълго натискане на мултифункционалния бутон на Вашия слухов апарат. Другата възможност е да се осъществи достъп до програмата за телебобина чрез приложението myPhonak Junior. Уверете се, че стоите или седите в рамките на обозначената зона на системата на контура, отбелязана от официалния символ на телефонната бобина.

16. Условия на околната среда

Продуктът е проектиран така, че да функционира без проблеми или ограничения, при условие че се използва по предназначение, освен ако в това ръководство за експлоатация не е упоменато друго.

Трябва да използвате, транспортирате и съхранявате слуховия апарат в съответствие със следните условия:

	Работа	Транспортиране	Съхранение
Температура Максимален диапазон	+5 до +40°C (+41 до +104°F)	-20 до +60°C (-4° до +140°F)	-20 до +60°C (-4° до +140°F)
Влажност (без кондензат)	0% до 85%	0% до 93%	0% до 93%
Атмосферно налягане	от 500 до 1060 hPa	от 500 до 1060 hPa	от 500 до 1060 hPa

Температурата и влажността не трябва да превишават диапазоните, описани в таблицата по-горе, за продължителни периоди от време по време на транспортиране и съхранение.

Изваждайте батерията, ако няма да използвате слуховия си апарат продължително време.

Тези слухови апарати са категоризирани като IP68. Това означава, че те са водо и прахоустойчиви и са проектирани да издържат ситуациите от ежедневиия живот. Те могат да бъдат носени в дъжд, но не трябва да бъдат напълно потапяни във вода или използвани при вземане на душ, плуване или други водни дейности. Тези слухови апарати не трябва никога да се излагат на хлорирана вода, сапун, солена вода или други течности с химическо съдържание.

Ако устройството е било подложено на условия за съхранение и транспорт извън препоръчителните условия на употреба, изчакайте 15 минути преди стартиране на устройството след възстановяване на препоръчителни условия на околната среда.

17. Грижа и поддръжка

Очакван експлоатационен живот:

Слуховите апарати имат очакван експлоатационен живот от пет години. Очаква се устройствата да останат безопасни за употреба през този период.

Период на търговска употреба:

Рутинните и прилежни грижи за Вашите слухови апарати ще допринесат за изключителното представяне за времетраенето на очаквания експлоатационен ресурс на Вашите устройства.

Sonova AG ще предостави минимум пет години сервизен период за ремонт, след като съответният слухов апарат и съществено важни компоненти са изведени от продуктовото портфолио.

Използвайте следните спецификации като насока.

За допълнителна информация относно безопасността на продукта вижте глава 23.2.

Обща информация

Преди да използвате спрей за коса или да нанасяте козметични препарати, трябва да свалите слуховия апарат от ухото си, тъй като тези продукти могат да го повредят.

Когато не използвате слуховия апарат, оставяйте капака на отделението за батерията отворен, така че влагата да може да се изпари.

Подсушавайте добре слуховия апарат след употреба. Съхранявайте слуховия апарат на безопасно, сухо и чисто място.

Слуховият Ви апарат е устойчив на вода, пот и прах при следните условия:

- Капакът на батерията е плътно затворен. Уверете се, че при затварянето на капака на батерията няма захванати чужди тела, като например коса
- След излагане на вода, пот или прах слуховият апарат трябва да се почисти и подсуши
- Слуховият апарат се използва и поддържа по описания в това ръководство за експлоатация начин

❶ Използването на слуховия апарат около вода може да ограничи въздушния поток към батериите, което да доведе до спиране на работата. Ако слуховият Ви апарат спре да работи, след като влезе в контакт с вода, вижте стъпките за отстраняване на неизправности в глава 22.

Всеки ден

Проверявайте накрайника и тръбичката за отлагане на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте почистващи вещества от типа на домакински почистващи препарати, сапун и др. за почистване на слуховия апарат. Не се препоръчва изплакването на тези части с вода, тъй като това може да доведе до задържане на влага в тръбичката. Ако е необходимо често почистване на Вашия слухов апарат, се обърнете към Вашия слухопротезист за съвет.

Всяка седмица

Почиствайте накрайника с мека навлажнена кърпа или със специална почистваща кърпичка за слухови апарати. За по-подробни инструкции относно поддръжката или по-детайлно почистване се консултирайте с Вашия слухопротезист.

Всеки месец

Проверявайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. В случай на такива промени звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. Моля, посетете Вашия слухопротезист.

18. Смяна на накрайника

Проверявайте редовно накрайника и го сменете или почистете, ако изглежда мръсен или ако силата или качеството на звука на слуховия апарат намалее.

19. Обслужване и гаранция

Местна гаранция

Попитайте специалиста по слухопротезиране, от когото сте закупили Вашите слухови апарати, за условията на местната гаранция.

Международна гаранция

Sonova AG предоставя едногодишна ограничена международна гаранция, валидна от датата на закупуване. Тази ограничена гаранция обхваща дефекти в изработката и материалите на слуховия апарат, но не и аксесоарите, като батерии, тръбички, накрайници, външни приемници. Гаранцията е валидна само срещу документ, доказващ покупката.

Международната гаранция не оказва влияние върху законните ви права, които може да имате по силата на приложими национални законодателни норми, регулиращи продажбата на потребителски стоки.

Ограничения на гаранцията

Тази гаранция не покрива повреди вследствие на неправилно боравене или неправилна поддръжка, излагане на химикали или прекомерен натиск.

Повреди, причинени от трети страни или неупълномощени сервизни центрове, анулират гаранцията. Тази гаранция не включва услугите, извършени от слухопротезист на работното му място.

Сериен номер (отляво):

Сериен номер (отдясно):

Дата на покупка:

Упълномощен слухопротезист (печат/подпис):

20. Информация за съответствието

Европа:

Декларация за съответствие за слуховия апарат

С настоящото Sonova AG декларира, че този продукт отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия, както и на Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да бъде получен от производителя или от местния представител на Phonak, чийто адрес ще намерите в списъка на www.phonak.com/en-int/certificates (обекти на Phonak по света).

Австралия/Нова Зеландия:



R-NZ

Указва съответствието на дадено устройство с приложимите регулаторни разпоредби относно управлението на радиочестотния спектър (RSM) и тези на Австралийския орган за комуникации и медии (ACMA) за легална продажба на територията на Нова Зеландия и Австралия.

Маркировката за съответствие R-NZ се отнася за радиопродукти, доставяни на пазара на Нова Зеландия с ниво на съответствие A1.

Безжичните модели от списъка на страница 2 са сертифицирани съгласно:

Phonak Sky L-UP (L90/L70/L50/L30)

Phonak Sky L-UP Trial

USA	FCC ID: KWC-BPZ
Канада	IC: 2262A-BPZ

Забележка 1:

Това устройство съответства на Част 15 от правилника на Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) и на стандарт RSS-210 на Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада (Industry Canada).

Функционирането е предмет на следните две условия:

1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и

2) това устройство трябва да получава всички приемани смущения, включително такива, които може да причинят нежелано действие.

Забележка 2:

Промени или модификации, направени по това устройство, които не са изрично одобрени от Sonova AG, могат да отменят разрешението на Федералната комисия по комуникациите (FCC) за работа с това устройство.

Забележка 3:

Това устройство е изпитано и е установено, че съответства на ограниченията за цифрово устройство от Клас B, предмет на Част 15 от Правилника на Федералната комисия по комуникациите (FCC) и на стандарт ICES-003 на Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада (Industry Canada).

Тези ограничения имат за цел да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва

радиочестотна енергия и ако не е поставено и не се използва в съответствие с инструкциите, може да причини смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че тези смущения няма да се появят в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущението чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочване или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в електрически контакт, различен от този, в който е свързан приемника.
- Консултирайте се с разпространителя или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Радиоинформация за вашия слухов апарат

Тип антена	Антена с резонансна навивка
Работна честота	2,4 GHz – 2,48 GHz
Модулация	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Излъчена мощност (EIRP)	< 1 mW
Bluetooth®	
Диапазон	~ 1 m
Bluetooth	4.2 Двурежимен
Поддържани профили	HFP (профил „свободни ръце“), A2DP

Тест за емисии	Съответствие	Указание за електромагнитна среда
РЧ емисии CISPR 11	Група 2 Клас В	Медицинското устройство използва РЧ енергия само за своята вътрешна функция. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма вероятност да предизвикат смущения в близкостоящо електронно оборудване
Хармонични емисии	Съответства	
Колебания на напрежението/ емисии на фликера	Съответства	

Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

Слуховите апарати на Phonak са изпитани за ЕМС в съответствие с изискванията на IEC 60601-1-2:2014 или IEC 60601-1-2:2014 A1 2020.

21. Информация и описание на символите



Със символа CE Sonova AG потвърждава, че този продукт, включително аксесоарите към него, отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия, както и на Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията. Цифрите след символа CE отговарят на кода на сертифицираните институции, с които са се консултирали съгласно горепосоченият регламент и директива.



Този символ показва, че продуктите, описани в тези инструкции за потребителя, отговарят на изискванията за приложна част от Тип В на EN 60601-1. Повърхността на слуховия апарат е посочена като приложна част от тип В.



Показва производителя на медицинското изделие, както е дефинирано в Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия.



Показва датата, на която е произведено медицинското изделие.



Посочва упълномощения представител в Европейската общност. ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ ЗА ЕО е вносителят също и за Европейския съюз.



Този символ указва, че е важно потребителят да прочете и да се съобразява с предоставената в тези ръководства за експлоатация информация.



Този символ показва, че е важно потребителят да вземе под внимание съответните предупредителни забележки в тези ръководства за експлоатация.



Този символ показва, че е важно за потребителят да обърне внимание на съответните предупредителни известия, свързани с батериите в тези ръководства за експлоатация.



Важна информация за боравене и безопасност на продукта.



Този символ потвърждава, че електромагнитните смущения от устройството са в границите, одобрени от Федералната комисия за комуникация на САЩ.



Указва съответствието на дадено устройство с приложимите регулаторни разпоредби относно управлението на радиочестотния спектър (RSM) и тези на Австралийския орган за комуникации и медии (ACMA) за легална продажба на територията на Нова Зеландия и Австралия.

 **Bluetooth®** Словната марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth® SIG, Inc., и всяка употреба на тези марки от страна на Sonova AG се извършва с лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са притежание на съответните им собственици.



Японска маркировка за сертифицирано радиооборудване.



Показва серийния номер на производителя, за да може конкретното медицинско изделие да бъде идентифицирано.



Показва каталожния номер на производителя, за да може конкретното медицинско изделие да бъде идентифицирано.



Показва, че това устройство е медицинско изделие.



Този символ указва наличието на електронни инструкции за употреба.

IP68

Класификация за защита от проникване. Класификацията IP68 указва, че слуховият апарат е водо- и прахоустойчив. Издържал е при непрекъснато потапяне в 1 метър сладка вода за 60 минути и 8 часа в прахова камера съгласно стандарт IEC60529.



Указва температурните граници, на които медицинското устройство може безопасно да бъде изложено.



Указва диапазона на влажност, на който медицинското устройство може безопасно да бъде изложено.



Указва диапазона на атмосферно налягане, на който медицинското устройство може безопасно да бъде изложено.



Пазете продукта от влага по време на транспортирането му.



Символът със зачеркнатото кошче за отпадъци цели да Ви осведоми, че този слухов апарат, както и батериите, не могат да бъдат изхвърляни като обикновени битови отпадъци. Моля, изхвърляйте стари или неизползвани слухови апарати на места за изхвърляне, предназначени за изхвърляне на електронни отпадъци, или дайте слуховия си апарат на Вашия слухопротезист за изхвърляне. Правилното изхвърляне на отпадъците предпазва околната среда и здравето.

22. Отстраняване на неизправности

Проблем

Слуховият апарат свисти

Звукът на слуховия апарат е прекалено силен

Звукът на слуховия апарат не е достатъчно силен или е изкривен

Слуховият апарат издава два кратки звукови сигнала

Слуховият апарат не работи (няма усилване)

Слуховият апарат не се включва

Функцията за телефонно обаждане не работи

Индикаторната светлинка не мига

Причини

Слуховият апарат не е поставен правилно в ухото

Ушна кал в слуховия канал

Прекалено висока сила на звука

Прекалено ниска сила на звука

Ниско ниво на заряд на батерията

Блокиран накрайник

Слухът е променен

Индикация за изтощена батерия

Блокиран накрайник

Слуховият апарат е изключен

Батерията е напълно изтощена

Батерията е напълно изтощена

Слуховият апарат в режим „полет“

Слуховият апарат не е вдвоен с телефона

Изчерпан заряд на батерията

Батерията не е поставена правилно

Индикаторната светлинка не е активирана

❗ Ако проблемът продължава, се свържете с Вашия слухопротезист за съдействие.

Какво трябва да се направи

Поставете правилно слуховия апарат (глава 6)

Свържете се с Вашия слухопротезист

Намалете силата на звука, ако има наличен контрол на силата на звука (глава 8)

Увеличете силата на звука, ако има наличен контрол на силата на звука (глава 8)

Сменете батерията (глава 5)

Почистване на накрайника (глава 17)

Свържете се с Вашия слухопротезист

Сменете батерията в рамките на следващите 60 минути (глава 5)

Почистване на накрайника (глава 17)

Натиснете долната част на мултифункционалния бутон за 3 секунди (глава 8)

Сменете батерията (глава 5)

Сменете батерията (глава 5)

Изключете слуховия апарат и го включете отново (глава 12.2)

Сдвоете към телефона (глава 10)

Сменете батерията (глава 5)

Поставете батерията правилно (глава 5)

Свържете се с Вашия слухопротезист

За допълнителна информация проверете
<https://www.phonak.com/en-int/support>.

23. Важна информация за безопасността

Прочетете съответната информация за безопасност и информацията относно ограниченията на употребата на следващите страници, преди да използвате Вашия слухов апарат.

Предназначение

Слуховият апарат е предназначен за усилване и предаване на звук до ухото и по този начин да компенсира увредения слух.

Предвидена пациентска аудитория

Това устройство е предназначено за пациенти от 0 години, които удовлетворяват клиничното показание за този продукт.

Предвиден потребител

Предназначен за:

- Хора със слухова загуба
- Болногледачи на хора със слухова загуба
- Слухопротезист, отговорен за регулирането на слуховия апарат

Предвидено медицинско показание

Наличие на слухова загуба:

- Едностранна или двустранна
- Тип слухова загуба: проводима, сензорно-неврална или смесена
- Степени на слухова загуба:
 - Тежка
 - Дълбока

Медицински противопоказания

Медицинските противопоказания за използване на слуховите апарати включват:

- Деформация на ухото (т.е. затворен слухов канал; липса на ушна мида)
- Неврална слухова загуба (т.е. ретрокохлеарни патологии, като липсващ/нежизнеспособен слухов нерв)
- Данни за активна или хронична патология на средното или външното ухо, хронична секреция, данни за хронично възпаление

Клинична полза

- Подобряване на чуваемостта
- Подобряване на разбирането на речта (веднага след усвояване на езика)

Странични ефекти

Физиологичните странични ефекти на слуховите апарати, като шум в ушите, замаяност, натрупване на ушна кал, твърде много натиск, потене или влага, мехури, сърбеж и/или обриви, включен или пълнота и техните последствия, като главоболие и/или болки в ушите, може да бъдат разрешени или намалени от Вашия слухопротезист. Конвенционалните слухови апарати имат потенциала да излагат пациентите на по-високи нива на експозиция на шум, което може да доведе до прагови отклонения в честотния диапазон, засегнат от акустичната травма.

Основните критерии за насочването на пациент за медицинско или друго становище на специалист и/или лечение са следните:

- Видима вродена или травматична деформация на ухото;
- История за активен дренаж от ухото през предходните 90 дни;
- История на внезапна или бързо прогресираща слухова загуба в едното или и в двете уши в рамките на предходните 90 дни;

- Остра или хронична замаяност;
- Аудиометричен костно-въздушен интервал, равен на или по-голям от 15 dB при 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz;
- Видимо доказателство за значително натрупване на ушна кал или чуждо тяло в слуховия канал;
- Болка или дискомфорт в ухото;
- Абнормен вид на тъпанчето и слуховия канал, като например:
 - Възпаление на външния слухов канал
 - Перфорирано тъпанче
 - Други аномалии, за които слухопротезистът вярва, че са медицински притеснения

Специално внимание трябва да се приложи при избирането и поставянето на слуховия апарат, чието максимално ниво на звуково налягане надхвърля 132 децибела (dB), понеже може да има риск от влошаване на остатъчния слух на потребителя на слуховия апарат. (Това условие се изисква само за тези слухови апарати с максимална възможност за звуково налягане над 132 dB).

Специалистът по слухопротезиране може да реши, че направлението не е подходящо или не е в най-добрите интереси на пациента, когато се прилага следното:

- Когато има достатъчно доказателство, че състоянието е било напълно проучено от медицински специалист и е било предоставено всяко възможно лечение;
- Състоянието не се е влошило или променило значително от предходното изследване и/или лечение.

Ако пациентът е дал своето информирано и компетентно решение да не приема съвета да потърси медицинско становище, допустимо е да се премине към препоръчване на подходящи системи за слухови апарати при условие на следните съображения:

- Препоръката няма да има никакви нежелани ефекти върху здравето или общото благосъстояние на пациента;
- Записите потвърждават, че са направени всички необходими съображения с оглед на най-доброто за пациента

Ако се изисква по закон, пациентът е подписал отказ от права, за да потвърди, че консултацията на насочващото лице не е приета и че това е информирано решение.

Слуховият апарат е подходящ за домашна среда и поради своята преносимост може да се окаже, че се използва в професионална среда, като например лекарски кабинети, зъболекарски кабинети и т.н.

Слуховият апарат няма да възстанови нормалния слух и няма да предотврати или да подобри слуховото нарушение в резултат на органични условия. Рядката употреба на слуховия апарат не позволява на потребителя да се възползва максимално от него. Употребата на слухов апарат е само част от слуховото хабилиране и може да е необходимо да се допълни от слухово обучение и инструктаж по четене по устни.

Обратната връзка, лошото качество на звука, твърде силните или твърде меките звуци, неподходящата настройка или проблемите при дъвчене или преглъщане могат да бъдат разрешени или подобрени по време на процеса за фина настройка при процедурата за настройка от Вашия слухопротезист.

Всякакви сериозни инциденти, които са настъпили във връзка със слуховия апарат, трябва да бъдат съобщавани на представителя на производителя и на компетентните власти в държавата на пребиваване. Сериозният инцидент се описва като всеки инцидент, който пряко или косвено е довел, може да е довел или може да доведе до някое от следните:

- а) смърт на пациент, потребител или друго лице
- б) временно или постоянно сериозно влошаване на здравословното състояние на пациента, на потребителя или на друго лице
- с) сериозна заплахата за общественото здраве.

За докладване на неочакван начин на работа или събитие, моля, свържете се с производителя или негов представител.

23.1 Предупреждения за опасности

-  Вашите слухови апарати работят в честотния диапазон 2,4 GHz – 2,48 GHz. Когато възнамерявате да пътувате със самолет, проверете дали самолетната компания изисква устройствата да бъдат превключвани в режим полет, вижте глава 12.
-  Слуховите апарати (специално програмирани за всяка слухова загуба) трябва да се използват само от лицето, за което са предназначени. Те не трябва да се използват от друго лице, тъй като може да увредят слуха.
-  Промени или модификации по слуховия апарат, които не са изрично одобрени от Sonova AG, не са позволени. Подобни промени могат да повредят вашето ухо или слуховия апарат.
-  Не използвайте слуховите апарати във взривоопасни зони (мини или индустриални зони с опасност от експлозии, наситени на кислород зони или зони, където се работи с възпламеними анестетици). Устройството не е сертифицирано по ATEX.



Ако усещате болка във или зад ухото, ако се появи възпаление, раздразнение на кожата или ускорено натрупване на ушна кал, обърнете се към Вашия слухопротезист или лекар.



Слуховите програми в режим на насочен микрофон заглушават околните шумове. Имайте предвид, че предупредителните сигнали или шумове, идващи отзад, напр. от автомобили, са частично или изцяло заглушени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: батериите на устройството са опасни и могат да причинят сериозни наранявания, ако бъдат погълнати или поставени вътре в някоя част на тялото, независимо дали батерията е използвана или е нова! Дръжте далеч от достъпа на деца, лица с когнитивни нарушения или домашни любимци. Ако подозирате, че дадена батерия е погълната или поставена в някоя част на тялото, веднага се консултирайте с Вашия лекар без никакво закъснение!

 Информацията по-долу се отнася само за лица с активни имплантируеми медицински устройства (напр. пейсмейкъри, дефибрилатори и др.):

- Дръжте слуховия апарат на поне 15 cm (6 инча) от активния имплант. При появата на каквито и да било смущения не използвайте слуховите апарати и се свържете с производителя на активния имплант. Имайте предвид, че смущения могат да бъдат причинени също и от електропроводи, електростатичен разряд, детектори за метал на летища и др.
- Дръжте магнити (т.е. инструмент за работа с батерията, EasyPhone магнит и др.) поне на 15 cm (6 инча) от активния имплант.

 Използването на аксесоари, трансдюсери и кабели, различни от посочените или предоставените от производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или понижена електромагнитна устойчивост на това оборудване и да причини неправилно функциониране.

 Преносимото радиочестотно комуникационно оборудване (включително периферни устройства като антенни кабели и външни антени) не трябва да се ползва на разстояние по-малко от 30 cm (12 инча) от частите на слуховите апарати, включително кабелите, посочени от производителя. В противен случай може да се стигне до влошаване на функционалността на оборудването.

 Не допускайте ухото ви да понася силни физически удари, когато носите слухов апарат с индивидуално изработени черупки/накрайници. Устойчивостта на индивидуално изработените черупки/накрайници е предвидена за нормална употреба. Силният физически удар върху ухото ви (напр. по време на спорт) може да доведе до счупване на индивидуално изработеният накрайник. Това може да причини перфорация на слуховия канал или тъпанчето.

 След механично усилие или удар по слуховия апарат се уверете, че черупката му е цяла, преди да го поставите в ухото.

 Трябва да се избягва използването на това оборудване в близост до или върху друго оборудване, защото това може да доведе до неправилно функциониране. Ако подобно използване е наложително, това оборудване и другото оборудване следва да се наблюдават, за да се провери дали работят нормално.

 Слуховите апарати не трябва да се използват с домчета/системи за предпазване от натрупване на ушна кал при пациенти със спукани тъпанчета, с възпалени слухови канали или други увреждания на кухините на средното ухо. При тези случаи препоръчваме използването на класическа отливка. В много редките случаи, когато някоя част от този продукт заседне в слуховия ви канал, силно препоръчително е да потърсите помощ от медицинско лице за безопасното отстраняване.

 Повечето от потребителите на слухови апарати имат слухова загуба, при която влошаването на слуха не се очаква при редовното използване на слуховия апарат в ежедневните ситуации. Само малка група лица със слухова загуба, носещи слухови апарати, могат да бъдат изложени на риск от влошаване на слуха след дълъг период на употреба.

 В много редки случаи, ако не бъде сигурно поставен, слухов накрайник или част от него може да остане в слуховия Ви канал, когато сваляте слуховия апарат от ухото. В много редки случаи такава част може да заседне в слуховия ви канал, като тогава силно се препоръчва да потърсите лекарска помощ за безопасно отстраняване.

 Обезопасяващи решения за подвижните части (напр. капак на батерията и рогче) трябва да се монтират за деца под 36-месечна възраст, за да се предотврати инцидентното поглъщане или вдишване на малки части. В случай че едно от тези обезопасяващи решения е повредено, устройството трябва да се занесе на Вашия слухопротезист за ремонт или замяна.

 Слуховият апарат е малко устройство, съдържащо малки части, които биха могли да бъдат погълнати, вдишани или да предизвикат увреда на меките тъкани (напр. очите). При поглъщане, вдишване или вкарване в меките тъкани веднага се консултирайте с лекар или болница, тъй като слуховият апарат или неговите малки части могат да предизвикат задушаване, аспирация или увреждане на меките тъкани.

23.2 Информация за безопасността на продукта

- ① Тези слухови апарати са водоустойчиви, но не са импрегнирани. Те са предназначени за употреба при ежедневни дейности и случайно излагане на екстремни условия. Никога не потапяйте вашия слухов апарат във вода! Тези слухови апарати не са предназначени за продължително потапяне във вода, като например при плуване или къпане. Винаги сваляйте вашия слухов апарат преди подобни дейности, тъй като той съдържа чувствителни електронни компоненти.
- ① Никога не почиствайте с вода отворите на микрофона. В противен случай той може да изгуби специфичните си акустични функции.
- ① Пазете Вашия слухов апарат от топлина и слънчева светлина (никога не го оставяйте до прозорец или в колата). Никога не използвайте микровълнови фурни или други отоплителни устройства, за да сушите слуховия си апарат. Попитайте Вашия слухопротезист кои са подходящите методи за подсушаване.

- ❗ Когато не използвате слуховия апарат, оставайте капака на отделението за батерията отворен, така че влагата да може да се изпарява. Подсушавайте добре слуховия апарат след употреба. Съхранявайте слуховия апарат на безопасно, сухо и чисто място.
- ❗ Не изпускайте слуховия си апарат! Изпускането върху твърда повърхност може да повреди вашия слухов апарат.
- ❗ Винаги използвайте нови батерии за вашия слухов апарат. Ако батерията протече, сменете я незабавно с нова, за да избегнете кожни възпаления. Можете да върнете използваните батерии на Вашия слухопротезист.
- ❗ Ако не използвате Вашия слухов апарат за дълъг период от време, съхранявайте го в кутия с абсорбираща таблетка или на място, което е добре проветрено. Това дава възможност влагата да се изпари от вашия слухов апарат и възпрепятства потенциално негативно въздействие върху неговото функциониране.
- ❗ Изваждайте батерията, ако няма да използвате слуховия си апарат продължително време.

❗ Специални медицински или стоматологични прегледи, включващи радиация, описани по-долу, могат да повлияят отрицателно на правилното функциониране на Вашите слухови апарати. Свалете го и го оставете някъде извън помещението/зоната, където се извършва прегледът, преди да се подлагате на:

- Медицински или стоматологични прегледи с рентгенови лъчи (включително компютърна томография).
- Медицински прегледи с ЯМР, генериращи магнитни полета.

Не е необходимо да сваляте слуховите апарати, когато преминавате през охранителни скенери (на летища и др.). Ако се използват рентгенови лъчи, то те ще са в много ниски дози и няма да повлияят на слуховите апарати.

❗ Не използвайте слуховия си апарат в зони, където е забранено използването на електронно оборудване.

❗ Необходимо е да сменяте домчето на всеки три месеца или когато стане твърдо или трошливо. Това е с цел да се предотврати разкачването на домчето от тръбичката по време на поставянето или изваждането от ухото.

Вашият слухопротезист:



EC	REP
----	-----

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Германия



Производител:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Швейцария
www.phonak.com

029-1308-24/V1.00/2023-05/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459

