




Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


Reproduktor S

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina zvukového tlaku

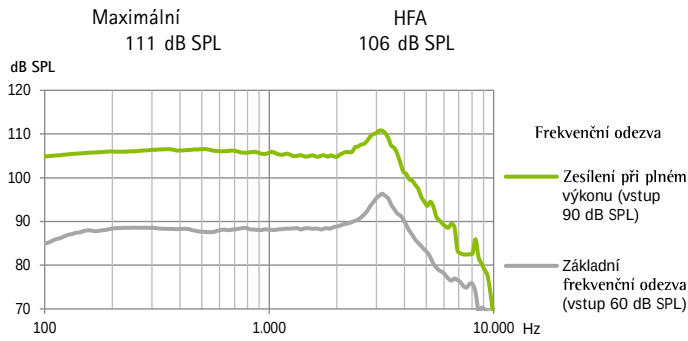

Akustické zesílení

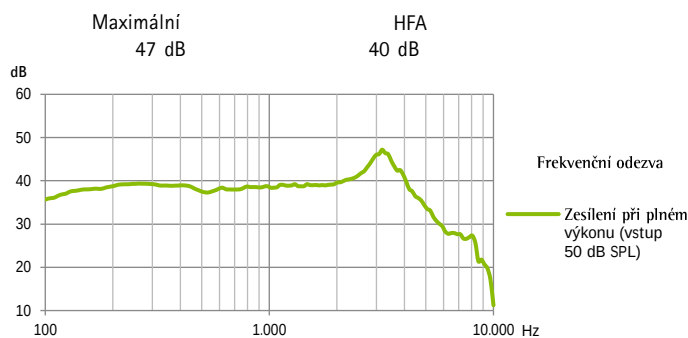


Frekvenční rozsah	<100 Hz - >8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		


Reproduktor M

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina zvukového tlaku

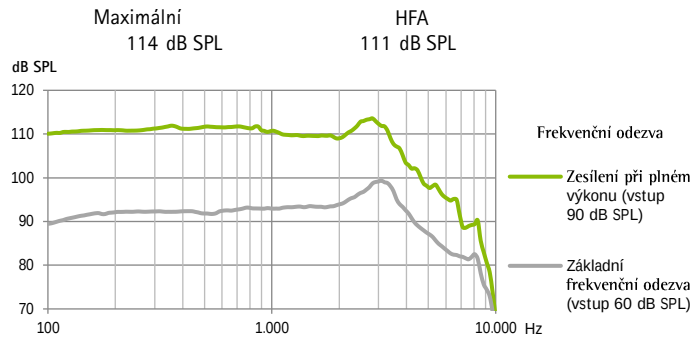

Akustické zesílení

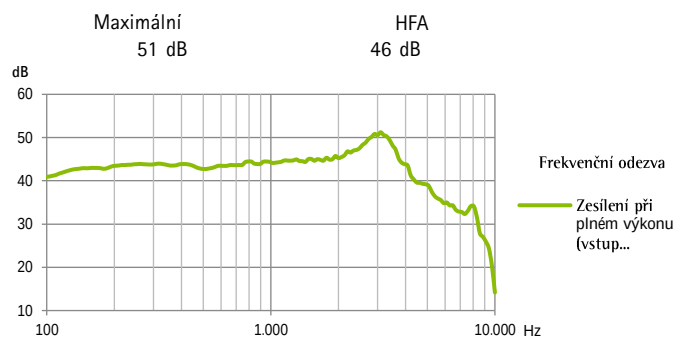

Frekvenční rozsah	<100 Hz - >8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

Obecné informace k testu

- Je použito konkrétní nastavení měření. Nastavení RTS pomocí ovládání hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňové zvětšení je aktivní.
- Všechna získaná data jsou měřena s nastavením měření ve Phonak Targetu.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Varování

- ⚠ Výstupní hladina zvukového tlaku tohoto sluchadla může přesáhnout 132 dB SPL. Při nastavení tohoto přístroje je nutno dbát zvláštní opatrnosti, protože existuje riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou dovoleny. Takové změny mohou poškodit sluch či sluchadlo.

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechovém prostředí.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-R (L90/L70/L50/L30/Trial)


Reproduktor MAV
Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina zvukového tlaku

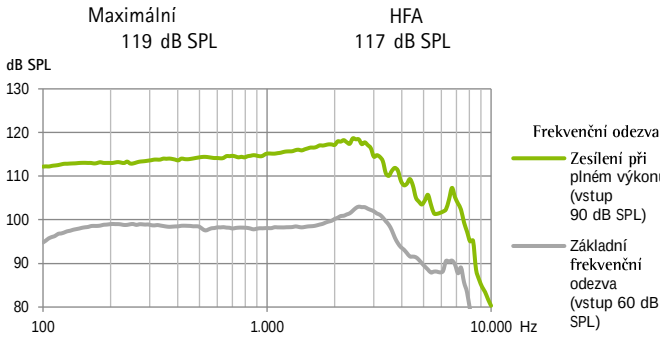

Akustické zesílení

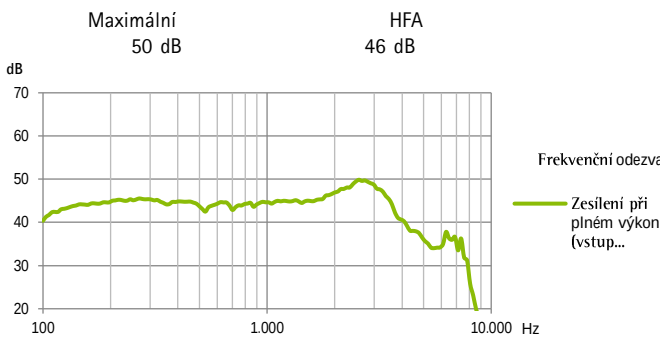


Frekvenční rozsah	<100 Hz - >8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			


Reproduktor P
Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina zvukového tlaku

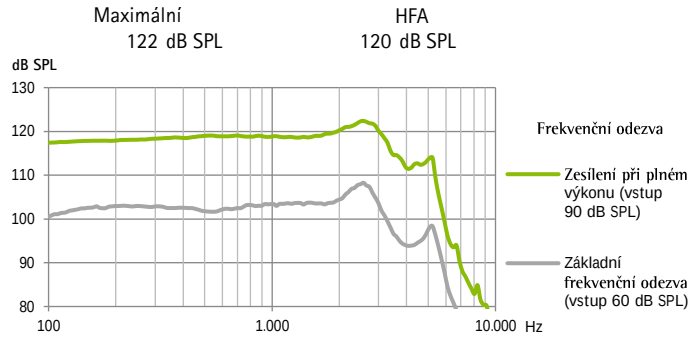

Akustické zesílení

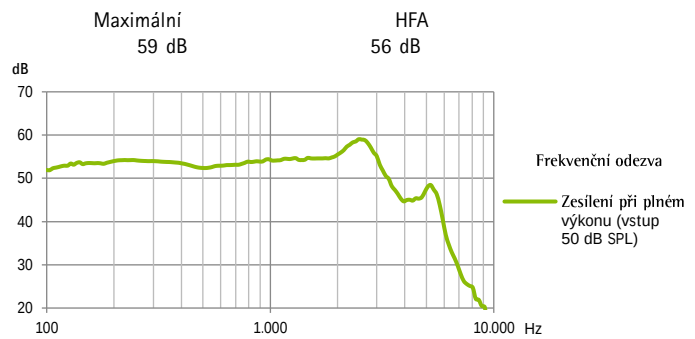

Frekvenční rozsah	<100 Hz - 6 300 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechovém prostředí.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand




Reproduktor UP


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Výstupní hladina zvukového tlaku

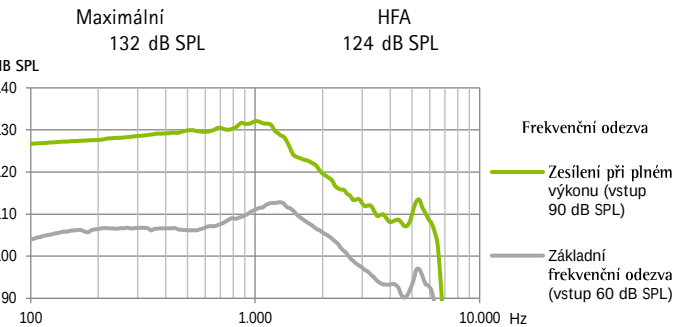

Akustické zesílení

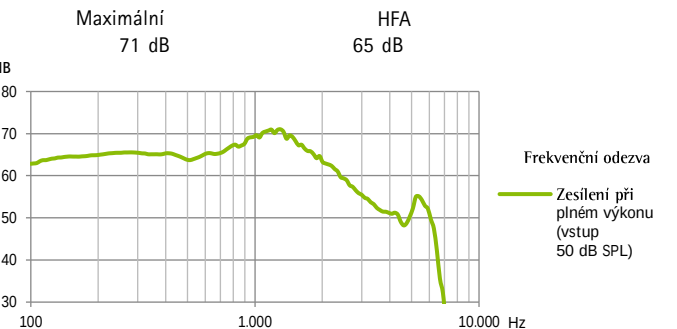

Frekvenční rozsah	<100 Hz - 6 100 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Předpokládaná doba provozu*	18	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

*Předpokládaná doba provozu nabíjecí baterie závisí na aktivních funkcích, použití bezdrátového příslušenství, ztrátě sluchu, stáří baterie a poslechovém prostředí.



CE 0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

