



Phonak Terra BTE-UP/Phonak Terra+ BTE-UP

Standardní hák HE11

Data vazby kupleru 2 cm³


ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Standardní hák HE11 680


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022


Výstupní hladina akustického tlaku

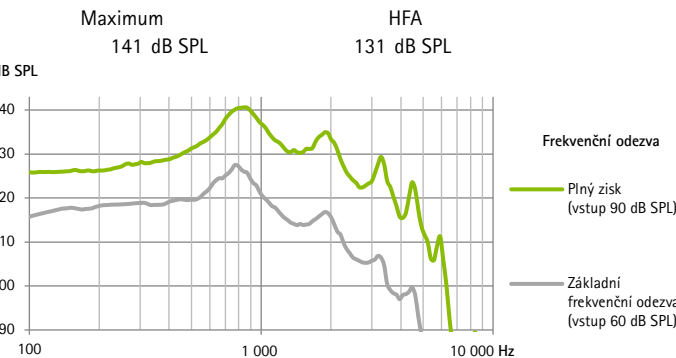

Výstupní hladina akustického tlaku

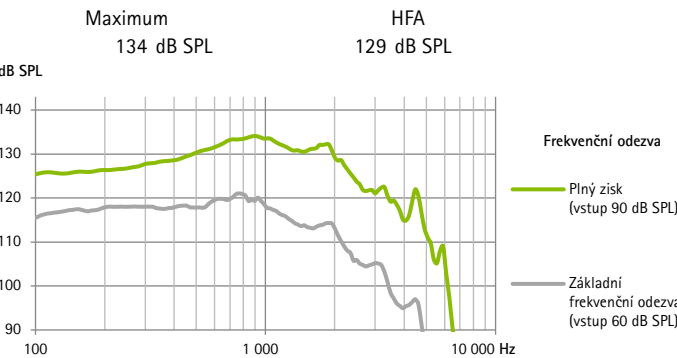


Akustický zisk

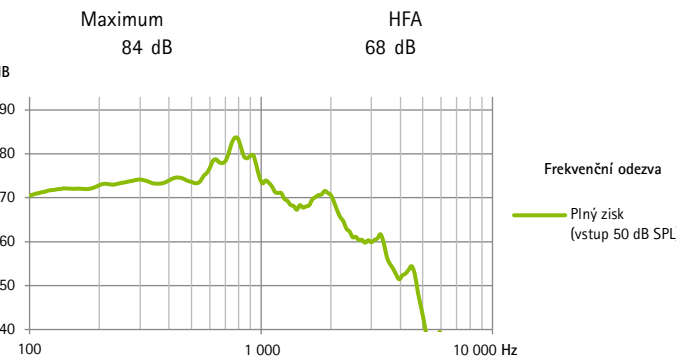

Frekvenční rozsah	< 100 Hz – 4 700 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	3,3 mA			
Předpokládaná doba provozu*	188 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		


Akustický zisk

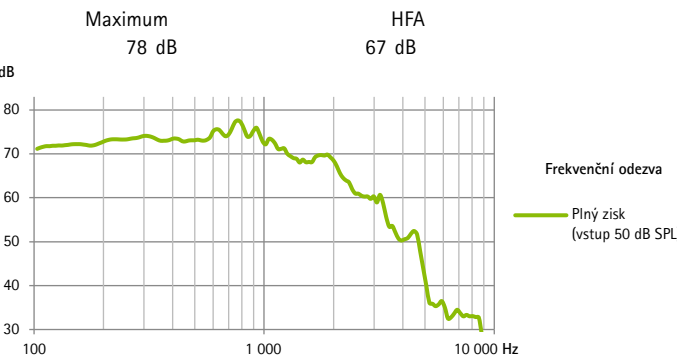

Frekvenční rozsah	< 100 Hz – 4 700 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	2,8 mA			
Předpokládaná doba provozu*	221 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		


Citlivost indukční cívky

ETLS	HFA SPLIV
0 dB	115 dB SPL

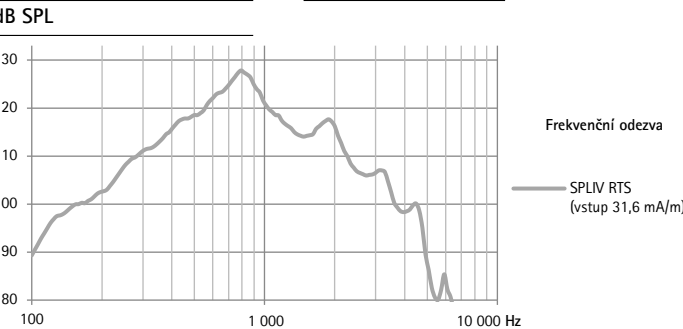

Citlivost indukční cívky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	114 dB SPL

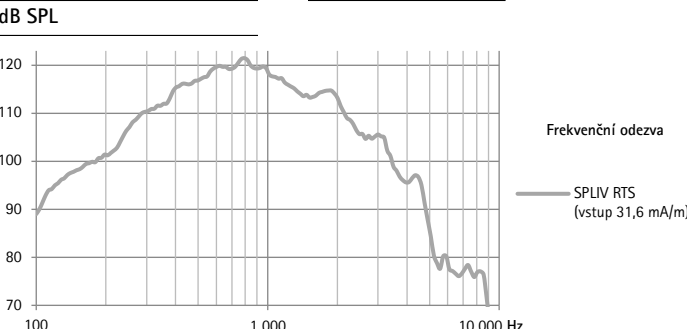

Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V/impedance 6,2 Ω.
- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Upozornění

- ⚠ Toto sluchadlo má výstupní hladinu zvukového tlaku, která může překročit 132 dB SPL. Při nastavování tohoto zařízení je třeba dbát zvláštní opatrnosti, hrozí riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.
- ⚠ Vzniklý zvukový tlak (SPL) v uších dětí může být podstatně vyšší než u průměrné dospělé osoby. Pro korekci cílové hodnoty se doporučuje naměřená hodnota RECD pro nastavení OSPL90.

*Doba provozu baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie, poslechovém prostředí a typu ušní koncovky. Upozorňujeme, že u nedobíjecích zinko-vzduchových baterií se doba provozu může lišit podle velikosti baterie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on