

Phonak CROS 1.

Οδηγίες Χρήσης

Phonak CROS I-R
Phonak CROS I-R Trial





Λεπτομέρειες του συστήματος CROS

Αυτές οι Οδηγίες Χρήσης ισχύουν για:

Ασύρματη συσκευή CROS

Phonak CROS I-R

Phonak CROS I-R Trial



Μπορείτε να βρείτε βίντεο με απλές οδηγίες και πρόσθετη υποστήριξη στο διαδίκτυο:

<https://www.phonak.com/en-int/support.html>



Οδηγίες για τις λειτουργίες δραστηριότητας περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Χρήσης myPhonak.



- ❶ Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και δεν γνωρίζετε το μοντέλο της συσκευής CROS που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
- ❶ Η συσκευή CROS που περιγράφεται σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❶ Επίσης, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας αναφορικά με τον χειρισμό της επαναφορτιζόμενης συσκευής CROS (κεφάλαιο 23).

Μοντέλο συσκευής CROS

- ☐ CROS I-R
- ☐ CROS I-R Trial

Εξαρτήματα για το αυτί

- ☐ Θηλή
- ☐ SlimTip
- ☐ Άκρο CROS

Αξεσουάρ φόρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατά αξεσουάρ, συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή σας.

Για την πλήρη λίστα ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://www.phonak.com/cros-i-professionals>

Η συσκευή CROS και ο φορτιστής σας έχουν κατασκευαστεί από τη Phonak, τον παγκόσμιο ηγέτη στις ακουστικές λύσεις με έδρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αυτά τα premium προϊόντα είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και εξειδίκευσης και είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τη δική σας ευεξία. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική επιλογή σας και σας ευχόμαστε πολλά χρόνια ακουστικής απόλαυσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο έπακρο τη συσκευή που διαθέτετε. Δεν απαιτείται εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτής της συσκευής. Ο ακοοπροθετιστής θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τις ατομικές σας προτιμήσεις στο πλαίσιο της καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, ρύθμιση, χρήση και συντήρηση ή επισκευή της συσκευής CROS και των αξεσουάρ σας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο δεδομένων του προϊόντος σας.

Phonak - life is on
www.phonak.com



Περιεχόμενα

Η συσκευή CROS

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Συνοπτικός οδηγός | 7 |
| 2. | Τα μέρη της συσκευής CROS | 9 |

Χρήση του φορτιστή

- | | | |
|----|---------------------------|----|
| 3. | Φόρτιση της συσκευής CROS | 11 |
|----|---------------------------|----|

Χρήση της συσκευής CROS

- | | | |
|-----|---|----|
| 4. | Αριστερή και δεξιά ένδειξη συσκευής CROS | 15 |
| 5. | Τοποθέτηση της συσκευής CROS | 16 |
| 6. | Αφαίρεση της συσκευής CROS | 17 |
| 7. | Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών | 18 |
| 8. | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | 19 |
| 9. | Λειτουργία Tap Control | 20 |
| 10. | Επισκόπηση συνδεσιμότητας | 21 |
| 11. | Αρχική σύζευξη | 22 |
| 12. | Τηλεφωνικές κλήσεις | 24 |
| 13. | Λειτουργία πτήσης | 29 |
| 14. | Επανεκκίνηση της συσκευής CROS | 30 |
| 15. | Επισκόπηση εφαρμογών myPhonak και myPhonak Junior | 31 |

Περισσότερες πληροφορίες	
16.	Περιβαλλοντικές συνθήκες 32
17.	Φροντίδα και συντήρηση 34
18.	Αντικατάσταση του εξαρτήματος για το αυτί 37
19.	Επισκευή και εγγύηση 39
20.	Πληροφορίες συμμόρφωσης 41
21.	Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων 48
22.	Αντιμετώπιση προβλημάτων 54
23.	Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 58




1. Συνοπτικός οδηγός


Φόρτιση της συσκευής CROS

❶ Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για 3 ώρες.


Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή CROS στον φορτιστή, η φωτεινή ένδειξη θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου η συσκευή CROS φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη, δηλ., θα είναι σταθερά πράσινη.

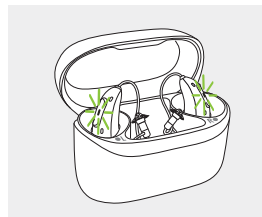

Ενδείξεις αριστερής και δεξιάς συσκευής CROS

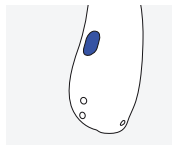


Μπλε ένδειξη για το
αριστερό ακουστικό βαρηκοΐας.

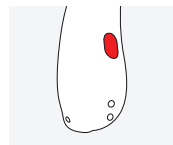

Κόκκινη ένδειξη για το
δεξί ακουστικό βαρηκοΐας.

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών με φωτεινή ένδειξη

Το κουμπί διαθέτει αρκετές λειτουργίες. Η κύρια λειτουργία είναι σαν διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Μαζί με τον ακουσπροθετιστή σας, μπορείτε να αποφασίσετε εάν το κουμπί θα επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση έντασης ήχου, τη σίγαση, την αλλαγή προγράμματος και άλλες λειτουργίες. Αυτό επισημαίνεται στις εξατομικευμένες οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

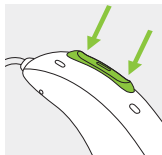

Τηλεφωνικές κλήσεις: Εάν πραγματοποιηθεί σύζευξη με τηλέφωνο που διαθέτει Bluetooth®, με ένα σύντομο πάτημα θα γίνεται αποδοχή και με ένα παρατεταμένο πάτημα θα γίνεται απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε σταθερά το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η φωτεινή ένδειξη.

Ενεργοποίηση: η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα

Απενεργοποίηση: η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα

Λειτουργία πτήσης: Η ίδια η συσκευή CROS μπορεί απλά να απενεργοποιηθεί, καθώς δεν εκπέμπεται σήμα κατά τη λειτουργία πτήσης.

Λειτουργία Tap Control

Εάν το σύστημα CROS που διαθέτετε έχει ρυθμιστεί με επίπεδο απόδοσης 190 ή ακουστικό βαρηκοΐας 170, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλαπλές λειτουργίες μέσω της λειτουργίας Tap Control. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 9 αυτών των Οδηγιών Χρήσης και στις Οδηγίες Χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Tap Control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



2. Τα μέρη της συσκευής CROS

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν το μοντέλο της συσκευής CROS που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα δικά σας μοντέλα:

- ελέγχοντας την ενότητα «Λεπτομέρειες για το σύστημα CROS» στη σελίδα 3.
- συγκρίνοντας τα εξαρτήματα για το αυτί και το ακουστικό βαρηκοΐας σας με τα μοντέλα που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες.

Το Phonak CROS I παρέχει τις λύσεις CROS και BICROS για άτομα με απώλεια ακοής, χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί. Το CROS I φοριέται στο αυτί χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης για να λαμβάνει ήχους και να τους μεταδίδει ασύρματα σε ένα συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας Phonak που φοριέται στο αυτί με την καλύτερη ακοή. Το CROS I δεν έχει ακουστική έξοδο.

Συσκευή Phonak CROS I + Ακουστικό βαρηκοΐας Phonak = Σύστημα Phonak CROS

❶ Το CROS I είναι συμβατό μόνο με ακουστικά βαρηκοΐας Audéo I-R.

Πιθανά εξαρτήματα για το αυτί



Θηλή



SlimTip



Άκρο CROS


CROS I-R CROS I-R Trial

Ακουστικός
σωλήνας

Κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών
με ενσωματωμένη
φωτεινή ένδειξη

Στοιχείο συγκράτησης
(προαιρετικό)

Ομοίωμα ηχείου
(χωρίς συνδεδεμένο εξάρτημα για το αυτί)

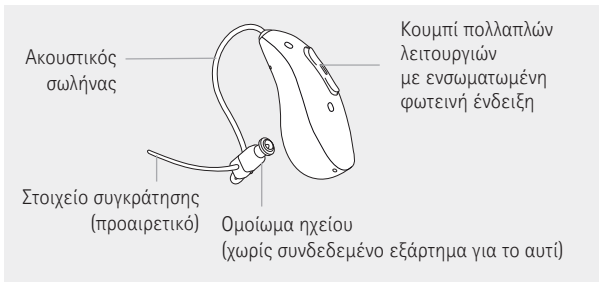

3. Φόρτιση της συσκευής CROS


- ❶ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS για πρώτη φορά, συνιστάται να τη φορτίσετε για 3 ώρες.
- ❷ Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα ακούσετε δύο μπιπ στο ακουστικό βαρηκοΐας. Θα έχετε χρονικό περιθώριο περίπου 60 λεπτών πριν χρειαστεί να φορτίσετε τη συσκευή CROS (το χρονικό περιθώριο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του ακουστικού βαρηκοΐας ή της συσκευής CROS).
Στη συνέχεια, το σύστημα CROS θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- ❸ Η συσκευή CROS περιέχει μια ενσωματωμένη και μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.
- ❹ Το σύστημα CROS πρέπει να είναι στεγνό πριν από τη φόρτιση, βλ. κεφάλαιο 17.
- ❺ Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το σύστημα CROS εντός εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: +5° έως +40° Κελσίου (41° έως 104° Φαρενάιτ).
- ❻ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση του εξαρτήματος ακουστικού βαρηκοΐας του συστήματος CROS, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φορτιστή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του φορτιστή.

1.

Εισαγάγετε τη συσκευή CROS στην υποδοχή φόρτισης και το εξάρτημα για το αυτί στη μεγάλη κοιλότητα.

Βεβαιωθείτε ότι η αριστερή/δεξιά ένδειξη στη συσκευή CROS ταιριάζει με την αριστερή (μπλε) ή τη δεξιά (κόκκινη) ένδειξη δίπλα στις υποδοχές φόρτισης. Η συσκευή CROS θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις εισαχθεί στον φορτιστή που συνδέεται με το τροφοδοτικό.

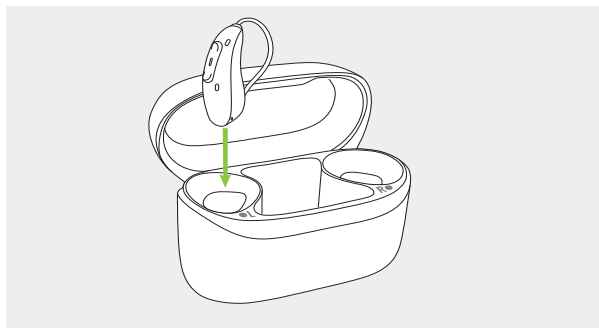

2.

Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή CROS θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας έως ότου φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει πλήρως, η φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη, δηλ. θα είναι σταθερά πράσινη.

Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα όταν η μπαταρία θα είναι πλήρως φορτισμένη, έτσι ώστε να μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή CROS με ασφάλεια στον φορτιστή. Μπορεί να χρειαστούν έως 3 ώρες για να φορτίσει η συσκευή CROS. Κατά τη φόρτιση μπορείτε να κλείσετε το καπάκι του περιβλήματος φορτιστή.

Χρόνοι φόρτισης

Φωτεινή ένδειξη	Κατάσταση φόρτισης	Εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης
● ● ●	0 – 10%	
● ● ●	11 – 80%	30 λεπτά (20%) 60 λεπτά (40%) 120 λεπτά (70%)
● ● ●	81 – 99%	
■	100%	3 ώρες

3.

Αφαιρέστε τη συσκευή CROS από την υποδοχή φόρτισης απλώς τραβώντας την από τον φορτιστή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή CROS ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν αφαιρείται από τον φορτιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, η φωτεινή ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία υποδεικνύει ότι η συσκευή CROS είναι έτοιμη για χρήση.



❶ Μην κρατάτε το σωληνάκι για την αφαίρεση της συσκευής CROS από τον φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σωληνάκι.





4. Αριστερή και δεξιά ένδειξη συσκευής CROS

Υπάρχει μια κόκκινη ή μπλε ένδειξη στο πίσω μέρος της συσκευής CROS και στο ομοίωμα ηχείου. Το χρώμα της ένδειξης υποδεικνύει αν η συσκευή CROS προορίζεται για τοποθέτηση στο αριστερό ή στο δεξί αυτί.

Μπλε ένδειξη για τη συσκευή που φοριέται στο **αριστερό αυτί**.

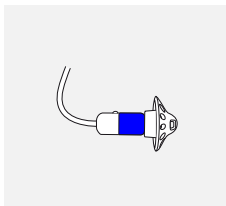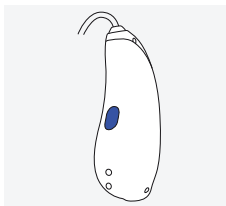


Κόκκινη ένδειξη για τη συσκευή που φοριέται στο **δεξί αυτί**.

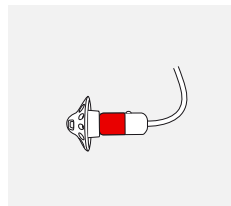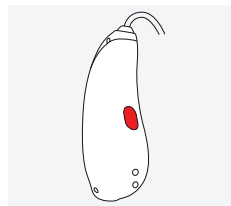

5. Τοποθέτηση της συσκευής CROS


1.

Τοποθετήστε τη συσκευή CROS πίσω από το αυτί σας.

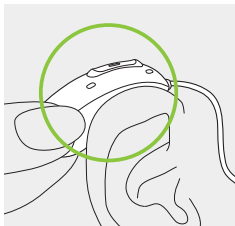


2.

Τοποθετήστε το εξάρτημα για το αυτί στον ακουστικό πόρο σας.

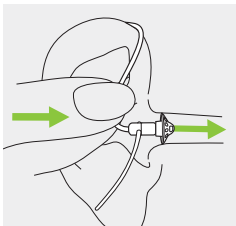


3.

Αν το εξάρτημα για το αυτί είναι συνδεδεμένο με στοιχείο συγκράτησης, τοποθετήστε το μέσα στην κοιλότητα του αυτιού σας για να στερεώσετε με ασφάλεια τη συσκευή CROS.

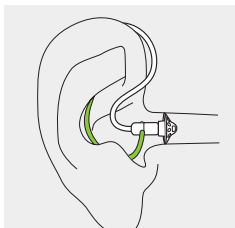

6. Αφαίρεση της συσκευής CROS


Τραβήξτε το κυρτό τμήμα του σωλήνα και αφαιρέστε τη συσκευή CROS από το πίσω μέρος του αυτιού.

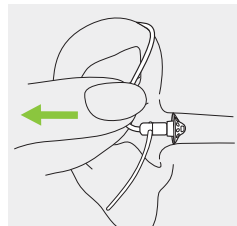

7. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών διαθέτει αρκετές λειτουργίες.

Λειτουργεί σαν διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, διακόπτης σίγασης/κατάργησης σίγασης, έλεγχος ισοστάθμισης όταν υπάρχει ασύρματη μετάδοση ήχου από τη συσκευή CROS στο ακουστικό βαρηκοΐας ή/και αλλαγή προγράμματος ανάλογα με τον προγραμματισμό του συστήματος CROS. Αυτό υποδεικνύεται στις εξατομικευμένες «Οδηγίες συσκευής CROS και ακουστικού βαρηκοΐας» που σας έχουν δοθεί. Για να προμηθευτείτε το έντυπο, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.

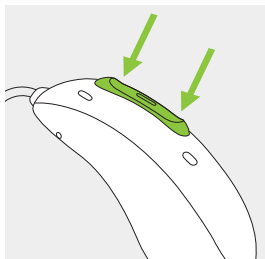


Αν το σύστημα CROS είναι συζευγμένο με τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth, με σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού αποδέχεστε και με παρατεταμένο πάτημα απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση – ανατρέξτε στο κεφάλαιο 12.

8. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή CROS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή CROS ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν αφαιρείται από τον φορτιστή. Αν δεν έχει διαμορφωθεί αυτή η λειτουργία, πιέστε σταθερά και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήσει. Περιμένετε μέχρι η σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία να υποδείξει ότι η συσκευή CROS είναι έτοιμη.

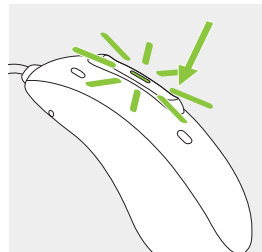

Απενεργοποιήστε τη συσκευή CROS

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του κουμπιού για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η σταθερά κόκκινη αναμμένη λυχνία να υποδείξει ότι η συσκευή CROS απενεργοποιείται.

● ● ●	Ένδειξη που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η συσκευή CROS ενεργοποιείται
—	Λυχνία αναμμένη σταθερά με κόκκινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα	Η συσκευή CROS απενεργοποιείται

9. Λειτουργία Tap Control

Η λειτουργία Tap Control διατίθεται μόνο για τα επαναφορτιζόμενα μοντέλα I90 και I70.


Εάν αποτελούν μέρος του συστήματος CROS, οι λειτουργίες του Tap Control είναι διαθέσιμες και στη συσκευή CROS και περιγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης του ακουστικού βαρηκοΐας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Tap Control, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του αυτιού σας.



10. Επισκόπηση συνδεσιμότητας

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι επιλογές συνδεσιμότητας που διατίθενται για το σύστημα CROS που διαθέτετε.

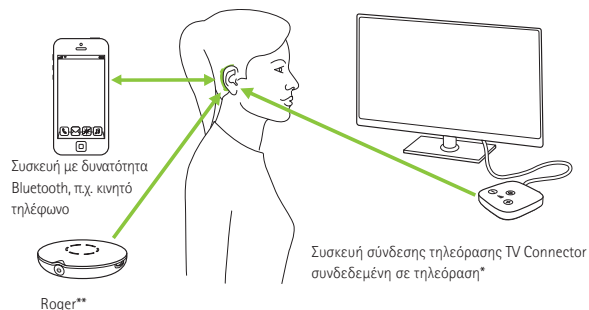

Επισημαίνεται ότι σε ένα σύστημα CROS μόνο το ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικές συσκευές.

* Η συσκευή σύνδεσης τηλεόρασης TV Connector μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πηγή ήχου, όπως τηλεόραση, υπολογιστής ή στερεοφωνικό σύστημα.

** Μπορείτε να συνδέσετε και τα ασύρματα μικρόφωνα Roger στο σύστημα CROS που διαθέτετε.


11. Αρχική σύζευξη

11.1 Αρχική σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth®

❶ Η διαδικασία σύζευξης με κάθε συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Μετά την αρχική σύζευξη, το σύστημα CROS θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή. Η αρχική διαδικασία σύζευξης μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά.

1.
Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας (π.χ. τηλέφωνο) και αναζητήστε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων συνδεσιμότητας.

2.
Ενεργοποιήστε το ακουστικό βαρηκοΐας και τη συσκευή CROS. Έχετε τώρα 3 λεπτά για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή σας.

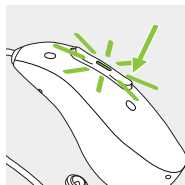

3.

Στη συσκευή σας εμφανίζεται μια λίστα των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth. Επιλέξτε το ακουστικό βαρηκοΐας από τη λίστα για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή. Ο ήχος μπιπ που θα ακουστεί στο ακουστικό βαρηκοΐας επιβεβαιώνει την επιτυχή σύζευξη.

- ❶ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες σύζευξης για την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, συγκεκριμένα για ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς κατασκευαστές τηλεφώνων, μεταβείτε στον ιστότοπο: <https://www.phonak.com/en-int/support>
- ❷ Εάν εμφανίζονται αρκετές εγγραφές για το ακουστικό βαρηκοΐας σας στη λίστα των συσκευών με δυνατότητα Bluetooth, επιλέξτε εκείνη που δεν έχει πρόθεμα «LE_».


11.2 Σύνδεση στη συσκευή

Μετά τη σύζευξη του συστήματος CROS με τη συσκευή σας, η μεταξύ τους σύνδεση θα γίνεται στο εξής αυτόματα κατά την ενεργοποίησή τους.

- ❶ Η σύνδεση θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας.
- ❷ Το σύστημα CROS μπορεί να συνδέεται με μία συσκευή κάθε φορά και να είναι συζευγμένο με έως και οκτώ συσκευές.

12. Τηλεφωνικές κλήσεις

Το σύστημα CROS συνδέεται άμεσα με τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth. Κατά τη σύζευξη και σύνδεση με το τηλέφωνό σας, θα ακούσετε ειδοποιήσεις, ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης και τη φωνή του καλούντος κατευθείαν στο ακουστικό βαρηκοΐας σας. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι «hands free», αυτό σημαίνει ότι η φωνή σας λαμβάνεται από τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας και μεταδίδεται στο τηλέφωνο.

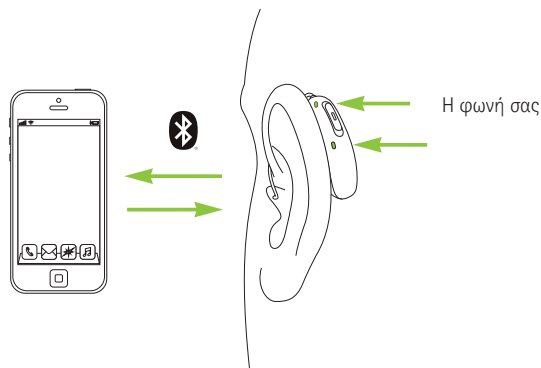

12.1 Πραγματοποίηση κλήσης


Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί κλήσης.

Θα ακούσετε τον τόνο κλήσης μέσω του ακουστικού βαρηκοΐας. Τα μικρόφωνα του ακουστικού βαρηκοΐας σας λαμβάνουν τη φωνή σας και τη μεταδίδουν στο τηλέφωνο.

12.2 Αποδοχή κλήσης

Όταν λαμβάνετε μία κλήση, θα ακούσετε μια ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης στο ακουστικό βαρηκοΐας (π.χ. ήχος κλήσης ή φωνητική ειδοποίηση).

Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση πατώντας το επάνω μέρος του αυτιού σας δύο φορές (μόνο αν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη της συσκευής CROS με επίπεδο απόδοσης I90 ή I70), με σύντομο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας ή τη συσκευή CROS (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.

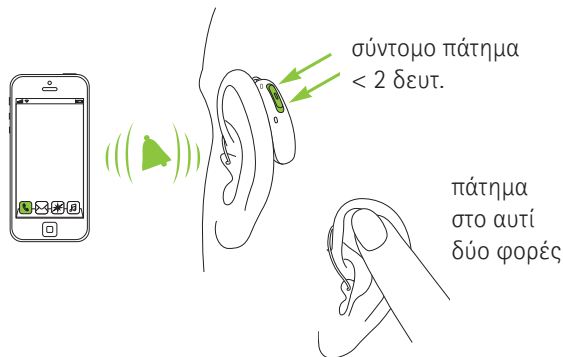

12.3 Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το επάνω μέρος του αυτιού σας δύο φορές (μόνο αν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη της συσκευής CROS με επίπεδο απόδοσης I90 ή I70), με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας ή τη συσκευή CROS (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.



12.4 Απόρριψη κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση με παρατεταμένο πάτημα στο επάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό βαρηκοΐας σας ή στη συσκευή CROS (περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) ή απευθείας στο τηλέφωνό σας.



13. Λειτουργία πτήσης

Το σύστημα CROS λειτουργεί σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz - 2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένοι αερομεταφορείς ζητούν τη θέση όλων των συσκευών σε λειτουργία πτήσης. Όταν το ακουστικό βαρηκοΐας τίθεται σε λειτουργία πτήσης, δεν απενεργοποιείται η κανονική λειτουργία του ακουστικού βαρηκοΐας, αλλά απενεργοποιούνται οι λειτουργίες συνδεσιμότητας Bluetooth, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης μετάδοσης ήχου από τη συσκευή CROS στο ακουστικό βαρηκοΐας στο άλλο αυτί.

Η ίδια η συσκευή CROS μπορεί απλά να απενεργοποιηθεί, καθώς δεν εκπέμπεται σήμα κατά τη λειτουργία πτήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή CROS, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8.

14. Επανεκκίνηση της συσκευής CROS

Χρησιμοποιήστε αυτήν την τεχνική αν η συσκευή CROS είναι σε κατάσταση σφάλματος. Αυτό δεν θα αφαιρέσει ή διαγράψει κάποιο πρόγραμμα ή ρυθμίσεις.

Πατήστε το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν η συσκευή CROS είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη πριν πατήσετε το κουμπί. Ύστερα από 15 δευτερόλεπτα, θα γίνει επανεκκίνηση του ακουστικού βαρηκοΐας ενώ η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

15. Επισκόπηση εφαρμογών myPhonak και myPhonak Junior

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης στο <https://www.phonak.com/myphonak> ή σαρώστε τον κωδικό



Για να εγκαταστήσετε το myPhonak, σαρώστε τον κωδικό QR



16. Περιβαλλοντικές συνθήκες

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι η χρήση, η φόρτιση, η μεταφορά και η αποθήκευση της συσκευής CROS γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

	Φόρτιση και λειτουργία	Μεταφορά	Αποθήκευση
Θερμοκρασία	+5° έως +40 °C (41° έως 104°F)	-20° έως +60 °C (-4° έως +140 °F)	-20° έως +60 °C (-4° έως 140 °F)
Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 90%	0% έως 93%	0% έως 93%
Ατμοσφαιρική πίεση	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa	500 hPa έως 1060 hPa

Η παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασίες κάτω των +10 °C και άνω των +30 °C μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μπαταρίας του προϊόντος.

Αν η συσκευή έχει υποβληθεί σε συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς διαφορετικές από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, επαναφέρετε τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης της συσκευής πριν εκκινήσετε τη συσκευή.

Η συσκευή CROS κατηγοριοποιείται ως IP68. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη, ενώ είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει τις καθημερινές συνθήκες.

Διασφαλίστε ότι φορτίζετε τακτικά τη συσκευή CROS κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση.

17. Φροντίδα και συντήρηση

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

Η συσκευή CROS έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής πέντε έτη. Οι συσκευές αναμένεται να παραμείνουν ασφαλείς προς χρήση για αυτήν τη διάρκεια.

Εμπορική περίοδος τεχνικής υποστήριξης:

Η τακτική και προσεκτική φροντίδα της συσκευής CROS και του φορτιστή θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η υψηλή απόδοση των συσκευών σας για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τους. Η Sonova AG θα παράσχει ελάχιστη περίοδο τεχνικής υποστήριξης επισκευών πέντε ετών από την κατάργηση της αντίστοιχης συσκευής CROS, του φορτιστή και βασικών στοιχείων από το σύστημα προϊόντων.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προδιαγραφές ως κατευθυντήριες οδηγίες.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 23.

Γενικές πληροφορίες

Πριν από τη χρήση σπρέι για τα μαλλιά ή καλλυντικών προϊόντων, θα πρέπει να αφαιρείτε τη συσκευή CROS από το αυτί σας, καθώς τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Η συσκευή CROS είναι ανθεκτική στο νερό, τον ιδρώτα και τη σκόνη, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μετά από έκθεση σε νερό, ιδρώτα ή σκόνη, η συσκευή CROS πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται.
- Η συσκευή CROS πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται όπως περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.



Βεβαιώνετε πάντα ότι το σύστημα CROS και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν από τη φόρτιση.

Καθημερινά

Συσκευή CROS: Ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα κυψελίδας και υγρασίας στο εξάρτημα για το αυτί και καθαρίζετε τις επιφάνειες με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, σαπούνι κ.λπ., για τον καθαρισμό της συσκευής CROS. Δεν συνιστάται το ξέπλυμα με νερό. Αν απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός της συσκευής CROS, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή σας για συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αφύγρανσης.


Εβδομαδιαία

Συσκευή CROS: Καθαρίστε το εξάρτημα για το αυτί με ένα μαλακό, υγρό πανί ή με ένα ειδικό πανί καθαρισμού για ακουστικά βαρηκοΐας. Για πιο αναλυτικές οδηγίες συντήρησης, επισκεφτείτε τον ακοοπροθετιστή σας. Καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης της συσκευής CROS με ένα μαλακό, υγρό πανί.


18. Αντικατάσταση του εξαρτήματος για το αυτί

18.1 Αφαίρεση του εξαρτήματος για το αυτί από το ομοίωμα ηχείου


1. Αφαιρέστε το εξάρτημα για το αυτί από το ομοίωμα ηχείου κρατώντας το ομοίωμα ηχείου στο ένα χέρι και το εξάρτημα για το αυτί στο άλλο.

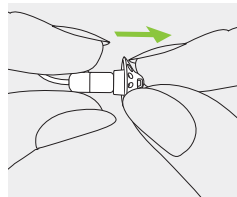

2. Τραβήξτε προσεκτικά το εξάρτημα για το αυτί για να το αφαιρέσετε.

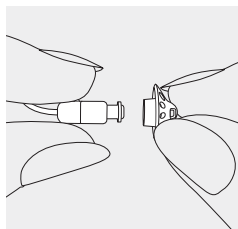


3. Καθαρίστε το ομοίωμα ηχείου με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.

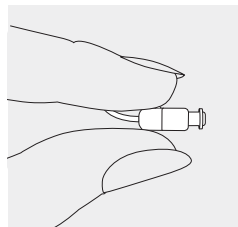

18.2 Προσάρτηση του εξαρτήματος για το αυτί στο ομοίωμα ηχείου


1.

Κρατήστε το ομοίωμα ηχείου στο ένα χέρι και το εξάρτημα για το αυτί στο άλλο.

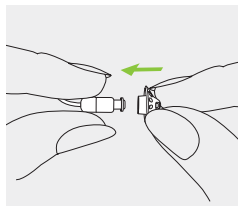


2.

Σύρετε το εξάρτημα για το αυτί πάνω από το ομοίωμα ηχείου.

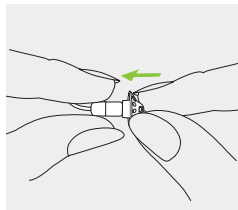

3.

Το ομοίωμα ηχείου και το εξάρτημα για το αυτί θα πρέπει να εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους.

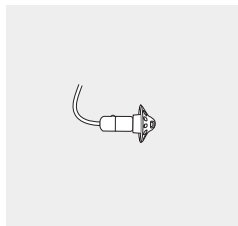

19. Επίσκευή και εγγύηση

Τοπική εγγύηση

Για τους όρους της τοπικής εγγύησης, απευθυνθείτε στον ακοοπροθετιστή από τον οποίο προμηθευτήκατε το σύστημα CROS σας.

Διεθνής εγγύηση

Η Sonova AG παρέχει περιορισμένη διεθνή εγγύηση ενός έτους, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκεκριμένη περιορισμένη εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττωματικά υλικά στη συσκευή CROS και τον φορτιστή, αντίστοιχα, αλλά όχι σε αξεσουάρ όπως σωληνάκια, εξαρτήματα για το αυτί και εξωτερικούς δέκτες. Η εγγύηση ισχύει μόνο κατόπιν προσκόμισης της απόδειξης αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών.



20. Πληροφορίες συμμόρφωσης

Ευρώπη:

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Sonova AG δηλώνει δια του παρόντος ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται από τον κατασκευαστή ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Phonak, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται σε λίστα στην ιστοσελίδα **www.phonak.com/en-int/certificates** (Αντιπροσωπείες της Phonak ανά τον κόσμο).

Περιορισμοί εγγύησης

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή φροντίδας, έκθεσης σε χημικές ουσίες ή υπερβολικής καταπόνησης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση βλάβης που έχει προκληθεί από τρίτους ή μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η εγγύηση αυτή δεν περιλαμβάνει τυχόν επισκευές που εκτελούνται από τον ακοοπροθετιστή στον χώρο εργασίας του.

Σειριακοί αριθμοί
συσκευής CROS:

☐ αριστερά

☐ δεξιά

Φορτιστής:

Ημερομηνία αγοράς:

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής
(σφραγίδα/υπογραφή):

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία:



R-NZ

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις εν λόγω χώρες. Η ετικέτα συμμόρφωσης R-NZ προορίζεται για προϊόντα ραδιοεπικοινωνίας που κυκλοφορούν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας υπό το επίπεδο συμμόρφωσης A1.

Τα ασύρματα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 2 είναι πιστοποιημένα βάσει των παρακάτω:

Phonak CROS I-R

Phonak CROS I-R Trial

ΗΠΑ	FCC ID: KWC-IRF
Καναδάς	IC: 2262A-IRF

Σημείωση 1:

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- 2) η συσκευή αυτή πρέπει να μπορεί να δεχθεί τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεμβολών που προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση 2:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Sonova AG μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση της άδειας χειρισμού της συσκευής αυτής βάσει των κανονισμών FCC.

Σημείωση 3:

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Τα όρια αυτά προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απουσία παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή αυτή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για υποστήριξη.

Πληροφορίες ραδιοεπικοινωνίας για την ασύρματη συσκευή CROS

Τύπος κεραίας	Συντονισμένη κεραία βρόχου
Συχνότητα λειτουργίας	2,4 GHz – 2,48 GHz
Διαμόρφωση	GFSK, GMSK
Ακτινοβολούμενη ισχύς	< 2,5 mW
Bluetooth®	
Εμβέλεια	~2 m
Έκδοση Bluetooth	5.3 LE

Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση περιβάλλοντος
Εκπομπές ραδιο-συχνοτήτων CISPR 11	Ομάδα 2 Κατηγορία B	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία του. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Αρμονικές εκπομπές	Συμμορφώνεται	
Διακυμάνσεις τάσης / εκπομπές τρεμοπαίγματος	Συμμορφώνεται	

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Δήλωση του κατασκευαστή: Οι συσκευές προορίζονται για χρήση στα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα που παρατίθενται παρακάτω. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται σε τέτοια περιβάλλοντα.

Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση περιβάλλοντος
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11	Ομάδα 1	Τα ακουστικά βαρηκοΐας παράγουν ή χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες μόνο για την εσωτερική τους λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11	Κατηγορία B	Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι κατάλληλα για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος χαμηλής τάσης, που τροφοδοτεί κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Δοκιμή ατρωσίας	IEC60601-1-2 Επίπεδο δοκιμής	Επίπεδο συμμόρφωσης
Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 8 kV επαφή +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV αέρας	+/- 8 kV επαφή +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV αέρας
Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με ακτινοβολήση ραδιο-συχνοτήτων IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM σε 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80% AM σε 1 kHz
Μαγνητικό πεδίο εγγύτητας IEC 61000-4-3	9 V/m, 710, 745, 780 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 9 V/m, 5240, 5500, 5785 MHz, Διαμόρφωση παλμών 217 Hz 27 V/m, 385 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 28 V/m, 450 MHz FM απόκλιση +/- 5 kHz, ημιτονικό σήμα 1 kHz	9 V/m, 710, 745, 780 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 9 V/m, 5240, 5500, 5785 MHz, Διαμόρφωση παλμών 217 Hz 27 V/m, 385 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 28 V/m, 450 MHz FM απόκλιση +/- 5 kHz, ημιτονικό σήμα 1 kHz

Δοκιμή ατρωσίας	IEC60601-1-2 Επίπεδο δοκιμής	Επίπεδο συμμόρφωσης
Μαγνητικό πεδίο εγγύτητας IEC 61000-4-3	28 V/m, 810, 870, 930 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 28 V/m, 1720, 1845, 1970, 2450 MHz, Διαμόρφωση παλμών 217 Hz	28 V/m, 810, 870, 930 MHz, Διαμόρφωση παλμών 18 Hz 28 V/m, 1720, 1845, 1970, 2450 MHz, Διαμόρφωση παλμών 217 Hz
Ονομαστική συχνότητα ισχύος μαγνητικών πεδίων IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ή 60 Hz	30 A/m 50 Hz ή 60 Hz

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Ποιότητα ήχου	Συχνότητα δειγματοληψίας 22050 Hz
Εύρος ζώνης ήχου	100 Hz – 9500 kHz
Αναμενόμενος χρόνος αυτονομίας*	16ώ *

* Ο αναμενόμενος χρόνος αυτονομίας της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας εξαρτάται από τα ενεργά χαρακτηριστικά, τη χρήση των ασύρματων εξαρτημάτων, την απώλεια ακοής, την ηλικία της μπαταρίας και το ηχητικό περιβάλλον.

21. Πληροφορίες και περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επιβεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό –συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ– πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο του κανονισμού και της οδηγίας ανωτέρω.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις για εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β του προτύπου EN 60601-1. Η επιφάνεια του ακουστικού βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως εξάρτημα εφαρμογής τύπου Β.



Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο αντιπρόσωπος για την ΕΚ είναι, επίσης, ο εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες αυτών των Οδηγιών Χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές προειδοποιήσεις για τις μπαταρίες που υπάρχουν στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τη συσκευή βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των ΗΠΑ.



Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις των φορέων Radio Spectrum Management (RSM - Διαχείριση ραδιοφάσματος) της Νέας Ζηλανδίας και Australian Communications and Media Authority (ACMA - Αυστραλιανή αρχή επικοινωνιών και μέσων) της Αυστραλίας σχετικά με τη νόμιμη πώληση στις συγκεκριμένες χώρες.



Η λεκτική σήμανση και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sonova AG πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Ιαπωνικό σήμα για πιστοποιημένο ραδιοεξοπλισμό.



Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.



Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.



Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι διατίθενται ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης.

IP68

Δείκτης προστασίας από εισχώρηση. Ο δείκτης IP68 υποδεικνύει ότι το ακουστικό βαρηκοΐας είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη. Πέρασε με επιτυχία δοκιμή συνεχούς βύθισης σε 1 μέτρο νερού για 60 λεπτά και 8 ώρες σε θάλαμο σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο IEC60529.



Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια.



Υποδεικνύει το εύρος τιμών υγρασίας στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια.



Υποδεικνύει το εύρος της ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια.



Κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διατηρείτε το προϊόν στεγνό.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια συσκευή που δεν είναι ασφαλής για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR) (π.χ. στη διάρκεια μιας μαγνητικής τομογραφίας).



Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή CROS δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα κοινά οικιακά απόβλητα. Οι παλιές ή μη χρησιμοποιημένες συσκευές CROS πρέπει να απορρίπτονται σε χώρους διάθεσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να παραδίδονται στον ακοοπροθετιστή σας για απόρριψη. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Σύμβολα που ισχύουν μόνο για το ευρωπαϊκό τροφοδοτικό



Τροφοδοτικό με διπλή απομόνωση.



Συσκευή σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, προστασία βραχυκυκλώματος.

22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αιτία	Τι να κάνετε
Πρόβλημα: Το σύστημα CROS δεν λειτουργεί	
Βουλωμένο ηχείο/εξάρτημα για το αυτί του ακουστικού βαρηκοΐας	Καθαρίστε το άνοιγμα του ηχείου/το εξάρτημα για το αυτί του ακουστικού βαρηκοΐας
Η συσκευή CROS ή το ακουστικό βαρηκοΐας είναι απενεργοποιημένα	Πιέστε το κάτω μέρος του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα (κεφάλαιο 8)
Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως	Φορτίστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 3)
Συσκευή CROS σε κατάσταση σφάλματος	Επανεκκινήστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 14)

Πρόβλημα: Η συσκευή CROS δεν θα ενεργοποιηθεί	
Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως	Φορτίστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 3)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <https://www.phonak.com/en-int/support>.

Αιτία	Τι να κάνετε
Πρόβλημα: Η φωτεινή ένδειξη της συσκευής CROS δεν ανάβει όταν η συσκευή CROS είναι τοποθετημένη στον φορτιστή	
Η συσκευή CROS δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή	Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή CROS στον φορτιστή (κεφάλαιο 3)
Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας ή η μπαταρία του Charger Go είναι χαμηλή	Συνδέστε το φορτιστή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως	Περιμένετε τρεις ώρες αφού τοποθετήσετε τη συσκευή CROS στον φορτιστή, ανεξάρτητα από την αντίδραση της λυχνίας LED

Πρόβλημα: Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή CROS είναι σταθερά κόκκινη ενώ η συσκευή CROS βρίσκεται στον φορτιστή	
Βρώμικες επαφές φόρτισης	Καθαρίστε τις επαφές της συσκευής CROS και του φορτιστή
Η συσκευή CROS βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας της λειτουργίας της	Θερμάνετε ή κρυώστε τη συσκευή CROS. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι +5° έως +40° Κελσίου (+41° έως +104° Φαρενάιτ)

Αιτία	Τι να κάνετε
Ελαττωματική μπαταρία	Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας
Πρόβλημα: Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή CROS απενεργοποιείται όταν η συσκευή CROS αφαιρείται από τον φορτιστή	
Το χαρακτηριστικό «Auto On» είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 8)

Πρόβλημα: Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή CROS παραμένει σταθερά αναμμένη σε πράσινο χρώμα αφού αφαιρεθεί από τον φορτιστή	
Η φωτεινή ένδειξη στη συσκευή CROS ήταν αναμμένη με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή CROS τοποθετήθηκε στον φορτιστή	Επανεκκινήστε τη συσκευή CROS (κεφάλαιο 14)

Πρόβλημα: Η μπαταρία δεν διαρκεί όλη τη μέρα	
Μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας. Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση της μπαταρίας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <https://www.phonak.com/en-int/support>.

Αιτία	Τι να κάνετε
Πρόβλημα: Η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης δεν είναι εφικτή	
Το σύστημα CROS είναι σε λειτουργία πτήσης	Απενεργοποιήστε το σύστημα CROS
Το σύστημα CROS δεν είναι συζευγμένο με το τηλέφωνο	Κάντε σύζευξη του συστήματος CROS με το τηλέφωνο (κεφάλαιο 11)

Πρόβλημα: Η φόρτιση δεν ξεκινά	
Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό ή η μπαταρία του Charger Go είναι χαμηλή	Συνδέστε τον φορτιστή σε εξωτερικό τροφοδοτικό (κεφάλαιο 3). Όταν συνδέεται σωστά, η φωτεινή ένδειξη γύρω από τη θύρα USB του φορτιστή ανάβει με πράσινο χρώμα
Η συσκευή CROS δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή	Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή CROS στον φορτιστή. (κεφάλαιο 3)

i Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια.

23. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας και περιορισμών χρήσης στις παρακάτω σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή CROS.

Ενδεδειγμένη χρήση

Συσκευή CROS: Η συσκευή CROS είναι τοποθετημένη στο αυτό χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης και μεταδίδει ασύρματα ήχο στο συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας του άλλου αυτιού.

Ενδείξεις

Συσκευή CROS: Η συσκευή ενδείκνυται για απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί.

Αντενδείξεις

Οι αντενδείξεις για τη χρήση μιας συσκευής CROS είναι:

- Υποβοηθούμενη απώλεια ακοής (στην πλευρά για την οποία προορίζεται το CROS)
- Οξείες εμβοές (< 3 μήνες, μετά την εμφάνιση, σε οποιοδήποτε αυτί)
- Ανατομική παραμόρφωση του αυτιού για το οποίο προορίζεται το CROS (π.χ. απώλεια ωτίου)

• Στοιχεία ενεργητικής ή χρόνιας παθολογίας εξωτερικού αυτιού, αποστράγγιση, έκκριση ή φλεγμονή
Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση μιας συσκευής CROS σε αυτιά με ανατομική παραμόρφωση (π.χ. μικρωτία, ατρησία ή ελλειπές ωτικό πτερύγιο). Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για να εξασφαλίσετε την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής CROS σε αυτά τα αυτιά.

Τα βασικά κριτήρια για την παραπομπή ενός ασθενή για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη γνώμη ή/και θεραπεία είναι τα εξής:

- Ιστορικό ενεργής αποστράγγισης από το αυτί τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Ιστορικό ξαφνικής ή ταχείας προόδου απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά τις προηγούμενες 90 ημέρες
- Οξύς ή χρόνιος ίλιγγος
- Αμφίπλευρες εμβοές που δεν έχουν διερευνηθεί από ιατρό
- Εμφανή στοιχεία σημαντικής συσσώρευσης κυψελίδας ή ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο
- Πόνος ή δυσφορία στο αυτί

- Μη φυσιολογική όψη του τυμπάνου και του ακουστικού πόρου, όπως:
 - Φλεγμονή του εξωτερικού ακουστικού πόρου
 - Διάρρητο τύμπανο
- Άλλες ανωμαλίες που ο ακοοπροθετιστής πιστεύει ότι χρήζουν ιατρικής φροντίδας

Ο ακοοπροθετιστής μπορεί να αποφασίσει ότι η παραπομπή δεν είναι απαραίτητη ή προς όφελος του ασθενή, όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

- Υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατάσταση έχει διερευνηθεί πλήρως από ειδικό ιατρό και ότι έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή θεραπεία
- Η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ή αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη εξέταση ή/και θεραπεία

Εάν ο ασθενής έχει λάβει την εμπεριστατωμένη και επαρκή απόφαση να μην αποδεχτεί συμβουλές για να ζητήσει ιατρική γνώμатеυση, επιτρέπεται να προχωρήσει στη σύσταση ενός κατάλληλου συστήματος CROS σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

- Το συνιστώμενο σύστημα CROS δεν θα εμφανίσει ανεπιθύμητη ενέργεια στην υγεία ή τη γενικότερη ευημερία των ασθενών
- Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εκτιμήσεις για ό,τι ωφελεί καλύτερα τον ασθενή

Σε περίπτωση που απαιτείται βάσει νόμου, ο ασθενής έχει υπογράψει αποποίηση ευθυνών για να επιβεβαιώσει ότι η συμβουλή παραπομπής δεν έχει γίνει αποδεκτή και ότι πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη απόφαση.

Η συσκευή CROS δεν αποκαθιστά τη φυσιολογική ακοή και δεν αποτρέπει ούτε βελτιώνει διαταραχές της ακοής που οφείλονται σε οργανικές παθήσεις. Σε περίπτωση μη τακτικής χρήσης της συσκευής CROS, ο ασθενής δεν μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Η χρήση της συσκευής CROS αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας επαναφοράς της ακοής και ενδέχεται να πρέπει να συμπληρωθεί από ακουστική εκπαίδευση και εξάσκηση στη χειλεονάγνωση.

Η συσκευή CROS είναι κατάλληλη για φροντίδα υγείας κατ' οίκον και λόγω της φορητότητάς της ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον επαγγελματικής φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία κ.λπ.

Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών

Συσκευή CROS: Η συσκευή αυτή ενδείκνυται για ασθενείς με απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί, από την ηλικία των 6 ετών.

Ενδεδειγμένος χρήστης

Συσκευή CROS: Ενδείκνυται για τα άτομα με απώλεια ακοής χωρίς δυνατότητα υποβοήθησης στο ένα αυτί και καλύτερη ακοή στο άλλο αυτί, που χρησιμοποιούν τη συσκευή CROS, και για τους φροντιστές τους. Ο ακοοπροθετιστής είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της συσκευής CROS.

Κλινικό όφελος:

Συσκευή CROS: Η συσκευή CROS από μόνη της δεν προσφέρει άμεσο κλινικό όφελος.

Το κλινικό όφελος, που είναι η βελτίωση της κατανόησης της ομιλίας, προέρχεται από τον συνδυασμό του συμβατού ακουστικού βαρηκοΐας με τη συσκευή CROS.

Παρενέργειες

Συσκευή CROS: Η χρήση της συσκευής CROS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες φυσιολογικές ενέργειες ή αντιδράσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν λόγω του σχήματος και του υλικού του περιβλήματος και του εξαρτήματος για το αυτί, όπως:

- συσσώρευση κυψελίδας,
- υπερβολική πίεση,
- συσσώρευση ιδρώτα ή υγρασίας στον ακουστικό πόρο,
- φουσκάλες, κνησμό ή/και εξανθήματα,
- αίσθηση βουλώματος ή κορεσμού στα αυτιά
- και οι συνέπειές τους (π.χ. πόνος στο αυτί).

Αν προκύψει οποιαδήποτε από αυτές τις παρενέργειες, συμβουλευτείτε περαιτέρω τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.

Η συσκευή CROS χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα αντίπλευρο συμβατό ακουστικό βαρηκοΐας. Από τη χρήση ενός ακουστικού βαρηκοΐας ενδέχεται να προκληθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες που σχετίζονται με την ακουστική του έξοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες Χρήσης.

Τυχόν σοβαρό συμβάν που προέκυψε σε σχέση με τη συσκευή CROS θα πρέπει να αναφέρεται στον εκπρόσωπο του κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους κατοικίας. Ως σοβαρό συμβάν περιγράφεται οποιοδήποτε συμβάν που προκάλεσε άμεσα ή έμμεσα ή θα μπορούσε να προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- α) τον θάνατο ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- β) την προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
- γ) σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας

Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη λειτουργία ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

23.1 Προειδοποιήσεις



Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.



Κατά τη μετάδοση φωνητικών κλήσεων ή μουσικής στο ακουστικό βαρηκοΐας, το σήμα από τη συσκευή CROS δεν μεταδίδεται πλέον στο ακουστικό βαρηκοΐας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άγνοια ακουστικών καταστάσεων που υποδεικνύουν κίνδυνο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια στρογγυλή μπαταρία λιθίου. Αυτές οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς μέσα σε διάστημα 2 ωρών ή μικρότερο, σε περίπτωση κατάποσης ή εισαγωγής σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε η μπαταρία είναι χρησιμοποιημένη είτε καινούργια! Φυλάσσετε μακριά από παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και κατοικίδια ζώα. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας χωρίς καθυστέρηση!



Η συσκευή CROS πρέπει να είναι στεγνή πριν τη φόρτιση. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της φόρτισης.

 Οι συσκευές CROS και τα εξαρτήματά τους πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και οποιοδήποτε άτομο μπορεί να τα καταπιεί, να πνιγεί ή να τραυματιστεί με άλλον τρόπο με αυτά. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό ή νοσοκομείο καθώς το ακουστικό βαρηκοΐας ή τα εξαρτήματά του μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Σε περίπτωση πνιγμού, χορηγήστε αμέσως θεραπεία ή επικοινωνήστε με το τμήμα επείγοντων περιστατικών.

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στο ακουστικό βαρηκοΐας αλλαγές ή τροποποιήσεις, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Sonova AG. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο αυτί ή στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

 Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά και άτομα με νοητική υστέρηση πρέπει να γίνεται πάντα υπό επιτήρηση για να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός εύφλεκτων αναισθητικών). Η συσκευή δεν φέρει πιστοποίηση ATEX.

 Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να τοποθετούνται με θηλές/ συστήματα προστασίας από κυψελίδα όταν χρησιμοποιούνται από πελάτες με διάτρηση τυμπάνου, φλεγμονή του ακουστικού πόρου ή άλλως εκτεθειμένη κοιλότητα του μέσου ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τη χρήση ενός κλασικού εκμαγείου. Στην απίθανη περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος παραμείνει στον ακουστικό πόρο, επιβάλλεται να απευθυνθείτε σε ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή του.

 Τα ακουστικά προγράμματα στη λειτουργία κατευθυντικού μικροφώνου μειώνουν τους περιβαλλοντικούς ήχους. Λάβετε υπόψη ότι τα προειδοποιητικά σήματα ή οι ήχοι που προέρχονται από πηγή που βρίσκεται πίσω από το χρήστη, π.χ. αυτοκίνητα, καταστέλλονται πλήρως ή μερικώς.

 Προστατεύστε το ακουστικό βαρηκοΐας σας από τη θερμότητα και το ηλιακό φως (ποτέ μην τα αφήνετε κοντά σε παράθυρο ή μέσα στο αυτοκίνητο). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης). Για τις ενδεδειγμένες μεθόδους αφύγρανσης, ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας.

 Αποφεύγετε τις ισχυρές κρούσεις στο αυτί όταν φοράτε ακουστικό βαρηκοΐας με εξατομικευμένο εξάρτημα για το αυτί. Η σταθερότητα ενός εξατομικευμένου εξαρτήματος για το αυτί έχει σχεδιαστεί για κανονική χρήση. Τυχόν ισχυρή κρούση στο αυτί (π.χ. κατά τη διάρκεια της άθλησης) ενδέχεται να προκαλέσει θραύση του προσαρμοσμένου εξαρτήματος για το αυτί. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διάτρηση του ακουστικού πόρου ή του τυμπάνου του αυτιού.

 Μετά από μηχανική καταπόνηση ή κραδασμό στο ακουστικό βαρηκοΐας, βεβαιωθείτε ότι το κέλυφος του ακουστικού βαρηκοΐας είναι άθικτο πριν το τοποθετήσετε στο αυτί.

 Μην τοποθετείτε αυτές τις επαναφορτιζόμενες συσκευές στις αποσκευές που παραδίδονται στο check-in όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, καθώς περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται στις χειραποσκευές σας.

 Εφαρμόζετε τους τοπικούς κανονισμούς κατά την αποστολή των επαναφορτιζόμενων συσκευών, καθώς οι συσκευές περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι συσκευές ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά τις αποστολές. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε την εταιρεία μεταφοράς για τον κατάλληλο τρόπο αποστολής των συσκευών.

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) από κάθε τμήμα του ακουστικού βαρηκοΐας ή των εξαρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

 Η συσκευή σας λειτουργεί σε εμβέλεια συχνότητας 2,4 GHz και 2,48 GHz. Κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων, ρωτήστε αν η συσκευή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία πτήσης σύμφωνα με τους κανόνες του αερομεταφορέα. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτών των οδηγιών χρήσης όπου περιγράφεται η λειτουργία πτήσης.

 Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για άτομα με ενεργά εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές, κλπ.):

- Κρατήστε την ασύρματη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα. Αν προκύψουν τυχόν παρεμβολές, μην χρησιμοποιείτε τα ασύρματα ακουστικά βαρηκοΐας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι οι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.
- Τυχόν μαγνήτες (π.χ. εργαλείο για μπαταρίες, μαγνήτης EasyPhone κ.λπ.) πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό εμφύτευμα.

 Προφυλάσσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας από πτώσεις! Σε περίπτωση πτώσης σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ακουστικό βαρηκοΐας σας.

 Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η θηλή μπορεί να παραμείνει στον ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεση του ακουστικού σωλήνα από το αυτί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, επισκεφθείτε έναν ιατρό για την ασφαλή αφαίρεσή της.

 Αυτά τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ανθεκτικά στο νερό. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την καταπόνηση που προκαλείται κατά τις τυπικές δραστηριότητες και την περιστασιακή, ακούσια έκθεση σε ακραίες συνθήκες. Τα ακουστικά βαρηκοΐας της Phonak δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για τακτική εμβάπτιση σε νερό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά την κολύμβηση ή όταν κάνετε μπάνιο. Αφαιρείτε πάντα το ακουστικό βαρηκοΐας πριν από αυτές τις δραστηριότητες, καθώς το ακουστικό βαρηκοΐας περιλαμβάνει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

 Μην πλένετε ποτέ τις εισόδους του μικροφώνου. Μπορεί να χάσει τα ειδικά ακουστικά του χαρακτηριστικά.

 Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπών και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία.

23.2 Προφυλάξεις

 Η λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να επηρεαστεί από ειδικές ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ακτινοβολία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αφαιρείτε και φυλάσσετε τις συσκευές εκτός της αίθουσας/του χώρου εξέτασης, πριν υποβληθείτε σε:

- Ιατρικές ή οδοντιατρικές εξετάσεις με ακτίνες Χ (και σάρωση CT).
- Ιατρικές εξετάσεις με σάρωση MRI/NMRI, κατά τις οποίες δημιουργούνται μαγνητικά πεδία. Κατά τη διέλευση από πύλες ασφαλείας (σε αεροδρόμια κ.λπ.) δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας. Ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ, εφαρμόζεται εξαιρετικά χαμηλή δόση που δεν επηρεάζει τα ακουστικά βαρηκοΐας.

 Να βεβαιώνετε πάντα ότι το ακουστικό βαρηκοΐας σας έχει στεγνώσει πλήρως μετά τη χρήση. Αποθηκεύετε το ακουστικό βαρηκοΐας σε ασφαλές, στεγνό και καθαρό μέρος.

 Εάν αισθανθείτε πόνο μέσα ή πίσω από το αυτί, αν εμφανιστεί φλεγμονή ή ερεθισμός του δέρματος και ταχεία συσσώρευση κυψελίδας, επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή ή τον ιατρό σας.

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 16 Περιβαλλοντικές συνθήκες, σελίδα 32. Η χρήση της συσκευής εκτός των συνθηκών αυτών μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του ακουστικού βαρηκοΐας η οποία, στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

23.3 Σημειώσεις

 Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό βαρηκοΐας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε ένα κουτί με μια κάψουλα αφύγρανσης ή σε μέρος με καλό αερισμό. Αυτό επιτρέπει την εξαίμιση της υγρασίας από το ακουστικό βαρηκοΐας σας και αποτρέπει τυχόν επιπτώσεις στην απόδοσή του.

 Η θηλή θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε τρεις μήνες ή όταν γίνεται άκαμπτη ή εύθρυπτη. Με τον τρόπο αυτόν προλαμβάνεται η απόσπαση της θηλής από το στέλεχος του σωλήνα κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση από το αυτί.

 Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά αξεσουάρ φόρτισης για τη φόρτιση των ακουστικών βαρηκοΐας σας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις συσκευές.

❶ Η χρήση της συσκευής CROS μπορεί να μειώσει την κατανόηση ομιλίας σε μέρη με θόρυβο (π.χ. εστιατόρια). Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε μέρη όπου ο περιβαλλοντικός ήχος βρίσκεται κυρίως στην πλευρά της συσκευής CROS, καθώς η συσκευή CROS μπορεί να μεταφέρει αυτόν τον ήχο στο αυτί με την καλύτερη ακοή δυσκολεύοντας έτσι την κατανόηση της ομιλίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, συνιστάται να δοκιμάσετε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι κοιτάζετε κατά πρόσωπο το άτομο στο οποίο μιλάτε,
- Ρυθμίστε την εξισορρόπηση του συστήματος CROS ώστε η ακοή να δίνει προτεραιότητα στο αυτί με την καλύτερη ακοή Ή
- Αφαιρέστε/σιγήστε τη συσκευή CROS.

Σημειώσεις

[illegible]

Ο ακοοπροθετιστής σας:



EC REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Γερμανία



Κατασκευαστής:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Ελβετία
www.phonak.com

029-1358-20/V1.00/2024-03/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved



sonova
HEAR THE WORLD



CE
0459

