

Roger Table Mic.

Korisnički priručnik



roger

1. Dobro došli	4	7. Otklanjanje poteškoća	28
2. Upoznavanje s uređajem Roger Table Mic	5	8. Servis i jamstvo	32
2.1. Kako radi mikrofoni Roger	5	8.1 Lokalno jamstvo	32
2.2. Opisi uređaja	6	8.2 Međunarodno jamstvo	32
2.3. Dodaci	8	8.3 Ograničenja jamstva	33
3. Početak rada	10	9. Informacije o sukladnosti	34
3.1 Punjenje	10	10. Informacije i objašnjenje simbola	38
3.2 Uključivanje	12	11. Važne informacije o sigurnosti	41
3.3 Povezivanje sa slušnim pomagalicama	13	11.1. Upozorenja o opasnosti	41
3.4 Povezivanje s daljinskim upravljačem	16	11.2. Informacije o sigurnosti proizvoda	44
4. Uporaba mikrofona Roger	17	11.3. Druge važne informacije	46
4.1. Bolji sluh na sastanku	17		
4.2. Slušanje multimedijских uređaja	18		
5. Dodavanje dodatnih mikrofona	20		
5.1 Povezivanje s drugim mikrofonicama	20		
5.2 Uporaba dodatnih mikrofona	22		
6. Posebne funkcije	24		
6.1 Isključivanje zvuka	24		
6.2 Promjena dometa primanja	25		
6.3 Odspajanje uređaja Roger (NewNet)	26		
6.4 Umetanje nove baterije	27		

1. Dobro došli

Vaš uređaj Roger Table Mic razvila je tvrtka Phonak – svjetski predvodnik na području slušnih rješenja sa sjedištem u Zürichu u Švicarskoj.

Ovaj proizvod vrhunske kvalitete rezultat je više desetljeća istraživanja i stručnog znanja te je osmišljen kako bi vam omogućio vezu s prekrasnim svijetom zvukova! Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj odličan proizvod i želimo vam da uživate u slušanju dugi niz godina.

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik kako biste razumjeli i kako biste znali upotrebljavati svoj novi mikrofon Roger™ na optimalan način. Za više informacija o značajkama i prednostima obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

Phonak – life is on
www.phonak.com


Ovaj korisnički priručnik vrijedi za:

Roger Table Mic 3 Oznaka CE primijenjena 2024. godine

2. Upoznavanje s uređajem Roger Table Mic

2.1. Kako radi mikrofon Roger


Vaš mikrofon Roger prima glasove sudionika sastanka i šalje ih izravno u vaše uši. Sustav se sastoji od triju glavnih elemenata: slušnih pomagala, prijavnika Roger i jednog ili više mikrofona Roger.

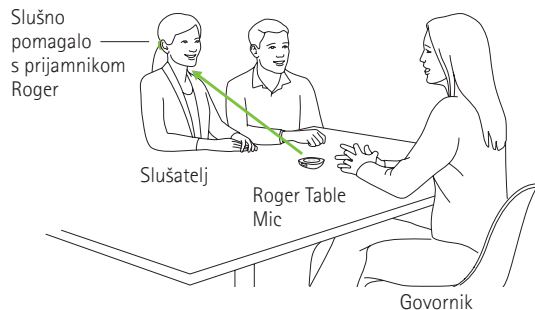

- ① Mikrofon Roger obično radi u dometu do 40 metara / 130 stopa od vaših slušnih pomagala. Imajte na umu da ljudska tijela i zidovi mogu smanjiti tu udaljenost. Maksimalan mogući domet je ona udaljenost na kojoj još možete vidjeti mikrofon Roger (tj. uređaj vam je u vidnom polju).


2.2. Opisi uređaja

Roger Table Mic

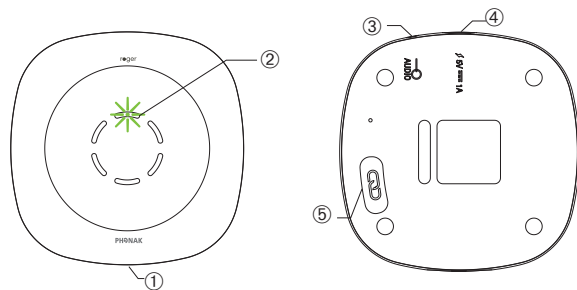


- ① Uključivanje / Isključivanje / Isključivanje zvuka
- ② Svjetlo mikrofona i indikatora
- ③ Ulaz zvuka
- ④ Ulaz za punjenje
- ⑤ Povezivanje

Daljinski upravljač

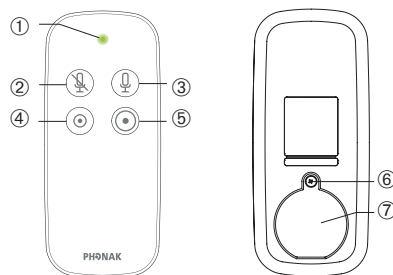


- ① Svjetlo indikatora
- ② Isključen zvuk
- ③ Uključen zvuk
- ④ Kratak domet primanja
- ⑤ Dug domet primanja
- ⑥ Vijak
- ⑦ Poklopac baterije


2.3. Dodaci

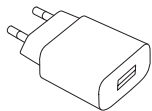

Izvor napajanja

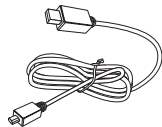


USB kabel

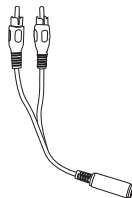


RCA prilagodni kabel




Daljinski upravljač

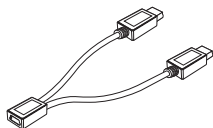

Dvojni Micro-USB
kabel

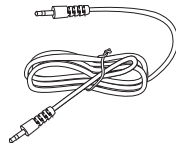

Kabel za zvuk

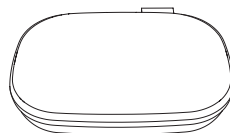


Mekano kućište


3. Početak rada

3.1 Punjenje

Za punjenje mikrofona Roger povežite isporučeni punjač. Svjetlo indikatora treperit će zeleno kao znak punjenja.

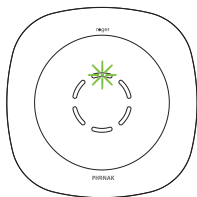

Prazna baterija potpuno će se napuniti za otprilike 4 sata. Punjenje je dovršeno kada svjetlo indikatora svijetli postojano zelenom bojom.

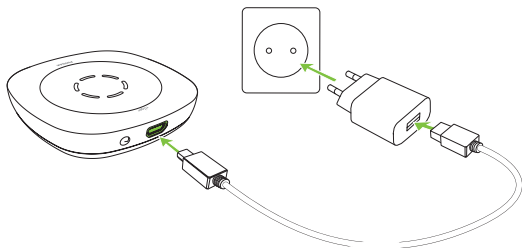

1. Priključite manji završetak (micro-USB) kabela za punjenje u mikrofonski Roger.

2. Priključite veći završetak (USB) kabela za punjenje u izvor napajanja.

3. Priključite izvor napajanja u lako dostupnu utičnicu.

Upotrijebite isporučeni dvojni kabel za punjenje dvaju uređaja iz istog izvora napajanja.

① Dvojni kabel upotrebljavajte samo s isporučenim izvorom napajanja. Punjenje dvaju uređaja s USB priključka računala nije podržano.

Tijekom punjenja svjetlo indikatora može dati sljedeće povratne informacije:

Svjetla statusa punjenja




Punjenje



Potpuno napunjeno

3.2 Uključivanje

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje  na jednu sekundu dok svjetlo indikatora ne zasvijetli zeleno.

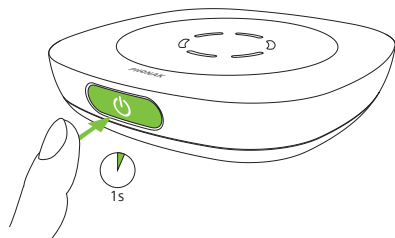

Kada je mikrofonski Roger uključen, svjetlo indikatora lagano će treperiti. Zeleno svjetlo znači da je baterija potpuno napunjena. Narančasto svjetlo znači da je baterija napola napunjena. Ako svjetlo indikatora počne treperiti crvenom bojom, morate odmah napuniti uređaj.



Napunite svoj mikrofonski Roger


3.3 Povezivanje sa slušnim pomagalicama

Prijamnik(e) Roger morate zatražiti od svojeg akustičara za slušna pomagala. Dostupne su različite opcije prijamnika.


Vaš akustičar za slušna pomagala možda je već povezao vaš mikrofonski Roger s vašim slušnim pomagalicama. Ako nije, povežite prijamnik(e) s mikrofonom Roger na sljedeći način:

1. Provjerite jesu li mikrofonski Roger i prijamnik Roger uključeni.

Držite mikrofonski Roger unutar 10 cm / 4 inča od prijamnika Roger ili slušnog pomagala.

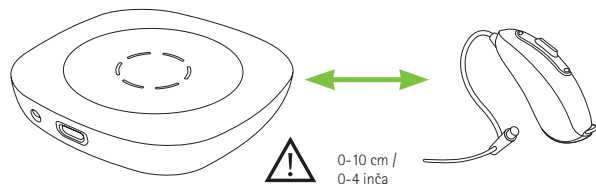

2. Pritisnite tipku za povezivanje  na svom mikrofону Roger.

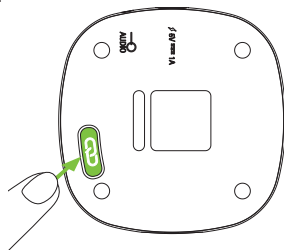

Svjetlo indikatora zasvijetlit će zeleno na dvije sekunde za potvrdu uspješnog povezivanja. U slušnim pomagalima također ćete čuti potvrdni zvuk.

i Možete povezati neograničeni broj prijamnika Roger s mikrofonom Roger.

Svjetla statusa povezivanja

Nakon pritiskanja tipke za povezivanje  svjetlo indikatora može dati sljedeće povratne informacije:

	Povezivanje
	Povezivanje je bilo uspješno – prijamnik Roger povezan je
	Prijamnik Roger nije pronađen. Pomaknite mikrofonski Roger bliže prijamniku Roger i provjerite je li prijamnik Roger uključen. Zatim pokušajte ponovno.
	Prijamnik Roger nije kompatibilan s vašim mikrofonom Roger

3.4 Povezivanje s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač povezuje se s vašim mikrofonom Roger u tvornici. Ako je potrebno, daljinski upravljač možete povezati s neograničenim brojem dodatnih stolnih mikrofona.

1. Pritisnite i držite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.
2. Uključite mikrofonski Roger pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje . Vaš mikrofonski Roger zatrepereće ljubičasto četiri puta kao znak uspješnog povezivanja.
3. Otpustite tipku daljinskog upravljača.

Svjetla statusa povezivanja

Nakon povezivanja daljinskog upravljača svjetlo indikatora može dati sljedeće povratne informacije:



Povezivanje daljinskog upravljača bilo je uspješno.




4. Uporaba mikrofona Roger

Mikrofon Roger svestran je i inteligentan proizvod. Otkriva u kojoj se situaciji nalazite i automatski prilagođava svoje postavke obrade zvuka kako bi vam omogućio najbolje moguće razumijevanje govora.

4.1. Bolji sluh na sastanku

Postavite mikrofonski Roger na sredinu stola kako biste slušali skupinu ljudi.

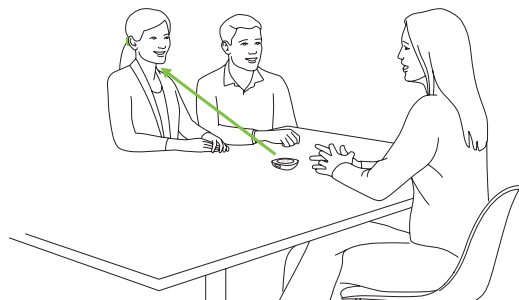


- ① Za najbolje razumijevanje govora postavite mikrofonski Roger podalje od izvora buke kao što su projektori i laptopi te što je moguće bliže moguće sugovornicima.

4.2. Slušanje multimedijских uređaja

Možete povezati mikrofonski Roger s izvorom zvuka, kao što su konferencijski telefon, tablet ili laptop, kako biste čuli zvučni signal izravno u svojim slušnim pomagalicama.

1. Spojite jedan kraj isporučenog kabela za zvuk na pomoćni ulaz mikrofona Roger.
2. Spojite drugi kraj na izlaz zvuka na izvoru zvuka.

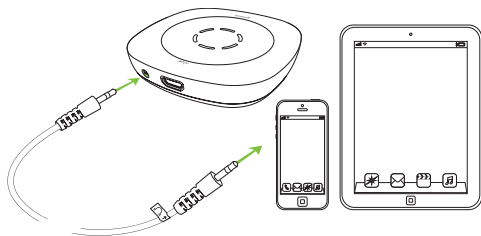

① Nakon što aktivirate zvučni signal multimedijskog uređaja, mikrofonski Roger prepoznat će taj signal i isključiti zvuk svog mikrofona.


5. Dodavanje dodatnih mikrofona

Tehnologija Roger omogućava vam paralelnu uporabu više mikrofona Roger tako da ih povežete u mrežu.

5.1 Povezivanje s drugim mikrofonom

Za povezivanje dodatnih mikrofona slijedite ove korake:

1. Uključite oba mikrofona.
2. Držite dva mikrofona blizu jedan drugome (unutar 10 cm / 4 inča).

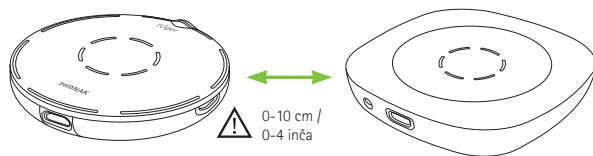

3. Pritisnite tipku za povezivanje  na svom mikrofону Roger.

Svjetla indikatora obaju mikrofona zasvijetlit će zeleno na dvije sekunde za označavanje uspješnog povezivanja.

- ① Ako želite povezati mikrofón Roger s uređajem Roger Select, pritisnite tipku za povezivanje na uređaju Roger Select umjesto na mikrofónu Roger.

Svjetla statusa povezivanja

Nakon pritiskanja tipke za povezivanje  svjetlo indikatora može dati sljedeće povratne informacije:



Povezivanje je bilo uspješno – drugi mikrofón Roger sad je povezan.



Mikrofón Roger nije pronađen. Pomaknite mikrofone bliže jedan drugome i provjerite jesu li oba uključena. Zatim pokušajte ponovno.




Mikrofón nije kompatibilan s vašim mikrofonom Roger. Ažurirajte softver pomoću alata Roger Upgrader ili se obratite svom akustičaru za slušna pomagala.

5.2 Uporaba dodatnih mikrofona

Dodatni stolni mikrofoni postavljaju se tako da možete čuti ljude za stolom. Predajte sve nosive mikrofone Roger svojim sugovornicima. Provjerite nose li se ispravno (usmjereno prema ustima i unutar 20 cm / 8 inča).

Mikrofoni Roger automatski prepoznaju kada netko govori te odmah prenose glas vašim slušnim pomagalicama.

Ako govornik koji nosi mikrofonski želi privremeno napustiti skupinu, mora isključiti zvuk ili svoj mikrofonski.

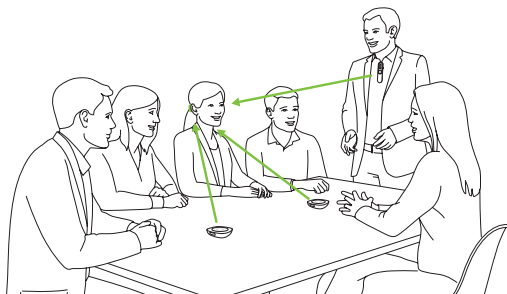

❶ Ako postoji problem s mrežom, pritisnite tipku za povezivanje  na jednom od mikrofona kako biste ponovno pokrenuli mrežu.

Svjetla statusa mikrofona

Tijekom uporabe više mikrofona Roger svjetlo indikatora može dati sljedeće povratne informacije:



Zvuk mikrofona Roger isključen je. Uključite zvuk pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje  ili tipku za uključivanje zvuka na daljinskom upravljaču.




Veza između mikrofona Roger i drugih mikrofona Roger izgubljena je. Pritisnite tipku za povezivanje  za ponovno pokretanje mreže.

6. Posebne funkcije

6.1 Isključivanje zvuka

Isključivanje zvuka mikrofona pogotovo je korisno tijekom pauza na sastanku ili kada se želite usredotočiti na izlagača, a da vas ne ometaju razgovori drugih sudionika.

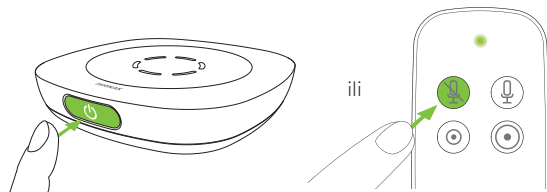


1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje  ili tipku za isključivanje zvuka na daljinskom upravljaču kako biste isključili zvuk mikrofona Roger. Kada je zvuk isključen, svjetlo indikatora svijetli postojano ljubičastom bojom.
2. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili tipku za uključivanje zvuka na daljinskom upravljaču kako biste ponovno uključili zvuk mikrofona Roger.

❗ Daljinskim upravljačem isključit će se zvuk svih stolnih mikrofona koji su povezani s njim.

6.2 Promjena dometa primanja

Ako vam smetaju slabi ili udaljeni zvukovi, daljinskim upravljačem možete smanjiti domet primanja.

Pritisnite tipke za domet na daljinskom upravljaču za promjenu između kratkog i dugog dometa primanja.

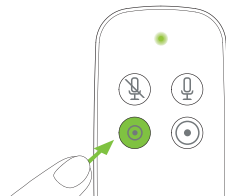

❗ Domet će se ponovno postaviti na dugi domet kada se uređaj ponovno pokrene.

6.3 Odspajanje uređaja Roger (NewNet)


Da biste odspojili mikrofonski Roger od bilo kojeg povezanog prijemnika ili drugih mikrofona Roger, držite tipku za povezivanje  sedam sekundi.

Svjetlo indikatora zasvijetlit će narančasto kada se mikrofonski Roger odspoji od svih povezanih uređaja.

Sad možete pokrenuti ponovno povezivanje prijemnika Roger ili mikrofona Roger sa svojim mikrofonom Roger.


Ponovno postavljanje

Ako vaš mikrofonski Roger prestane reagirati na naredbe, možete ga ponovno postaviti istovremenim pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje  i tipke za povezivanje  na deset sekundi.

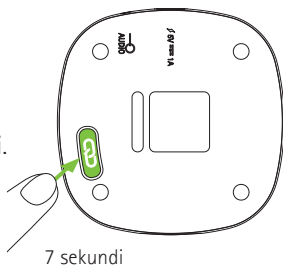


6.4 Umetanje nove baterije


1. Otvorite odjeljak za bateriju

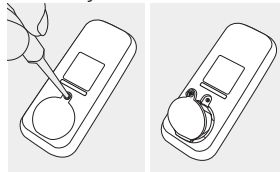

2. Uklonite bateriju iz odjeljka za bateriju

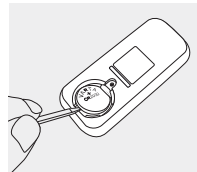


3. Umetnite novu bateriju

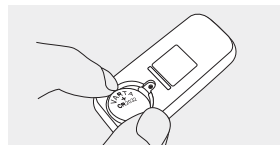

① Provjerite je li znak + okrenut prema gore

4. Zatvorite odjeljak za bateriju

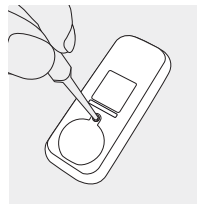

① Za daljinski upravljač Roger Table Mic Remote Control potrebna je litijaska gumbasta baterija (CR2032)

7. Otklanjanje poteškoća

Problem	Uzroci
Ne mogu uključiti mikrofonski Roger	Baterija je prazna
Ne razumijem govornika	Mikrofon nije ispravno postavljen Otvori mikrofona prekriveni su nečistoćom ili predmetom
Ne čujem glas govornika iako je mikrofonski Roger uključen	Zvuk mikrofona je isključen Slušna pomagala nisu postavljena na odgovarajući program Prijamnici Roger nisu povezani s mikrofonom Roger Vaš mikrofonski Roger bio je dio mreže
Neprestano gubim zvučni signal	Udaljenost između mikrofona Roger i prijamnika Roger prevelika je Između vas i mikrofona Roger postoje prepreke
Glasnoća multimedijskog uređaja premala je	Neispravne postavke glasnoće

Što učiniti

Punite mikrofonski Roger barem četiri sata

Pomaknite mikrofonski Roger bliže govorniku

Pripazite da na otvorima mikrofona nema nečistoće

Provjerite svjetlo indikatora – ako je ljubičasto, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili zvuk mikrofona

Provjerite jesu li vaša slušna pomagala postavljena na odgovarajući program (Roger/FM/DAI/EXT/AUX)

Držite mikrofonski Roger blizu svakog prijamnika Roger i pritisnite tipku za povezivanje

Pritisnite tipku za povezivanje na mikrofonski Roger

Približite se mikrofonski Roger

Provjerite možete li vidjeti mikrofonski Roger (je li vam u vidnom polju)

Povećajte glasnoću izvora zvuka

Problem	Uzroci
Ne čujem multimedijски uređaj	Izvor zvuka utišan je
	Roger Table Mic utišan je
	Roger Table Mic upotrebljava kabel za zvuk, ali nije uključen
Mikrofon Roger treperi plavo	Roger Table Mic bio je dio mreže
Mikrofon Roger treperi crveno	Niska razina napunjenosti baterije
Mikrofon Roger prestao je raditi	Softverski problem
	Postoji nekompatibilnost softvera
	Mikrofon nije uključen
	Mikrofon nije dovoljno blizu
	Mreža mikrofona prekinuta je
Daljinjski upravljač ne reagira	Baterija je prazna

Što učiniti

Uključite zvuk izvora zvuka

Uključite zvuk mikrofona Roger Table Mic

Uključite Roger Table Mic za slušanje izvora zvuka putem kabela za zvuk

Pritisnite tipku za povezivanje na mikrofona Table Mic

Napunite mikrofon Roger što je prije moguće

Ponovno pokrenite mikrofon Roger istovremenim pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje i tipke za povezivanje

Nadogradite sve svoje mikrofone Roger pomoću alata Roger Upgrader koji je dostupan na web-mjestu tvrtke Phonak ili se obratite lokalnom dobavljaču tvrtke Phonak.

Provjerite jesu li oba uređaja uključena

Primaknite mikrofon bliže mikrofona Roger

Pritisnite tipku za povezivanje na jednom mikrofona za ponovno pokretanje mreže

Zamijenite bateriju (tip CR2032) uklanjanjem vijka s poklopca baterije.

8. Servis i jamstvo

8.1 Lokalno jamstvo

Informacije o uvjetima lokalnog jamstva u državi u kojoj ste kupili uređaj zatražite od akustičara za slušna pomagala.

8.2 Međunarodno jamstvo

Tvrtka Phonak nudi ograničeno jednogodišnje međunarodno jamstvo koje vrijedi od datuma kupnje. To ograničeno jamstvo obuhvaća pogreške u proizvodnji i oštećenja materijala. Jamstvo je valjano samo ako se pokaže dokaz kupnje.

Međunarodno jamstvo ne umanjuje nikakva zakonska prava koja možda imate prema primjenjivim nacionalnim zakonima o prodaji potrošačkih dobara.

8.3 Ograničenja jamstva

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala zbog pogrešnog rukovanja ili održavanja, izloženosti kemikalijama, uranjanja u vodu ili nepotrebne primjene sile. U slučaju oštećenja koja su uzrokovale treće strane ili neovlašteno servisiranje, jamstvo ne vrijedi i poništava se. Jamstvo ne obuhvaća usluge koje akustičar za slušna pomagala pruža u svojoj ordinaciji.

Serijski broj: _____

Datum kupnje: _____

Ovlašteni akustičar za slušna pomagala
(pečat/popis):

9. Informacije o sukladnosti

Europa:

Izjava o sukladnosti

Tvrtka Sonova Communications AG izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s Direktivom o radijskoj opremi 2014/53/EU. Cijeli tekst Izjave o sukladnosti za područje EU-a moguće je dobiti od proizvođača, lokalnog predstavnika tvrtke Phonak ili na web-mjestu www.phonak.com/en-int/certificates

Radna frekvencija: 2400 – 2483,5 MHz

Razina snage: < 100 mW

Australija / Novi Zeland:



R-NZ

Označava sukladnost uređaja s važećim regulatornim rješenjima Odjela za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom (engl. Radio Spectrum Management, RSM) i Australske uprave za komunikacije i medije (engl. Australian Communications and Media Authority, ACMA) vezanima uz zakonitu prodaju na Novom Zelandu i u Australiji. Oznaka sukladnosti R-NZ odnosi se na radijske proizvode koji su dostupni na novozelandskom tržištu pod razinom sukladnosti A1.

Napomena 1.:

Uređaj je sukladan s Dijelom 15. Pravilnika Savezne komisije za komunikacije (engl. Federal Communications Commission, FCC) te normama RSS (engl. Radio Standards Specifications, Specifikacije normi za radijske uređaje) za uređaje za koje nije potrebna licencija Ministarstva industrije Kanade. Rad uređaja ovisi o sljedećim dvama uvjetima:

- 1) ovaj uređaj ne smije izazivati štetne smetnje i
- 2) ovaj uređaj mora funkcionirati unatoč smetnjama u okruženju, pa i onima koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Napomena 2.:

Promjene ili izmjene uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka Sonova Communications AG mogu poništiti odobrenje FCC-a za rukovanje uređajem.

Napomena 3.:

Ispitivanjem je utvrđeno da je uređaj sukladan s ograničenjima za digitalne uređaje klase B sukladno Dijelu 15. Pravilnika FCC-a te propisu ICES-003 Ministarstva

industrije Kanade. Namjena je tih ograničenja uvesti razumnu zaštitu od štetnih smetnji u instalaciji u stambenim prostorima. Uređaj stvara, upotrebljava i može odašiljati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne instalira i ne upotrebljava prema uputama, može prouzročiti štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Međutim, nije moguće jamčiti da u određenim instalacijama neće doći do smetnji. Ako ovaj uređaj prouzroči štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijmu, a to se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisniku se preporučuje da smetnje pokuša otkloniti s pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- preusmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene
- povećanjem razmaka između uređaja i prijarnika
- priključivanjem uređaja u utičnicu koja se ne nalazi u istom strujnom krugu kao i ona u koju je priključen prijamnik
- savjetovanjem s prodavačem ili iskusnim radijskim/TV tehničarom.

Napomena 4.:

Sukladnost s japanskim Zakonom o radiju. Sukladnost s propisima poslovnog prava. Ovaj uređaj odobren je u skladu s japanskim Zakonom o radiju (電波法) i japanskim Zakonom o telekomunikacijskom poslovanju (電気通信事業法). Ovaj se uređaj ne smije mijenjati (u suprotnom će broj dodijeljene oznake postati nevažeć).

Napomena 5.:

Izjava o izlaganju RF zračenju FCC-a / Ministarstva industrije Kanade. Ovaj uređaj sukladan je s ograničenjima izlaganja RF zračenju FCC-a utvrđenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač mora biti instaliran na udaljenosti od najmanje 20 cm od svih osoba i ne smije se nalaziti na istoj lokaciji niti se upotrebljavati u kombinaciji s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

10. Informacije i objašnjenje simbola



Simbolom CE tvrtka Sonova Communications AG potvrđuje da je ovaj proizvod tvrtke Phonak sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.



Ovaj simbol ukazuje da je za korisnika važno da pročita i uzme u obzir relevantne informacije u ovom korisničkom priručniku.



Označava proizvođača uređaja.



Ovaj simbol označava da korisnik mora obratiti pozornost na važna upozorenja u ovom korisničkom priručniku.



Važne informacije o rukovanju proizvodima i njihovoj sigurnosti.

Radni uvjeti

Uređaj je osmišljen tako da funkcionira bez poteškoća ili ograničenja ako se upotrebljava u skladu s namjenom, osim ako nije drugačije napomenuto u ovim korisničkim priručnicima.



Oznaka sukladnosti s normom o elektromagnetskoj kompatibilnosti i radijskim komunikacijama za Australiju.



Radna temperatura: od 0 do +45 °C (od +32 do +113 °F).
Temperatura pri skladištenju: od -10 do +60 °C (od +14 do +140 °F).



Vlaga pri prijevozu: do 90 % (bez kondenzacije).
Vlaga pri skladištenju: od 0 % do 70 %, ako se ne upotrebljava.



Atmosferski tlak: od 500 hPa do 1100 hPa.



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakiranju označava da se ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom. Vaša je odgovornost odložiti otpad od opreme odvojeno od komunalnog otpada. Ispravnim odlaganjem vašeg starog uređaja doprinijet ćete sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju koju nije moguće zamijeniti. Nemojte pokušavati otvoriti proizvod ili izvaditi bateriju jer to može dovesti do ozljede i oštećenja proizvoda. Za vađenje baterije obratite se lokalnom pogonu za recikliranje.



Ikona „unlimited” označava da ovaj proizvod sadrži neograničen broj prijemnika Roger za slušna pomagala sa značajkom RogerDirect.



Pakiranje i korisnički priručnik moguće je reciklirati.

11. Važne informacije o sigurnosti

Prije uporabe uređaja tvrtke Phonak pročitajte informacije na stranicama u nastavku.

11.1. Upozorenja o opasnosti

- ⚠ Držite baterije izvan dohvata djece, mentalno hendikepiranih ljudi ili kućnih ljubimaca.
- ⚠ Ovaj uređaj sadrži litijску bateriju u obliku gumba/novčića. Te su baterije opasne i mogu uzrokovati teške ili smrtonosne ozljede za dva sata ili manje ako se progutaju ili stave u bilo koji dio tijela, neovisno o tome je li baterija korištena ili nova! Držite izvan dohvata djece, osoba s kognitivnim oštećenjem i kućnih ljubimaca. Ako mislite da je baterija progutana ili da je stavljena u bilo koji dio tijela, odmah se bez odgode obratite liječniku.
- ⚠ Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije na uređaju čvrsto zatvoren. Nemojte ostavljati praznu bateriju bez nadzora i odmah je odložite na sigurnom mjestu. Prazne baterije također mogu biti opasne.

- ⚠️ Vaš uređaj smije na popravak isključivo u ovlašteni servisni centar. Promjene ili izmjene uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka Phonak nisu dopuštene.
- ⚠️ Odložite električne komponente u skladu s lokalnim propisima.
- ⚠️ Uređaj nemojte upotrebljavati na mjestima na kojima je zabranjena uporaba elektroničke opreme. Ako niste sigurni, pitajte odgovornu osobu.
- ⚠️ Uređaj se ne smije upotrebljavati u letjelicama, osim ako to dozvoli netko od osoblja.
- ⚠️ Promjene ili izmjene uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka Sonova Communications AG nisu dopuštene.

- ⚠️ Upotrebljavajte samo dodatke koje je odobrila tvrtka Sonova Communications AG.
- ⚠️ Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte samo punjače tvrtke Sonova Communications AG ili stabilizirane punjače s nazivnim naponom od 5 VDC, min. 500 mA.
- ⚠️ Nemojte upotrebljavati uređaj u eksplozivnim područjima (rudnicima ili industrijskim područjima gdje postoji opasnost od eksplozija, područjima bogatim kisikom ili područjima gdje se rukuje zapaljivim anesteticima) ili u područjima gdje je zabranjena uporaba elektroničke opreme.
- ⚠️ Uređaj se može oštetiti otvaranjem. Ako dođe do problema koji se ne mogu riješiti slijedeći smjernice u odjeljku za Otklanjanje poteškoća u ovom Korisničkom priručniku, obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.

11.2. Informacije o sigurnosti proizvoda

- ❗ Zaštitite uređaj od pretjeranih udaraca i vibracija.
- ❗ Ne izlažite uređaj temperaturama i vlazi izvan preporučenih raspona navedenih u ovom korisničkom priručniku.
- ❗ Nikada nemojte uređaj sušiti u mikrovalnoj pećnici ili u drugim uređajima za zagrijavanje.
- ❗ Očistite uređaj vlažnom krpom. Uređaj nemojte nikada čistiti sredstvima za čišćenje za domaćinstvo (kao što su prašak za rublje, sapun i dr.) ili alkoholom.
- ❗ S uređajem nemojte povezivati USB kabel ili kabel za zvuk koji je dulji od 3 metra (9 stopa).
- ❗ Kada ne upotrebljavate uređaj, isključite ga i držite ga na sigurnom mjestu.
- ❗ Zaštitite uređaj od prekomjerne vlage (kupanje, plivanje), topline (radijator, ploča s instrumentima automobila) i izravnog kontakta s kožom tijekom znojenja (tjelovježba, fitness, sportske aktivnosti).
- ❗ Zračenje rendgenskim zrakama, snimanje CT-om ili MR-om mogu negativno utjecati na ispravno funkcioniranje uređaja ili uništiti uređaj.
- ❗ Nemojte upotrebljavati pretjeranu silu kada spajate uređaj na različite kabele.
- ❗ Zaštitite sve otvore (mikrofone, ulaz zvuka i punjač) od prašine i nečistoća.
- ❗ Ako se uređaj ispusti ili ošteti, pregrije prilikom punjenja, ima oštećeni kabel ili utikač ili ako padne u tekućinu, prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se svom akustičaru za slušna pomagala.
- ❗ Ovaj uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju. Baterija se može napuniti i isprazniti stotine puta, ali s vremenom će se vjerojatno istrošiti. Tada bateriju mora zamijeniti ovlašteno osoblje.

11.3. Druge važne informacije

- Osobe s elektrostimulatorom srca ili drugim medicinskim proizvodima UVIJEK se moraju posavjetovati sa svojim liječnikom ili proizvođačem medicinskog proizvoda PRIJE uporabe uređaja. Uporaba uređaja s elektrostimulatorom srca ili drugim medicinskim proizvodima UVIJEK mora biti u skladu sa sigurnosnim preporukama liječnika koji je odgovoran za elektrostimulator srca ili proizvođača elektrostimulatora srca.
- Uređaj prikuplja i sprema interne tehničke podatke. Te podatke može očitati stručnjak za slušna pomagala u svrhu provjere uređaja i kako bi vam pomogao u ispravnom korištenju uređajem.
- Digitalni signal koji se šalje s uređaja na povezani prijamnik drugi uređaji koji nisu u mreži mikrofona ne mogu čuti.

Napomene



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Švicarska

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1381-15/V2.00/2025-05/ko © 2024-2025 Sonova AG All rights reserved

