

Phonak Sky™ L-UP.

Naudojimo instrukcija

Phonak Sky L-UP
Phonak Sky L-UP Trial



Ši naudojimo instrukcija tinka toliau nurodytiems prietaisams.

Belaidžiai klausos aparatai



Phonak Sky L90-UP

Phonak Sky L70-UP

Phonak Sky L50-UP

Phonak Sky L30-UP

Phonak Sky L-UP Trial



Išsami informacija apie jūsų klausos aparatą

① Jei nepažymėtas nė vienas langelis ir nežinote klausos aparato modelio, kreipkitės į klausos protezavimo specialistą.

Klausos aparato modeliai

- ☐ Sky L-UP (L90/L70/L50/L30)
- ☐ Sky L-UP Trial

Elemento dydis

675
675

Įdėklai

- ☐ Klasikinis ausies įdėklas
- ☐ Universalus antgalis

Jūsų klausos aparatą sukūrė pasaulio klausos sprendimų lyderė „Phonak“, įsikūrusi Ciuriche (Šveicarijoje).

Šie aukščiausios klasės gaminiai yra dešimtmečius trukusių tyrimų ir patirties rezultatas ir yra sukurti siekiant jūsų gerovės. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį, ir linkime ilgų metų malonaus klausymosi. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad susipažintumėte su prietaisu ir galėtumėte naudotis visomis jo funkcinėmis galimybėmis. Norint naudotis šiuo prietaisu, nereikia išklaudyti mokymų. Klausos protezavimo specialistas padės nustatyti šį prietaisą pagal jūsų individualius pageidavimus pritaikymo konsultacijos metu.

Jeigu reikia daugiau informacijos apie klausos aparato priedų savybes, pranašumus, nustatymą, naudojimą, priežiūrą ar remontą, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą arba gamintojo atstovą. Papildomos informacijos rasite gaminio duomenų lape.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Turinys

Jūsų klausos aparatas

- | | | |
|----|-----------------------|----|
| 1. | Trumpasis vadovas | 8 |
| 2. | Klausos aparato dalys | 10 |

Klausos aparato naudojimo instrukcija


- | | | |
|-----|---|----|
| 3. | Kairiosios ir dešinės ausies klausos
aparato žymės | 11 |
| 4. | Ijungimas/išjungimas | 12 |
| 5. | Elementai | 13 |
| 6. | Klausos aparato uždėjimas | 17 |
| 7. | Klausos aparato išėmimas | 18 |
| 8. | Daugiafunkcis mygtukas su indikatoriaus
lempute | 19 |
| 9. | Ryšio apžvalga | 21 |
| 10. | Pradinis susiejimas | 22 |
| 11. | Telefono skambučiai | 25 |
| 12. | Skrydžio režimas | 30 |

Kita informacija


13.	Programėlės „myPhonak Junior“ apžvalga	32
14.	„Roger™“ apžvalga	33
15.	Klausymasis viešose vietose	34
16.	Aplinkos sąlygos	35
17.	Priežiūra	37
18.	Įdėklo keitimas	40
19.	Techninė priežiūra ir garantija	41
20.	Atitikties informacija	43
21.	Informacija apie simbolius ir jų aprašymas	48
22.	Gedimų šalinimas	54
23.	Svarbi saugos informacija	56

1. Trumpasis vadovas


Elementų keitimas

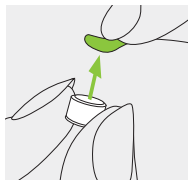

1.
Nuo naujo elemento nuplėškite lipduką ir palaukite 2 minutes.

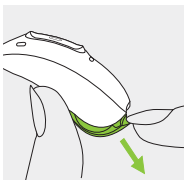


2.
Atidarykite elemento skyrelio dangtelį. Apie nuo sugadinimo apsaugotus elemento skyrelio dangtelius žr. 5.2 skyriuje.

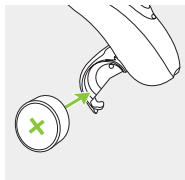


3.
Įdėkite elementą po elemento skyrelio dangteliu plokščiąja puse į viršų.

Kairiosios ir dešinėsios ausies klausos aparato žymės

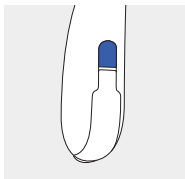


Mėlyna spalva žymimas **kairiosios ausies klausos aparatas.**

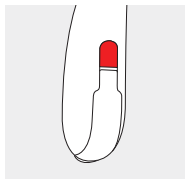


Raudona spalva žymimas **dešinėsios ausies klausos aparatas.**

Ijungimas/išjungimas

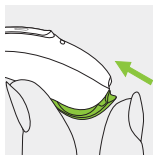

Ijungta

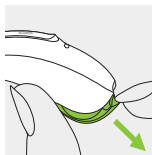


Išjungta

Apie nuo sugadinimo apsaugotus elemento skyrelio dangtelius žr. 5.2 skyriuje.


Daugiafunkcis mygtukas su indikatoriaus lempute

Mygtukas turi kelias funkcijas. Atsižvelgiant į klausos aparato programavimą, jis veikia kaip garso reguliatorius ir (arba) programos keitimo mygtukas. Tai nurodyta atskiroje klausos aparato instrukcijoje. Jeigu klausos aparatas susietas su telefonu, kuriame veikia „Bluetooth®“, trumpu paspaudimu priimamas, o ilgu paspaudimu atmetamas gaunamas skambutis. Informacijos apie indikatoriaus lemputę ieškokite 8 skyriuje.

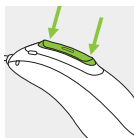

Skrydžio režimas

Jei norite įjungti skrydžio režimą, paspauskite apatinę mygtuko dalį 7 sek. uždarydami elemento skyrelio dangtelį. Norėdami išjungti skrydžio režimą, tiesiog vėl atidarykite ir uždarykite elemento skyrelio dangtelį.

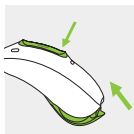

2. Klausos aparato dalys

Toliau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas šioje naudojimo instrukcijoje aprašytas klausos aparato modelis ir suderinami įdėklai. Savo turimą modelį galite identifikuoti:

- pagal 3 psl. „Išsami informacija apie jūsų klausos aparatą“ pateiktą informaciją;
- palygindami įdėklą ir klausos aparatą su toliau nurodytais modeliais.

Suderinami įdėklai




Klasikinis ausies
įdėklas



Universalus
antgalis


„Sky L-UP“/„Sky L-UP Trial“

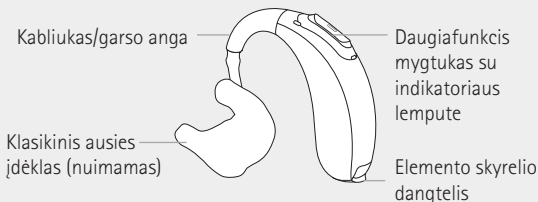


Taip pat prieinama su apsaugos nuo sugadinimo įtaisais, skirtais jaunesniems nei 36 mėn. vaikams (žr. 5.2 skyrių)

3. Kairiosios ir dešinėsios ausies klausos aparato žymės

Ant klausos aparato yra mėlynos ar raudonos spalvos žymė, nurodanti, ar tai kairysis, ar dešinysis klausos aparatas.

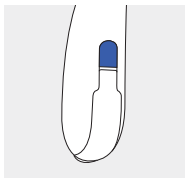

Mėlyna spalva
žymimas **kairiosios**
ausies klausos
aparatas.

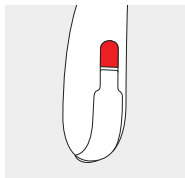


Raudona spalva
žymimas **dešinėsios**
ausies klausos
aparatas.

4. Įjungimas/išjungimas

Elemento skyrelio dangtelis yra ir įjungimo (išjungimo) jungiklis.


1.

Uždarytas elemento skyrelio dangtelis = klausos aparatas **įjungtas**

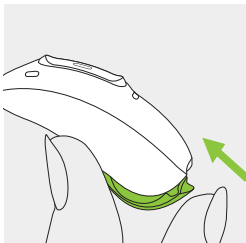

2.


Atidarytas elemento skyrelio dangtelis = klausos aparatas **išjungtas**

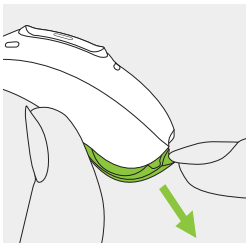


❶ Įjungus klausos aparatą gali pasigirsti paleidimo melodija.

5. Elementai


5.1 Elemento įdėjimas su standartiniu elemento skyrelio dangteliu

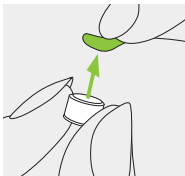

1.
Nuo naujo elemento nuplėškite lipduką ir palaukite 2 minutes.

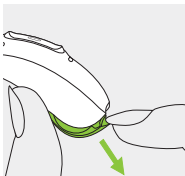

2.
Atidarykite elemento skyrelio dangtelį.

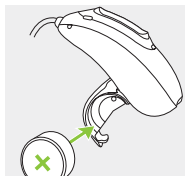

3.
Įdėkite elementą po elemento skyrelio dangteliu plokščiaja puse į viršų.

- ❗ Jeigu elemento skyrelio dangtelis sunkiai užsidaro, patikrinkite, ar elementas tinkamai įdėtas ir plokščioji pusė nukreipta į viršų. Jeigu elementas įdėtas netinkamai, klausos aparatas neveiks, o elemento skyrelio dangtelis gali būti apgadintas. Plokščioji pusė pažymėta „+“ simboliu ant lipduko arba ant elemento.
- ❗ Jei nuo sugadinimo apsaugotas dangtelis pritvirtinamas prie jaunesnio nei 36 mėn. vaiko aparato, perskaitykite toliau pateiktą svarbią informaciją ir vadovaukitės konkrečiomis 5.2 skyriuje pateiktomis elemento įdėjimo instrukcijomis.



Senkantis elementas: elementui senkant pasigirs du pyptelėjimai ir matysite nuolat mirksinčią žalią lemputę (jei suaktyvinta). Elementui pakeisti turėsite maždaug 60 minučių (laikas gali skirtis, atsižvelgiant į klausos aparato parametrus ir elementą). Rekomenduojame visuomet turėti naują elementą.

Pakaitinis elementas

Šiame klausos aparate naudojami 675 dydžio cinko-oro elementai.

Modelis	Cinko-oro elemento dydis	Spalvinė žyma ant pakuotės	IEC kodas	ANSI kodas
Phonak Sky L-UP/L-UP Trial	675	mėlyna	PR44	7003ZD

❶ Klausos aparate naudokite tik tinkamo tipo elementą (cinko-oro). Daugiau informacijos apie gaminio saugą rasite 23.2 skyriuje.


5.2 Elemento įdėjimas naudojant nuo sugadinimo apsaugotą elemento skyrelio dangtelį

Šiame klausos aparate galima sumontuoti nuo sugadinimo apsaugotą elemento skyrelio dangtelį, jeigu tai būtina dėl saugumo (jaunesniems nei 36 mėn. amžiaus vaikams).

Elemento skyrelio dangtelio atidarymas


1.

Įdėkite įrankio galiuką į mažą angelę klausos aparato apačioje.

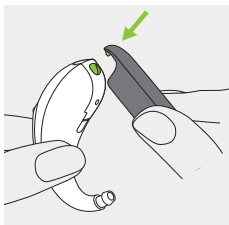

2.


Naudokite elemento skyrelio dangtelio atidarymo palengvinimo priemonę kreipdami ją žalios rodyklės kryptimi.

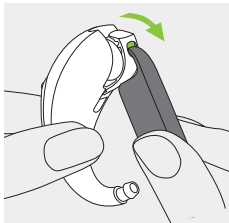

Elemento įdėjimas


1.

Nuo naujo elemento nuplėškite lipduką ir palaukite 2 minutes.

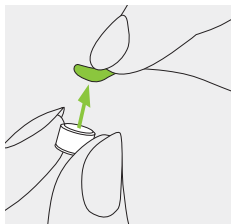


2.

Įdėkite elementą po elemento skyrelio dangteliu plokščiąja puse į viršų.

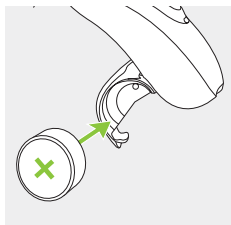

Elemento skyrelio dangtelio uždarymas

Elementas bus apsaugotas tik tada, kai elemento skyrelio dangtelis bus tinkamai uždarytas. Uždarę visada patikrinkite, ar elemento skyrelio dangtelio negalima atidaryti ranka.

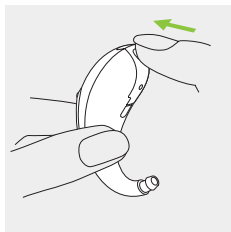


6. Klausos aparato uždėjimas

6.1 Klausos aparato su klasikiniu ausies įdėklu uždėjimas


1.

Priglauskite ausies įdėklą prie ausies ir įkiškite ausies kanalo dalį į ausies kanalą.

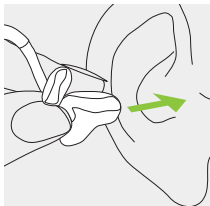


2.

Uždėkite klausos aparatą už ausies.

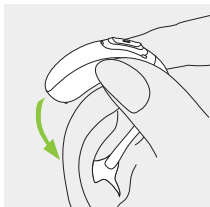

3.

Viršutinę ausies įdėklo dalį įkiškite į savo ausies kaušelio viršutinę dalį.

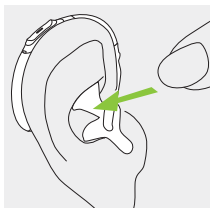


7. Klausos aparato išėmimas

7.1 Klausos aparato su klasikiniu ausies įdėklų išėmimas


1.

Pakelkite klausos aparatą virš ausies viršutinės dalies.

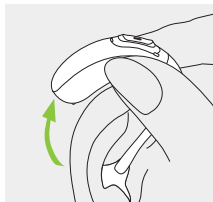

2.

Suimkite ausies įdėklą pirštais ir švelniai jį išimkite.

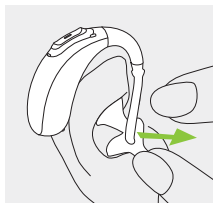


❗ Nuimdami klausos aparatą, pasistenkite netraukti už vamzdelio.

8. Daugiafunkcis mygtukas su indikatoriaus lempute

Daugiafunkcis mygtukas turi kelias funkcijas.

Atsižvelgiant į klausos aparato programavimą, jis veikia kaip garso reguliatorius ir (arba) programos keitimo mygtukas. Tai nurodyta atskiroje klausos aparato instrukcijoje. Norėdami gauti spaudinį, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

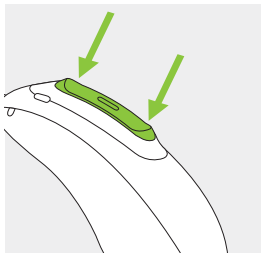

Jei klausos aparatas susietas su telefonu, kuriame veikia „Bluetooth®“, trumpai paspaudus viršutinę arba apatinę mygtuko dalį bus priimtas gaunamas skambutis, o ilgu paspaudimu gaunamas skambutis bus atmestas (žr. 11 skyrių).

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė nurodo mažų vaikų tėvams ir globėjams klausos aparato būseną. Indikatoriaus lemputė integruota daugiafunkčiame mygtuke rodo klausos aparato būseną, kai jis įjungtas.

Jūsų klausos protezavimo specialistas gali skirtingais būdais aktyvinti/išjungti indikatoriaus lemputę.


Visas klausos aparato būsenų signalų sąrašas pateiktas toliau. Paprašykite savo klausos protezavimo specialisto pažymėti, kas buvo suaktyvinta.

Klausos aparato būseną	Indikatoriaus lemputės veikimas
☐ Klausos aparatas įjungtas	Pasikartojantis vienkartinis mirksėjimas ● ● ●
☐ Klausos aparatas įjungtas ir yra „Roger™“	Pasikartojantis dvigubas mirksėjimas ●● ●● ●● ●●
☐ Elementas senka*	Nuolatinis mirksėjimas ●●●●●●●●
☐ Garsumo lygio keitimas (naudojant nuotolinio valdymo pultą, „myPhonak Junior“ arba daugiafunkcij mygtuką)	Vienas mirktelėjimas vienam garsumo pokyčiui ●
☐ Programos keitimas (naudojant nuotolinio valdymo pultą, „myPhonak Junior“ arba daugiafunkcij mygtuką)	Vienas mirktelėjimas vienam programos pokyčiui ●

* Senkančio elemento įspėjimas įjungiamas likus 60 min. iki poreikio įkrauti elementą. Rekomenduojama visuomet turėti naują elementą.

9. Ryšio apžvalga

Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotos galimos jūsų klausos aparato ryšio parinktys.

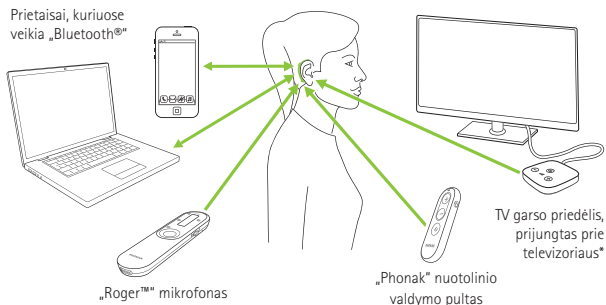

* TV garso priedėlį galima prijungti prie bet kurio garso šaltinio, pvz., televizoriaus, kompiuterio ar „Hi-Fi“ sistemos.


10. Pradinis susiejimas

10.1 Pradinis susiejimas su prietaisu, kuriame veikia „Bluetooth®“ ryšys

- ① Susiejimo su kiekvienu prietaisu, kuriame įjungta belaidžio ryšio technologija „Bluetooth®“, procedūrą reikia atlikti tik po vieną kartą. Atlikus pradinį susiejimą, klausos aparatas automatiškai prisijungs prie prietaiso. Pradinis susiejimas gali trukti iki 2 minučių.

1.
Prietaise (pvz., telefone) įjunkite belaidę „Bluetooth®“ technologiją ir ryšio nustatymo meniu ieškokite prietaisų, kuriuose įjungtas „Bluetooth®“.

2.
Įjunkite abu klausos aparatus.
Dabar per 3 minutes galite susieti klausos aparatus su prietaisu.

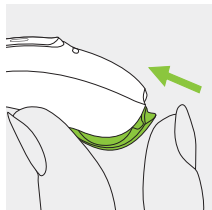

3.

Prietaise rodomas prietaisų, kuriuose veikia „Bluetooth®“, sąrašas. Pasirinkite klausos aparatą iš sąrašo, jei vienu metu norite susieti abu klausos aparatus. Pyptelėjimas patvirtina, kad susieta sėkmingai.

① Daugiau informacijos apie populiariausių telefonų gamintojų belaidės „Bluetooth®“ technologijos specialias susiejimo instrukcijas rasite:
<https://www.phonak.com/en-int/support>


10.2 Prijungimas prie prietaiso

Susiejus klausos aparatą su prietaisu, jis vėl automatiškai prisijungs, kai bus įjungtas.

- ① Ryšys išliks, kol prietaisas bus įjungtas ir ryšio zonoje.
- ① Prie jūsų klausos aparato galima prijungti ne daugiau nei du prietaisus ir susieti ne daugiau nei aštuonis prietaisus.

11. Telefono skambučiai

Jūsų klausos aparatas gali būti tiesiogiai prijungtas prie telefono, kuriame veikia „Bluetooth®“ ryšys. Susiejus ir sujungus su telefonu, pranešimus ir pašnekovo balsą girdėsite tiesiogiai per klausos aparatą. Kalbėtis telefonu galite laisvų rankų režimu. Tai reiškia, kad jūsų balsą aptinka klausos aparato mikrofonai ir perduoda jį į telefoną.

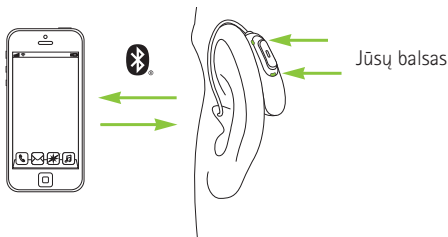


11.1 Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir paspauskite numerio rinkimo mygtuką. Numerio rinkimo signalą girdėsite per klausos aparatą. Jūsų balsą aptinka klausos aparato mikrofoni ir perduoda į telefoną.

11.2 Skambučio priėmimas


Gaunant skambutį, klausos aparate pasigirs gaunamo skambučio pranešimas.

Skambutį galima priimti trumpai paspaudus viršutinę arba apatinę ant klausos aparato esančio daugiafunkcio mygtuko dalį (trumpiau nei 2 sek.) arba tiesiogiai telefonu.

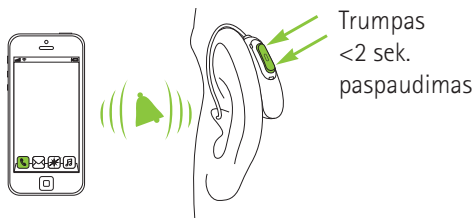


11.3 Skambučio baigimas

Skambutį galima užbaigti ilgai paspaudus viršutinę arba apatinę ant klausos aparato esančio daigiafunkcio mygtuko dalį (ilgiau nei 2 sek.) arba tiesiogiai telefonu.

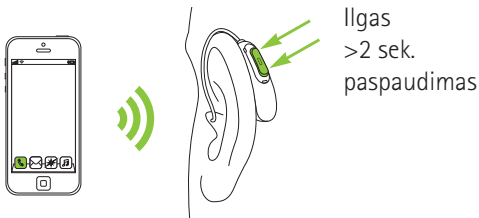

11.4 Skambučio atmetimas

Gaunamą skambutį galima atmesti ilgai paspaudus viršutinę arba apatinę ant klausos aparato esančio daugiafunkcio mygtuko dalį (ilgiau nei 2 sek.) arba tiesiogiai telefonu.

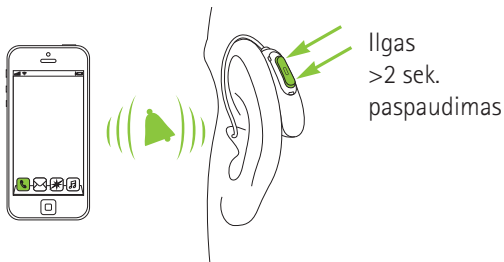

12. Skrydžio režimas


Jūsų klausos aparatas veikia 2,4–2,48 GHz dažnių diapazone. Skrydžio metu kai kurie operatoriai reikalauja visus prietaisus perjungti į skrydžio režimą. Įjungus skrydžio režimą, įprastos klausos aparato funkcijos veiks, neveiks tik „Bluetooth®“ ryšio funkcijos.

12.1 Skrydžio režimo įjungimas

Jei norite išjungti belaidžio ryšio funkciją ir kiekviename klausos aparate įjungti skrydžio režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1.

Atidarykite elemento skyrelio dangtelį.
Apie nuo sugadinimo apsaugotą elemento skyrelio dangtelį žr. 5.2 skyriuje.

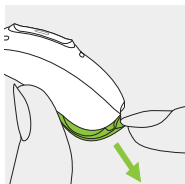

2.

Uždarydami elemento skyrelio dangtelį 7 sek. palaikykite paspaudę ant klausos aparato esančio daugiafunkcio mygtuko apatinę dalį.

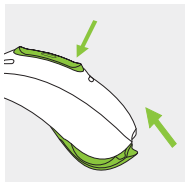

Kai veikia skrydžio režimas, klausos aparatas negali tiesiogiai prisijungti prie telefono.


12.2 Skrydžio režimo išjungimas

Jei norite įjungti belaidžio ryšio funkciją ir kiekviename klausos aparate išjungti skrydžio režimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1.


Atidarykite elemento skyrelio dangtelį.

Apie nuo sugadinimo apsaugotą elemento skyrelio dangtelį žr. 5.2 skyriuje.

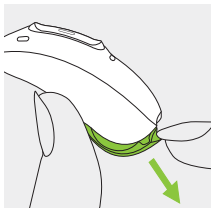

2.

Vėl uždarykite elemento skyrelio dangtelį.

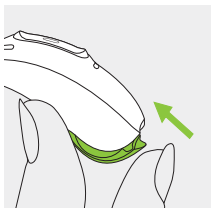

13. Programėlės „myPhonak Junior“ apžvalga

Norėdami sužinoti daugiau apie „myPhonak Junior“, atsilankykite svetainėje
www.phonak.com/junior-ug
arba nuskaitykite QR kodą



Norėdami įdiegti „myPhonak Junior“,
nuskaitykite QR kodą



14. „Roger™“ apžvalga

Mėgaukitės klausymo su „Roger™“ patirtimi

„Roger™“ yra išmani belaidė technologija, perduodanti kalbą tiesiai į klausos aparatus, kad būtų lengviau bendrauti per atstumą arba esant triukšmui. Mikrofonas aptinka kalbančiojo balsą ir belaidžiu būdu perduoda jį tiesiogiai į jūsų klausos aparato* „Roger™“ imtuvus. Galite visapusiškai dalyvauti grupės pokalbiuose labai triukšmingose aplinkose, pavyzdžiui, restoranuose, susikimuose darbe ir mokyklos veiklose.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Roger™“ technologiją ir mikrofonus, apsilankykite svetainėje **www.phonak.com/roger** arba nuskaitykite QR kodą.



„Roger™“ mikrofonai parduodami atskirai.

* Norint naudoti „RogerDirect™“, reikia, kad klausos protezavimo specialistas „Phonak“ klausos aparatuose įtaisytų „Roger™“ imtuvus.

15. Klausymasis viešose vietose

Jūsų klausos aparate yra teleritės parinktis, kuri gali padėti jums girdėti įvairiose viešose vietose, pavyzdžiui, bažnyčiose, koncertų salėse, traukinių stotyse arba vyriausybės pastatuose.



Jei matote šį simbolį, prieinama kilpos sistema, suderinama su jūsų klausos aparatu. Norėdami gauti daugiau informacijos ir suaktyvinti teleritės funkciją, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Kaip naudotis teleritės funkcija

Pasiekti jūsų klausos protezavimo specialisto nustatytą teleritės funkciją galima dviem būdais.

Galima tiesiogiai prisijungti prie teleritės programos ilgai paspaudus daugiafunkcij klausos aparato mygtuką.

Taip pat prie teleritės programos galima prisijungi naudojant programėlę „myPhonak Junior“. Įsitikinkite, kad stovite arba sėdite paskirtoje kilpos sistemos srityje, kaip nurodyta oficialiu teleritės simboliu.

16. Aplinkos sąlygos

Prietaisas sukurtas taip, kad naudojamas pagal paskirtį veiktų nepriekaištingai ir be apribojimų (nebent šioje naudojimo instrukcijoje nurodyta kitaip).

Būtinai naudokite, gabenkite ir laikykite klausos aparatą laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų.

	Naudojimas	Gabenimas	Laikymas
Temperatūra Maksimalus diapazonas	Nuo +5 iki +40 °C (nuo +41 iki +104 °F)	Nuo -20 iki +60 °C (nuo -4 iki +140 °F)	Nuo -20 iki +60 °C (nuo -4 iki +140 °F)
Drėgmė (be kondensato)	0–85 %	0–93 %	0–93 %
Atmosferos slėgis	500–1 060 hPa	500–1 060 hPa	500–1 060 hPa

Temperatūra ir drėgmė gabenimo ir laikymo metu ilgą laiką neturi viršyti pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytų ribų. Jeigu ilgai nenaudojate klausos aparato, elementą išimkite.

Šie klausos aparatai klasifikuojami kaip IP68. Tai reiškia, kad jie yra atsparūs vandeniui ir dulkėms bei sukurti taip, kad atlaikytų kasdienės situacijas. Juos galima dėvėti lyjant, bet negalima visiškai panardinti į vandenį arba naudoti maudantis duše, plaukiojant ar užsiimant kita veikla vandenyje.

Šie klausos aparatai niekada neturėtų kontaktuoti su vandeniu, kuriame yra chloro, muilo, druskos, ar su kitais skysčiais, kuriuose yra cheminių medžiagų.

Jei gaminys buvo laikomas ir gabenamas rekomendacijų neatitinkančiomis naudojimo sąlygomis, prieš paleisdami prietaisą palaukite 15 minučių, kol bus atkurtos rekomenduojamos aplinkos sąlygos.

17. Priežiūra

Numatomas eksploatavimo laikas

Numatomas klausos aparatų eksploatavimo laikas yra penkeri metai. Tikimasi, kad prietaisai išliks saugūs naudoti šiuo laikotarpiu.

Komercinių paslaugų laikas

Rūpestinga ir reguliari klausos aparatų priežiūra užtikrins išskirtinę veikimo kokybę numatomu prietaisų eksploatavimo laikotarpiu.

„Sonova AG“ suteiks mažiausiai penkerių metų aptarnavimo laikotarpį po to, kai bus nutrauktas atitinkamo klausos aparato ir pagrindinių komponentų tiekimas.

Šiais duomenimis naudokitės kaip nuorodomis.

Daugiau informacijos apie gaminio saugą pateikiama 23.2 skyriuje.

Bendroji informacija

Prieš naudodami kosmetiką ar plaukų laką, išsiimkite klausos aparatą iš ausies, kad nebūtų pažeistas.

Kai klausos aparato nenaudojate, palikite elemento skyrelio dangtelį atidarytą, kad išgaruotų drėgmė.

Panaudotą klausos aparatą visada gerai išdžiovinkite. Laikykite klausos aparatą saugioje, sausoje ir švarioje vietoje.

Klausos aparatas yra nepralaidus vandeniui, prakaitui ir dulkėms esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Elemento skyrelio dangtelis visiškai uždarytas.
Įsitikinkite, kad uždariant elemento skyrelio dangtelį nepakliuvo joks pašalinis objektas, pvz., plaukas.
- Vandens, prakaito ar dulkių paveiktas klausos aparatas yra nuvalomas ir nusausinamas.
- Klausos aparatas naudojamas ir prižiūrimas remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais.

❶ Klausos aparatą naudojant šalia vandens gali būti apribotas prie elementų patenkantis oro srautas, todėl aparatas gali nustoti veikti. Jei klausos aparatas nustojo veikti patyręs sąlytį su vandeniu, žr. 22 skyriuje pateiktus nesklandumų šalinimo veiksmus.

Kasdien

Apžiūrėkite ausinę ir klausymo vamzdelį, ar neliko ausies sieros ir drėgmės. Paviršius nuvalykite nepūkuotu audiniu. Klausos aparato niekada nevalykite buitinais valikliais, muilu ir pan. Vandeniu skalauti šių detalių nerekomenduojama, nes vamzdelyje gali likti drėgmės. Jei klausos aparatą reikia išvalyti kruopščiau, patarimo teiraukitės klausos protezavimo specialisto.

Kas savaitę

Įdėklą valykite minkšta, drėgna audinio skiaute arba specialia valymo šluoste, skirta klausos aparatams. Jeigu reikia išsamesnių priežiūros instrukcijų ar daugiau nei paprasto valymo, kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

Kas mėnesį

Patikrinkite savo klausos vamzdelį, ar nepasikeitusi jo spalva, ar jis nesukietėjo ir nesulūžo. Esant pakitimų, klausos vamzdelį reikia pakeisti. Kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą.

18. Įdėklo keitimas

Reguliariai patikrinkite įdėklą. Jei jis atrodo purvinas, sumažėjo klausos aparato garsumas ar garso kokybė, nuvalykite arba pakeiskite jį.

19. Techninė priežiūra ir garantija

Vietinė garantija

Informacijos apie vietinės garantijos sąlygas teiraukitės klausos protezavimo specialisto, iš kurio įsigijote klausos aparatus.

Tarptautinė garantija

Bendrovė „Sonova AG“ siūlo vienerių metų ribotąją tarptautinę garantiją, galiojančią nuo pirkimo datos. Ši ribotoji garantija apima paties klausos aparato gamybos ir medžiagų defektus, bet neapima priedų, pvz., elementų, vamzdelių, įdėklų, išorinių imtuvų. Garantija galioja tik pateikus pirkimo įrodymą.

Tarptautinė garantija neturi įtakos įstatyminei teisei, kuri gali būti taikoma pagal šalies įstatymus, apibrėžiančius prekių pardavimą.

Garantijos apribojimas

Ši garantija neapima pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo ar priežiūros, cheminių medžiagų poveikio ar per didelio suspaudimo.

Ji negalioja arba panaikinama, jeigu pažeidimas įvyko dėl trečiųjų šalių ar neįgaliotojo techninės priežiūros centro remonto. Ši garantija neapima jokių paslaugų, kurias atlieka klausos protezavimo specialistas savo darbo vietoje.

Serijos numeris (kairė pusė):

Serijos numeris (dešinė pusė):

Pirkimo data:

Įgaliotasis klausos protezavimo specialistas (antspaudas/parašas):

20. Atitikties informacija

Europa

Klausos aparato atitikties deklaracija

„Sonova AG“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 ir Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Visą šios ES atitikties deklaracijos tekstą galima gauti iš gamintojo arba „Phonak“ vietos atstovo. Jo adresą rasite svetainėje www.phonak.com/en-int/certificates pateiktame sąrašė („Phonak“ atstovai pasaulyje).

Australija/Naujoji Zelandija



R-NZ

Nurodo, kad prietaisas atitinka taikomus radijo bangų spektro valdymo (RSM) ir Australijos ryšių ir žiniasklaidos tarnybos (ACMA) reguliuojamąsias nuostatas, taikomas teisėtam pardavimui Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje. Atitikties žyma R-NZ naudojama radijo gaminiams, kurie tiekiami Naujosios Zelandijos rinkai pagal A1 atitikties lygį.

2 psl. išvardyti belaidžiai modeliai sertifikuoti pagal:

Phonak Sky L-UP (L90/L70/L50/L30)

Phonak Sky L-UP Trial

JAV

FCC ID: KWC-BPZ

Kanada

IC: 2262A-BPZ

1 pastaba

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ RSS-210. Jis privalo atitikti šias dvi veikimo sąlygas:

- 1) nesukelti žalingų trikdžių ir
- 2) atlaikyti visus trikdžius, taip pat ir tuos, dėl kurių prietaisas gali pradėti blogai veikti.

2 pastaba

Jeigu prietaisas buvo kaip nors pakeistas ar modifikuotas negavus aiškaus bendrovės „Sonova AG“ patvirtinimo, FCC gali nebeleisti šio prietaiso naudoti.

3 pastaba

Šis prietaisas išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ ICES-003. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trikdžių, prietaisą sumontavus gyvenamosiose patalpose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, o montuojamas ir naudojamas nesilaikant nurodymų gali sukelti žalingus radijo ryšių trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių

neatsiras tam tikrais montavimo atvejais. Jei šis prietaisas sukelia žalingus trikdžius radijo ar televizijos ryšiams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir įjungiant), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Įjunkite prietaisą į kištukinį lizdą, kuris yra ne toje pačioje elektros grandinėje, į kurią įjungtas imtuvas.
- Prireikus pagalbos, pasitarkite su prekybos agentu ar patyrusiu radijo/TV įrenginių meistru.

Klausos aparato radijo informacija

Antenos tipas	Rezonansinio kontūro antena
Veikimo dažnis	2,4–2,48 GHz
Moduliacija	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Spinduliavimo galia (EIRP)	<1 mW

„Bluetooth®“

Diapazonas	~1 m
„Bluetooth“	4.2 dviejų režimų
Palaikomi profiliai	HFP (laisvųjų rankų profilis), A2DP

Spinduliuotės testas	Atitiktis	Elektromagnetinės aplinkos vadovas
RD spinduliuotės CISPR 11	2 grupė B klasė	Medicinos prietaisas naudoja RD energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl RD spinduliuotė yra labai nedidelė ir neturėtų sukelti jokių netoliese esančios elektroninės įrangos trikdžių
Harmonikų generavimai	Atitinka	
Įtampos svyravimai/ mirkėjimo generavimai	Atitinka	

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

„Phonak“ klausos aparatai priedai yra išbandyti pagal EMS standartą, vadovaujantis IEC 60601-1-2:2014 ar IEC 60601-1-2:2014 A1 2020 reikalavimais.

21. Informacija apie simbolius ir jų aprašymas



CE simboliu bendrovė „Sonova AG“ patvirtina, kad šis gaminys, įskaitant priedus, atitinka Medicinos priemonių reglamento (ES) 2017/745 ir Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Skaičiai po CE simboliu atitinka sertifikuotų įstaigų, su kuriomis buvo konsultuojamasi pagal pirmiau minėtą reglamentą ir direktyvą, kodą.



Šis simbolis reiškia, kad šiose naudojimo instrukcijose aprašyti gaminiai atitinka B tipo reikalavimus pagal EN 60601-1. Šio klausos aparato paviršius patvirtintas kaip atitinkantis B tipo reikalavimus.



Nurodo medicinos prietaiso gamintoją, kaip apibrėžta Medicinos prietaisų reglamente (ES) 2017/745.



Nurodo medicinos prietaiso pagaminimo datą.



Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Bendrijoje. EB atstovas taip pat yra importuotojas į Europos Sąjungą.



Šis simbolis reiškia, kad prietaiso naudotojui svarbu perskaityti ir atsižvelgti į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.



Šis simbolis reiškia, kad naudotojui svarbu atkreipti dėmesį į atitinkamus perspėjimus, susijusius su elementais, pateiktus šioje naudojimo instrukcijoje.



Svarbi informacija apie prietaiso valdymą ir saugą.



Šis simbolis patvirtina, kad iš šio prietaiso sklindantys elektromagnetiniai trikdžiai yra mažesni, nei leidžia JAV Federalinė ryšių komisija.



Nurodo, kad prietaisas atitinka taikomus radijo bangų spektro valdymo (RSM) ir Australijos ryšių ir žiniasklaidos tarnybos (ACMA) reguliuojamąsias nuostatas, taikomas teisėtam pardavimui Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje.

 **Bluetooth®** „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra „Bluetooth® SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, kuriuos „Sonova AG“ naudoja pagal licenciją. Kitų prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.



Japonijos sertifikuotos radijo įrangos ženklas.



Nurodo gamintojo serijos numerį, kad būtų galima identifikuoti konkretų medicinos prietaisą.



Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad būtų galima identifikuoti medicinos prietaisą.



Nurodo, kad tai yra medicinos prietaisas.



Šis simbolis nurodo, kad yra elektroninės naudojimo instrukcijos.

IP68

Atsparumo išoriniams veiksniams reitingas. IP68 įvertis nurodo, kad klausos aparatas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Jis atlaikė 60 minučių panardinimą į vandenį 1 metro gylyje ir 8 valandas dulkių kameroje, kaip nurodyta standarte IEC60529.



Nurodo temperatūros ribas, esant kurioms medicinos prietaisas gali būti saugiai naudojamas.



Nurodo drėgmės ribas, esant kurioms medicinos prietaisas gali būti saugiai naudojamas.



Nurodo atmosferos slėgio ribas, esant kurioms medicinos prietaisas gali būti saugiai naudojamas.



Gabenant negali sušlapti.



Simbolis su perbrauktu šiukšlių konteineriu perspėja, kad šio klausos aparato ir elementų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus ar nenaudojamus klausos aparatus išmeskite atliekų utilizavimo vietose, skirtose elektroninėms atliekoms, arba atiduokite utilizuoti klausos protezavimo specialistui. Tinkamai utilizuojant prietaisus, saugoma aplinka ir sveikata.

22. Gedimų šalinimas

Problema	Priežastys
Klausos aparatas spengia	Klausos aparatas netinkamai įdėtas į ausį Ausies kanale yra sieros
Klausos aparato garsas per stiprus	Per didelis garsumas
Klausos aparato garsas per silpnas arba iškraipomas	Per mažas garsumas Senka elementas Įdėklas užkimštas Pasikeitė klausa
Klausos aparatas dukart pypteli	Indikacija, kad senka elementas
Klausos aparatas neveikia (nestiprinamas garsas)	Įdėklas užkimštas Klausos aparatas išjungtas Elementas visiškai išsekęs
Nepavyksta įjungti klausos aparato	Elementas visiškai išsekęs
Neveikia telefono skambučių valdymo funkcija	Klausos aparatas veikia skrydžio režimu Klausos aparatas nesusietas su telefonu
Indikatoriaus lemputė nemirksi	Išsikrovęs elementas Netinkamai įdėtas elementas Indikatoriaus lemputė neaktyvi

❗ Jeigu problema išlieka, kreipkitės pagalbos į savo klausos protezavimo specialistą.

Ką daryti

Tinkamai įstatykite klausos aparatą (6 skyrius)

Kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą

Jeigu yra garso reguliatorius, sumažinkite garsumą (8 skyrius)

Jeigu yra garso reguliatorius, padidinkite garsumą (8 skyrius)

Pakeiskite elementą (5 skyrius)

Išvalykite įdėklą (17 skyrius)

Kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą

Per 60 minučių pakeiskite elementą (5 skyrius)

Išvalykite įdėklą (17 skyrius)

3 sek. spauskite apatinę daugiafunkcio mygtuko dalį (8 skyrius)

Pakeiskite elementą (5 skyrius)

Pakeiskite elementą (5 skyrius)

Išjunkite ir vėl įjunkite klausos aparatą (12.2 skyrius)

Susiekite su telefonu (10 skyrius)

Pakeiskite elementą (5 skyrius)

Tinkamai įdėkite elementą (5 skyrius)

Kreipkitės į savo klausos protezavimo specialistą

Daugiau informacijos rasite <https://www.phonak.com/en-int/support>.

23. Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami klausos aparatą, paskesniuose puslapiuose perskaitykite susijusią saugos ir naudojimo apribojimų informaciją.

Paskirtis

Klausos aparatas skirtas stiprinti ir perduoti garsą į ausį ir taip kompensuoti klausos sutrikimus.

Numatytoji pacientų populiacija

Šis prietaisas skirtas pacientams nuo 0 metų amžiaus, kurie atitinka šio gaminio klinikinės indikacijas.

Numatytasis naudotojas

Skirta:

- klausos netekusiems žmonėms;
- klausos netekusio asmens globėjams;
- už klausos aparato derinimą atsakingam klausos protezavimo specialistui.

Numatyta medicininė indikacija

Klausos netekimas:

- vienpusis arba abipusis;
- klausos netekimo tipas: konduktyvinis, sensorineuralinis arba mišrus;
- klausos netekimo lygis:
 - sunkus;
 - labai sunkus.

Medicininės kontraindikacijos

Medicininės klausos aparatų naudojimo kontraindikacijos:

- ausies deformuotumas (t. y. uždarytas ausies kanalas, ausies kaušelio nebuvimas);
- nervinis klausos netekimas (retrokochealinės patologijos, pvz., klausos nervo nebuvimas/negyvybingumas);
- aktyvios ir lėtinės vidurinės arba išorinės ausies patologijos požymiai, lėtinis drenažas arba išskyros, lėtinio uždegimo požymiai.

Klinikinė nauda

- Geresnis girdimumas
- Geresnis kalbos supratimas (kai tik įgyjami kalbos įgūdžiai)

Šalutinis poveikis

Klausos aparatų fiziologinį šalutinį poveikį, pvz., užesį, galvos svaigimą, ausų sieros kaupimąsi, pernelyg didelį spaudimą, prakaitavimą ar drėgmę, pūsleles, niežulį ir (arba) bėrimą, užsikimšimo arba pilnumo jausmą ir jų pasekmes, pvz., galvos ir (arba) ausų skausmą, gali išgydyti arba sumažinti klausos protezavimo specialistas.

Naudodami įprastinius klausos aparatus pacientai gali patirti didesnį garso poveikį, dėl kurio gali sumažėti akustinės traumos paveiktų dažnių diapazono slenksčiai.

Pagrindiniai paciento kreipimosi į gydytoją ar kitą specialistą kriterijai ir (arba) gydymas nurodyti toliau.

- Matomas įgimtas ar trauminis ausies deformavimas
- Aktyvaus drenažo iš ausies istorija per praėjusias 90 dienų
- Staiga ar greitai progresuojančio vienos arba abiejų ausų klausos netekimo per pastarąsias 90 dienų istorija
- Ūmus arba chroniškas galvos svaigimas
- Audiometrinis oro ir kaulų skirtumas lygus arba didesnis nei 15 dB, esant 500 Hz, 1 000 Hz ir 2 000 Hz.

- Matomos reikšmingos ausies sieros sankaupos ar svetimkūnis ausies kanale
- Ausies skausmas ar diskomfortas.
- Nenormali ausies būgnelio ir ausies kanalo išvaizda, pvz.:
 - išorinio klausos kanalo uždegimas;
 - pradurtas ausies būgnelis;
 - kiti nenormalumai, kurie, klausos protezavimo specialisto manymu, kelia medicininį susirūpinimą.

Reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių renkantis ir pritaikant klausos aparatą, kurio didžiausias garso slėgio lygis viršija 132 decibelus (dB), nes yra rizika pakenkti likutinei klausos aparato naudotojo klausai. (Ši nuostata reikalinga tik tiems klausos aparatams, kurių didžiausias garso slėgio lygis viršija 132 dB).

Klausos protezavimo specialistas gali nuspręsti, kad kreipimasis nėra tinkamas arba neatitinka paciento interesų, kai:

- yra pakankamai įrodymų, kad būklė buvo visiškai ištirta medicinos specialisto ir buvo suteiktas galimas gydymas;
- Būklė nepablogėjo arba reikšmingai nepasikeitė nuo ankstesnio tyrimo ir (arba) gydymo.

Jeigu pacientas pateikė savo informuotą ir kompetentingą sprendimą nepriimti patarimo kreiptis dėl medicininės konsultacijos, leidžiama toliau rekomenduoti tinkamas klausos aparatų sistemas, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

- rekomendacija neturės jokio neigiamo poveikio paciento sveikatai ar bendrajai gerovei;
- įrašai patvirtina, kad buvo apsvarstyti visi būtini argumentai dėl geriausių paciento interesų.

Jei teisiškai reikalaujama, pacientas pasirašė atsisakymą, patvirtinantį, kad patarimas kreiptis dėl konsultacijos nebuvo priimtas ir kad tai yra informuotas sprendimas.

Klausos aparatą galima naudoti namų sąlygomis, tačiau dėl portatyvumo jis gali būti naudojamas specializuotose sveikatos priežiūros vietose, pvz., gydytojų kabinetuose, odontologijos klinikose ir pan.

Klausos aparatas nesugrąžins normalios klausos, nesušvelnins dėl natūralių priežasčių atsiradusių klausos sutrikimų ir nuo jų neapsaugos. Naudojant klausos aparatą tik retkarčiais, negaunama visos jo teikiamos naudos. Klausos aparato naudojimas yra tik dalis klausos reabilitacijos, todėl gali prireikti papildomų klausos mokymų ir nurodymų, kaip skaityti iš lūpų.

Problemas dėl atgalinio ryšio, prastos garso kokybės, pernelyg garsaus ar pernelyg tylaus garso, netikimo ar kramtant ar ryjant juntamas problemas jūsų klausos protezavimo specialistas gali pašalinti arba išspręsti pritaikymo proceso metu.

Apie visus rimtus nelaimingus atsitikimus, susijusius su klausos aparatu, reikia pranešti gamintojo atstovui ir kompetentingoms valstybės, kurioje gyvenate, valdžios institucijoms. Rimtas nelaimingas atsitikimas – tai bet koks nelaimingas atsitikimas, dėl kurio tiesiogiai arba netiesiogiai įvyksta arba gali įvykti bet kuris iš toliau nurodytų atsitikimų:

- a) paciento, naudotojo ar kito asmens mirtis;
- b) laikinas arba ilgalaikis rimtas paciento, naudotojo arba kito asmens sveikatos būsenos pablogėjimas;
- c) rimta grėsmė visuomenės sveikatai.

Norėdami pranešti apie netikėtą veikimą arba atsitikimą, kreipkitės į gamintoją arba atstovą.

23.1 Perspėjimai apie pavojus

-  Jūsų klausos aparatai veikia 2,4–2,48 GHz dažnių diapazone. Jei skrendate, sužinokite, ar skrydžio operatorius reikalauja perjungti prietaisus į skrydžio režimą (žr. 12 skyrių).
-  Klausos aparatus (specialiai suprogramuotus kiekvienam klausos netekimo atvejui) turi naudoti tik asmuo, kuriam jie skirti. Kiti asmenys negali naudoti aparato, nes kyla klausos pažeidimo rizika.
-  Bendrovei „Sonova AG“ nepatvirtinus, keisti ar modifikuoti klausos aparatą yra draudžiama. Tokie pakeitimai gali pažeisti ausis ar pakenkti klausos aparatui.
-  Nenaudokite klausos aparato aplinkoje, kurioje galimi sproginiai (šachtose arba gamybinėje aplinkoje, kur galimi sproginiai, aplinkoje, kur daug deguonies arba naudojami degūs anestetikai). Prietaisas nėra sertifikuotas pagal ATEX direktyvą.

 Jeigu ausyje ar už jos jaučiate skausmą, ji apimta uždegimo arba yra sudirginta oda ir ausų siera kaupiasi greičiau, pasitarkite su savo klausos protezavimo specialistu arba gydytoju.

 Kryptinio mikrofono režimu veikiančios klausymosi programos mažina foninius triukšmus. Atminkite, kad įspėjimo signalai arba garsai, sklindantys iš už nugaros, pavyzdžiui, automobilių, yra iš dalies arba visiškai slopinami.


 ĮSPĖJIMAS: prietaiso elementai yra pavojingi ir, prarijus arba patekus į bet kurią kūno vietą, gali sukelti rimtų sužeidimų, neatsižvelgiant į tai, ar elementas yra panaudotas, ar naujas! Laikyti vaikams, asmenims su proto negalia ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jei įtariate, kad elementas buvo prarytas arba pateko į bet kurią kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

-  Toliau pateikta informacija taikoma tik asmenims su aktyviais implantuojamaisiais medicinos prietaisais (t. y. širdies stimulatoriais, defibriliatoriais ir kt.).
- Klausos aparatą laikykite bent 15 cm (6 col.) atstumu nuo aktyvaus implanto. Jei jaučiate kokius nors trikdžius, klausos aparatų nenaudokite ir kreipkitės į aktyvaus implanto gamintoją. Atkreipkite dėmesį, kad trikdžius taip pat gali kelti elektros tiekimo linijos, elektrostatinės iškvos, oro uostų metalo detektoriai ir kt.
 - Laikykite magnetus (t. y. elemento valdymo įrankį, „EasyPhone“ magnetą ir kt.) bent 15 cm (6 col.) atstumu nuo aktyvaus implanto.

 Kitų, nei nurodyta, ar ne šios įrangos gamintojo pateiktų priedų, daviklių ir kabelių naudojimas gali padidinti elektromagnetinę spinduliuotę arba sumažinti šios įrangos atsparumą elektromagnetiniam poveikiui ir dėl to įranga gali veikti netinkamai.

 Nešiojamoji radijo ryšio įranga (įskaitant tokius išorinius įrenginius, kaip antenos laidai ir išorinės antenos) turi būti naudojama ne arčiau kaip 30 cm (12 col.) atstumu iki bet kurios klausos aparatų dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Kitaip gali suprastėti šios įrangos veikimas.

 Nešiodami klausos aparatą su pagal užsakymą pagamintu įdėklų, venkite stipraus fizinio poveikio ausiai. Pagal užsakymą pagamintų įdėklų stabilumas yra pritaikytas įprastam naudojimui. Dėl stipraus fizinio poveikio ausiai (pvz., sportuojant) pagal užsakymą pagamintas įdėklas gali skilti. Dėl to gali būti pradurtas ausies kanalas arba ausies būgnelis.

 Po mechaninio spaudimo arba smūgio, prieš įstatydami klausos aparatą į ausį įsitikinkite, kad korpusas nepažeistas.

 Nenaudokite šios įrangos greta ar ant kitos įrangos, nes ji gali veikti netinkamai. Jei toks naudojimas neišvengiamas, reikia stebėti, ar ši ir kita įranga veikia įprastai.

-  Klausos aparatų su kepurėlėmis/apsaugos nuo ausų sieros sistemomis neturėtų naudoti klientai su pažeistais ausų būgneliais, uždegimo paveiktais ausų kanalais ar kitokiais vidurinės ausies ertmių pažeidimais. Tokiais atvejais rekomenduojame naudoti klasikinį ausies įdėklą. Įvykus neįprastam atvejui, jeigu kuri nors šio gaminio dalis lieka ausies kanale, rekomenduojama kreiptis į gydytoją ir saugiai ją išimti.
-  Didžiosios dalies klausos aparatų naudotojų klausos netekimas yra tokio pobūdžio, kad klausos pablogėjimas reguliariai naudojant klausos aparatą kasdienėse situacijose yra mažai tikėtinas. Tik nedidelei daliai klausos netekusių klausos aparato naudotojų klausa gali pablogėti ilgai panaudojus.
-  Labai retais atvejais, ištraukiant klausos aparatą iš ausies, netinkamai pritvirtintas antgalis arba jo dalis gali likti ausies kanale. Jei toks neįprastas atvejis nutiko ir ji įstrigo ausies kanale, rekomenduojama kreiptis į gydytoją, kad saugiai išimtų.

 Prie aparatų, naudojamų jaunesniems nei 36 mėn. amžiaus vaikams, turi būti pritvirtinti apsaugos nuo nuimamų dalių sugadinimo įtaisai (pvz., elemento skyrelio dangtelis ir ausies kabliukas), kad smulkios dalys nebūtų atsitiktinai prarytos ar įkvėptos. Jei vienas iš šių apsaugos nuo sugadinimo įtaisų bus pažeistas, prietaisą reikės nunešti klausos protezavimo specialistui, kad jį pataisytų arba pakeistų.

 Klausos aparatas yra mažas prietaisas, kuriame yra smulkių dalių, kurias galima praryti, įkvėpti arba kuriomis galima pažeisti minkštuosius audinius (pvz., akis). Prarijus, įkvėpus ar įkišus į minkštuosius audinius, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją arba ligoninę, nes klausos aparatu ar jo smulkiomis dalimis galima užspringti, pažeisti minkštuosius audinius arba jas galima įkvėpti.

23.2 Gaminio saugos informacija

- ① Šie klausos aparatai yra atsparūs vandeniui, bet nėra jam nepralaidūs. Jie sukurti taip, kad atlaikytų įprastus veiksmus ir atsitiktinį ekstremalių sąlygų poveikį. Niekada nemerkite klausos aparato į vandenį! Šie klausos aparatai nėra specialiai sukurti taip, kad galėtų būti ilgai panardinti vandenyje, pvz.: plaukiojant ar maudantis. Klausos aparate yra jautrių elektroninių dalių, todėl prieš užsiimdami tokia veikla, klausos aparatą visuomet išimkite.
- ① Niekada neplaukite mikrofono įvesčių. Tuomet jos praras savo specifines garsines savybes.
- ① Saugokite klausos aparatą nuo karščio ir saulės spindulių (nepalikite prie lango ar automobilyje). Niekada nedžiovinkite klausos aparato mikrobangų krosnelėje ar kitais kaitinimo prietaisais. Apie tinkamus prietaiso džiovinimo būdus teiraukitės klausos protezavimo specialisto.

- ① Kai klausos aparato nenaudojate, palikite elemento skyrelio dangtelį atidarytą, kad išgaruotų drėgmė. Panaudotą klausos aparatą visada gerai išdžiovinkite. Laikykite klausos aparatą saugioje, sausoje ir švarioje vietoje.
- ① Nemėtykite klausos aparato! Nukritęs ant kieto paviršiaus, klausos aparatas gali sugesti.
- ① Klausos aparate visuomet naudokite naujus elementus. Jei elementas praleidžia skystį, norėdami išvengti odos dirginimo iškart pakeiskite jį nauju. Panaudotus elementus galite grąžinti savo klausos protezavimo specialistui.
- ① Jeigu ilgai nenaudojate klausos aparato, laikykite jį dėžutėje kartu su džiovinimo kapsule arba gerai vėdinamoje vietoje. Taip iš klausos aparato išgaruos drėgmė ir nepablogės veikimas.
- ① Jeigu ilgai nenaudojate klausos aparato, elementą išimkite.

❗ Specialieji medicinos ar dantų tyrimai, įskaitant toliau aprašytą spinduliuotę, gali turėti neigiamos įtakos tinkamam klausos aparatų veikimui. Išsiimkite ir palikite jį už tyrimo patalpos/ zonos ribų, jeigu jums atliekami:

- medicinos ar dantų tyrimai naudojant rentgeno spindulius (įskaitant kompiuterinę tomografiją);
- medicinos tyrimai atliekant MRT/NMRT, kai sukuriama magnetiniai laukai.

Klausos aparatų nereikia nusiimti einant per saugos vartus (oro uostuose ir kt.). Jei rentgeno spinduliai ir būtų naudojami, jų dozės būtų labai mažos ir neturėtų poveikio klausos aparatams.

❗ Nenaudokite klausos aparato tose vietose, kur draudžiama naudoti elektroninę įrangą.

❗ Kepurėlę reikėtų keisti kas tris mėnesius arba kai ji sukietėja ar pradeda trupėti. Tai padeda išvengti kepurėlės atsikabinimo nuo vamzdelio, įdedant į ausį arba iš jos išimant.

Jūsų klausos protezavimo specialistas:



EC	REP
----	-----

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Vokietija

029-1308-92/V1.00/2023-05/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved



Gamintojas:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Šveicarija
www.phonak.com

Atstovas Lietuvoje:

UAB Biomedikos centras
Vilniuje: Antakalnio g. 36, tel. 8 700 55 440
Vilniuje: Santariškių g. 5-112, tel. 8 657 88 786
Kaune: Vytauto pr. 3, tel. 8 37 209420
Klaipėdoje: J. Janonio g. 10-3, tel. 8 46 254441
Panevėžyje: J. Basanavičiaus g. 2-1,
tel. 8 620 41655
www.biomedikoscentras.lt

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459

