

Phonak Naída™ L-UP.

Lietošanas instrukcija

Phonak Naída L-UP
Phonak Naída L-UP Trial



Šī lietošanas instrukcija ir derīga šādiem modeļiem:

Bezvadu dzirdes aparāti



Phonak Naída L90-UP

Phonak Naída L70-UP

Phonak Naída L50-UP

Phonak Naída L30-UP

Phonak Naída L-UP Trial



Jūsu dzirdes aparāts

① Ja nav atzīmēta neviena rūtiņa un jūs nezināt, kurš ir jūsu dzirdes aparāta modelis, lūdzu, jautājiēt savam dzirdes speciālistam.

Dzirdes aparātu modeļi

- ☐ Naída L-UP (L90/L70/L50/L30)
- ☐ Naída L-UP Trial

Baterijas lielums

675
675

Ausu ieliktni

- ☐ Klasisks auss ieliktnis
- ☐ Universāls auss ieliktnis

Jūsu dzirdes aparātu ir izstrādājis uzņēmums Phonak – pasaules vadošais dzirdes palīgīdzekļu izstrādātājs, kas atrodas Cīrihē Šveicē.

Šie augstākās kvalitātes produkti ir desmitiem gadu ilgas pētniecības un zināšanu rezultāts, un tie ir radīti jūsu labsajūtai. Pateicamies par jūsu lielisko izvēli un novēlam ilgus gadus baudīt klausīšanās prieku. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai saprastu, kā lietot savu ierīci un maksimāli efektīvi izmantot tās sniegtās iespējas. Šīs ierīces lietošanai nav nepieciešama apmācība. Dzirdes speciālists palīdzēs iestatīt šo ierīci atbilstoši jūsu individuālajām preferencēm pielāgošanas konsultācijas laikā.

Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu dzirdes aparāta un piederumu funkcijām, priekšrocībām, iestatīšanu, izmantošanu vai remontu, sazinieties ar savu dzirdes aprūpes speciālistu vai ražotāja pārstāvi. Papildinformācija ir pieejama jūsu produkta datu lapā.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Saturs

Jūsu dzirdes aparāts

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Īsā pamācība | 7 |
| 2. | Dzirdes aparāta daļas | 9 |

Dzirdes aparāta lietošanas norādījumi


- | | | |
|-----|--|----|
| 3. | Kreisās un labās puses dzirdes aparāta marķējumi | 10 |
| 4. | Ieslēgšana/izslēgšana | 11 |
| 5. | Baterijas | 12 |
| 6. | Dzirdes aparāta uzlikšana | 16 |
| 7. | Dzirdes aparāta noņemšana | 17 |
| 8. | Daudzfunkciju poga | 18 |
| 9. | Pārskats par savienojamību | 19 |
| 10. | Sākotnējā savienošana pārī | 20 |
| 11. | Tālruņa zvani | 23 |
| 12. | Lidmašīnas režīms | 28 |

Plašāka informācija

13.	myPhonak un myPhonak Junior lietotņu pārskats	30
14.	Roger™ pārskats	31
15.	Klausīšanās publiskās vietās	32
16.	Vides apstākļi	33
17.	Apkope un uzturēšana	35
18.	Auss ieliktņa nomaiņa	38
19.	Remonts un garantija	39
20.	Informācija par atbilstību	41
21.	Informācija par simboliem un to apraksti	46
22.	Problēmu novēršana	52
23.	Svarīga drošības informācija	54


1. Īsā pamācība

Bateriju mainīšana

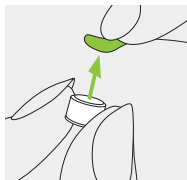


1.

Noņemiet uzlīmi no jaunās baterijas un uzgaidiet 2 minūtes.

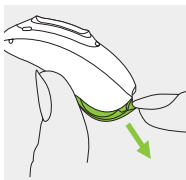

2.


Atveriet baterijas nodalījuma vāciņu. Informāciju par drošo baterijas daļas vāciņu skatiet 5.2. nodaļā.

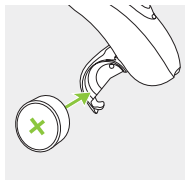


3.

levietojiet bateriju zem baterijas daļas vāciņa ar plakano pusi uz augšu.

Kreisās un labās puses dzirdes aparāta marķējumi

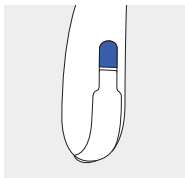


Zils marķējums atbilst kreisās puses dzirdes aparātam.

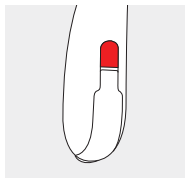


Sarkans marķējums atbilst labās puses dzirdes aparātam.

Ieslēgšana/izslēgšana

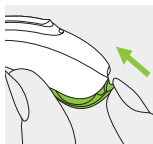


Iesl.

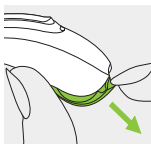

Izsl.


Daudzfunkciju pogā

Pogai ir piesaistītas vairākas funkcijas. Tās ir skaļuma regulēšana un/vai programmas maiņa atkarībā no dzirdes aparāta programmām. Tas ir norādīts individuālajās "Dzirdes aparāta instrukcijās". Ja aparāts ir savienots pāri ar tālruni, kurā iespējots Bluetooth®, īsi nospiežot, ienākošais zvans tiks pieņemts, bet nospiežot ilgāk, ienākošais zvans tiks noraidīts.

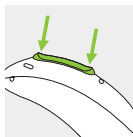

Lidmašīnas režīms

Lai pārietu lidmašīnas režīmā, nospiediet pogas apakšējo daļu 7 sekundes un aizveriet baterijas daļas vāciņu. Lai izietu no lidmašīnas režīma, vienkārši atveriet un atkal aizveriet baterijas daļas vāciņu.

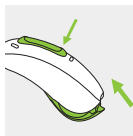

2. Dzirdes aparāta daļas

Attēlos tālāk parādīts šajā lietošanas instrukcijā aprakstītais dzirdes aparāta modelis un saderīgie ausu ieliktni.

Savu individuālo modeli varat noteikt šādi:

- Skatiet sadaļu "Jūsu dzirdes aparāta dati" 3. lpp.
- Salīdziniet savu auss ieliktni un dzirdes aparātu ar tālāk norādītajiem modeļiem.

Saderīgie auss ieliktni



Klasiskais
auss ieliktnis




Universālais
auss uzgalis

Naída L-UP / Naída L-UP Trial

Radziņš/skaņas izeja

Daudzfunkciju
poga

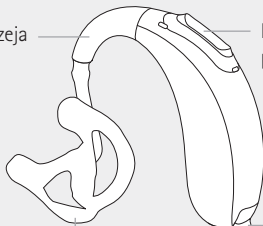


Klasiskais auss ieliktnis (noņemams)


Baterijas daļas
vāciņš

3. Kreisās un labās puses dzirdes aparāta marķējumi

Uz dzirdes aparāta ir zils vai sarkans marķējums, norādot, vai tas ir kreisās vai labās puses dzirdes aparāts.

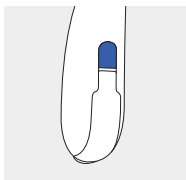

Zils marķējums atbilst **kreisās puses dzirdes aparātam.**

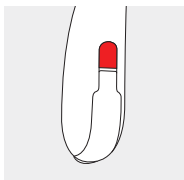


Sarkans marķējums atbilst **labās puses dzirdes aparātam.**

4. Ieslēgšana/izslēgšana

Baterijas daļas vāciņš funkcionē arī kā ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis.


1.

Aizvērts baterijas daļas vāciņš nozīmē, ka dzirdes aparāts ir **ieslēgts**

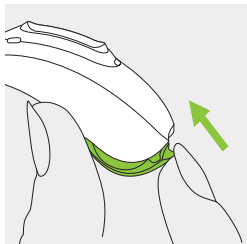

2.


Atvērts baterijas daļas vāciņš nozīmē, ka dzirdes aparāts ir **izslēgts**

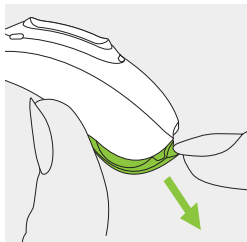


❶ Pēc dzirdes aparāta ieslēgšanas var tikt atskaņots ieslēgšanas signāls.

5. Baterijas


5.1. Baterijas ievietošana, ja modelim ir standarta baterijas daļas vāciņš

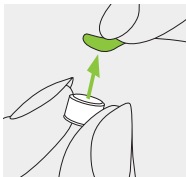

1.
Noņemiet uzlīmi
no jaunās baterijas
un uzgaidiet
2 minūtes.

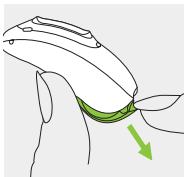

2.
Atveriet baterijas
nodalījuma vāciņu.

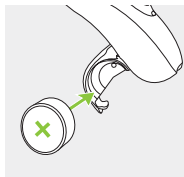

3.
Ievietojiet bateriju
zem baterijas daļas
vāciņa ar plakano
pusi uz augšu.

- ❗ Ja baterijas daļas vāciņa aizvēršana ir apgrūtināta, pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareiza un vai plakanā puse ir vērsta uz augšu. Ja baterija nav ievietota pareizi, dzirdes aparāts nedarbosies un baterijas daļas vāciņš var tikt sabojāts. Plakanā puse ir apzīmēta ar simbolu "+" uz uzlīmes vai baterijas.
- ❗ Ja ir uzstādīts drošais daļas vāciņš, turpiniet lasīt svarīgo informāciju tālāk un skatiet īpašos norādījumus par baterijas ievietošanu 5.2. nodaļā.



Zems uzlādes līmenis. Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, atskanēs divi pīkstieni. Jums ir aptuveni 60 minūtes laika, lai nomainītu bateriju (atkarībā no dzirdes aparāta iestatījumiem un baterijas). Ieteicams vienmēr turēt pa rokai jaunu bateriju.

Baterijas nomaiņa

Šajā dzirdes aparātā ir jāizmanto 675. izmēra cinka–gausa baterija.



Modelis	Cinka–gausa baterijas lielums	Krāsu marķējums uz iepakojuma	IEC kods	ANSI kods
Phonak Naída L-UP / L-UP Trial	675	zils	PR44	7003ZD

❶ Lūdzu, pārliedzinieties, vai dzirdes aparātā izmantojat pareizo bateriju tipu (cinka–gausa). Izlasiet arī 23.2. nodaļu, kur sniegta plašāka informācija par produkta drošību.

5.2. Baterijas ievietošana, ja modelim ir drošs baterijas daļas vāciņš

Šo dzirdes aparātu nepieciešamības gadījumā var aprīkot ar drošu baterijas daļas vāciņu.

Baterijas nodalījuma vāciņa atvēršana

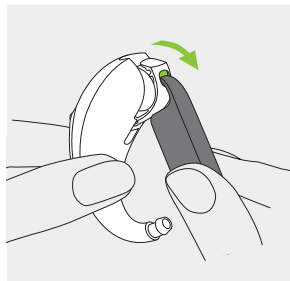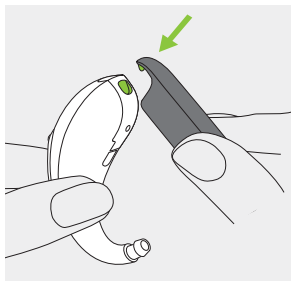


1.
Ievietojiet rīka uzgali
nelielajā atverē, kas atrodas
dzirdes aparāta apakšdaļā.

2.
Izmantojiet rīku kā sviru,
lai ar spēku atvērtu baterijas
daļas vāciņu zaļās bultiņas
norādītajā virzienā.

Baterijas ievietošana


1.

Noņemiet uzlīmi no jaunās baterijas un uzgaidiet 2 minūtes.

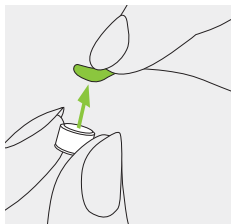


2.

Ievietojiet bateriju zem baterijas daļas vāciņa ar plakano pusi uz augšu.

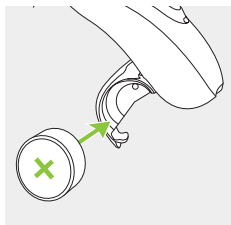

Baterijas daļas vāciņa aizvēršana

Baterija ir fiksēta tikai tad, ja baterijas daļas vāciņš ir pareizi aizvērts. Pēc aizvēršanas vienmēr pārbaudiet, vai baterijas daļas vāciņu nevar atvērt ar roku.

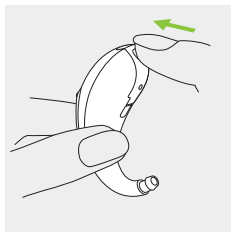


6. Dzirdes aparāta uzlikšana

6.1. Dzirdes aparāts ar klasisko auss ieliktni: ielikšana


1.

Paceliet auss ieliktni līdz ausij un ievietojiet auss kanāla daļu auss kanālā.

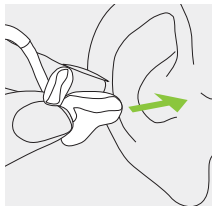


2.

Novietojiet dzirdes aparātu aiz auss.

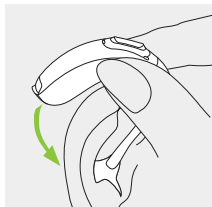

3.

Ievietojiet auss ieliktni augšējā daļā auss gliemežnīcas augšējā daļā.

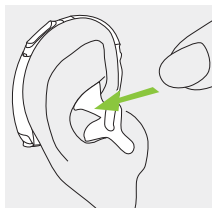


7. Dzirdes aparāta noņemšana

7.1. Dzirdes aparāts ar klasisko auss ieliktni: izņemšana


1.

Paceliet dzirdes aparātu virs auss augšējās daļas.

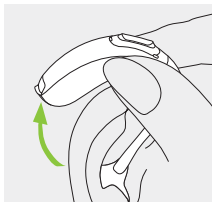

2.

Satveriet auss ieliktni ar pirkstiem un to uzmanīgi noņemiet.

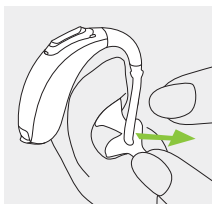


❗ Lūdzu, mēģiniet nesatvert caurulīti, lai noņemtu dzirdes aparātu.

8. Daudzfunkciju poga

Daudzfunkciju pogai ir piesaistītas vairākas funkcijas.


Tās ir skaļuma regulēšana un/vai programmas maiņa atkarībā no dzirdes aparāta programmām. Tas ir norādīts individuālajās "Dzirdes aparāta instrukcijās". Instrukciju izdruku lūdziet savam dzirdes speciālistam.

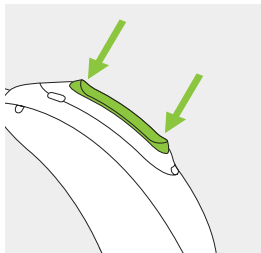

Ja dzirdes aparāts ir savienots pāri ar tālruni, kurā iespējots Bluetooth®, īsi nospiežot pogas augšējo vai apakšējo daļu, ienākošais zvans tiks pieņemts, bet, nospiežot ilgāk, ienākošais zvans tiks noraidīts – skatiet 11. nodaļu.

9. Pārskats par savienojamību

Tālākajā attēlā ir parādītas jūsu dzirdes aparāta savienojamības opcijas.

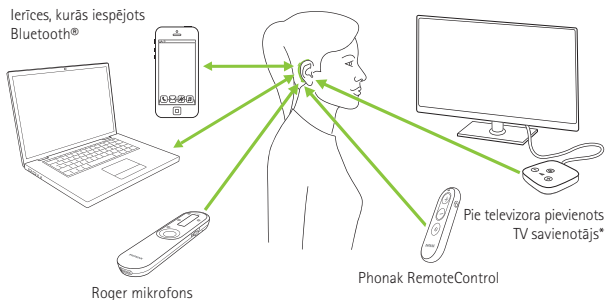

* TV savienotāju var pievienot jebkurai audio avotam, piemēram, televizoram, datoram vai hi-fi (augstas precizitātes) sistēmai.


10. Sākotnējā savienošana pārī

10.1. Sākotnējā savienošana pārī ar ierīci, kurā iespējots Bluetooth®

- ① Ar katru ierīci, kurā iebūvēta bezvadu tehnoloģija Bluetooth®, savienošana pārī ir jāveic tikai vienreiz. Pēc sākotnējās savienošanas pārī dzirdes aparāts automātiski izveidos savienojumu ar ierīci. Sākotnējā savienošana pārī var ilgt līdz 2 minūtēm.

1.
Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē (piemēram, tālrunī) ir iespējota bezvadu tehnoloģija Bluetooth®, un savienojamības iestatījumu izvēlnē meklējiet ierīces, kurās ir iespējots Bluetooth®.

2.
Ieslēdziet abus dzirdes aparātus. Tagad jums 3 minūšu laikā jāsavieno dzirdes aparāti pārī ar ierīci.

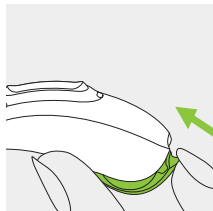

3.

Jūsu ierīcē tiek parādīts to ierīču saraksts, kurās iespējota tehnoloģija Bluetooth®. Atlasiet sarakstā dzirdes aparātu, lai vienlaikus savienotu pārī abus dzirdes aparātus. Savienošanu pārī apstiprina pīkstiens.

① Papildinformāciju par savienošanu pārī, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth® populārākajos tālruņos, skatiet vietnē <https://www.phonak.com/en-int/support>


10.2. Savienojuma izveide ar ierīci

Pēc savienošanas pāri ar jūsu ierīci dzirdes aparāts automātiski izveidos savienojumu vēlreiz, tiklīdz tiks ieslēgts.

- ① Savienojums tiks saglabāts tik ilgi, kamēr ierīce būs ieslēgta un atradīsies uztveršanas diapazonā.
- ① Jūsu dzirdes aparāta savienojumu var izveidot ar ne vairāk kā divām ierīcēm, bet savienot pāri to var ar astoņām ierīcēm.

11. Tālruna zvani

Jūsu dzirdes aparāts tieši savienojas ar tālruniem, kuros iespējota tehnoloģija Bluetooth®. Kad izveidots savienojums ar jūsu tālruni, jūs dzirdēsiet paziņojumus un zvanītāja balsi tieši savos dzirdes aparātos. Tālruna zvani notiek brīvroku režīmā, tas nozīmē, ka jūsu balsi uztver dzirdes aparāta mikrofoni un pārraida uz tālruni.

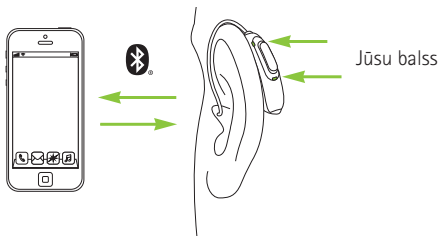

11.1. Zvanīšana

Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet zvana pogu.

Dzirdes aparātā tiks atskaņots zvana signāls.

Dzirdes aparātu mikrofoni uztver jūsu balsi un pārraida to tālrunim.

11.2. Zvana pieņemšana

Saņemot zvanu, dzirdes aparātā tiek atskaņots paziņojums par ienākošo zvanu.

Zvanu var pieņemt, īsi nospiežot uz augšējās vai apakšējās daudzfunkciju pogas dzirdes aparātā (mazāk par 2 sekundēm), vai arī tieši jūsu tālrunī.



11.3. Zvana beigšana

Zvanu var beigt, īsi nospiežot uz augšējās vai apakšējās daudzfunkciju pogas dzirdes aparātā (mazāk par 2 sekundēm), vai arī tieši jūsu tālrunī.



11.4. Zvana noraidīšana

Ienākošo zvanu var noraidīt, ilgi nospiežot uz augšējās vai apakšējās daudzfunkciju pogas dzirdes aparātā (ilgāk par 2 sekundēm), vai arī tieši jūsu tālrunī.



12. Lidmašīnas režīms

Jūsu dzirdes aparāts darbojas frekvences diapazonā 2,4 GHz–2,48 GHz. Daži lidošanas pakalpojumu sniedzēji pieprasa, lai lidošanas laikā visas ierīces tiktu pārslēgtas lidmašīnas režīmā. Pēc pāriešanas lidmašīnas režīmā parastā dzirdes aparāta funkcionalitāte netiks atspējota, bet tiks atspējotas Bluetooth® savienojamības funkcijas.

12.1. Pāreja lidmašīnas režīmā



Lai atspējotu bezvadu funkciju un pārietu lidmašīnas režīmā, katrā dzirdes aparātā veiciet tālāk norādītās darbības:

1.

Atveriet baterijas daļas vāciņu. Informāciju par drošo baterijas daļas vāciņu skatiet 5.2. nodaļā.

2.

Turiet dzirdes aparāta daudzfunkciju pogas apakšējo daļu 7 sekundes un aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.

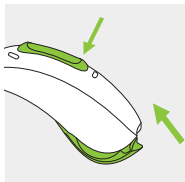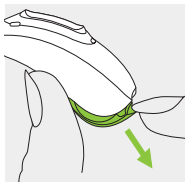


Lidmašīnas režīmā dzirdes aparāts nevar izveidot tiešu savienojumu ar tālruni.

12.2. Iziešana no lidmašīnas režīma

Lai iespējotu bezvadu funkciju un izietu no lidmašīnas režīma, katrā dzirdes aparātā veiciet tālāk norādītās darbības.


1.

Atveriet baterijas daļas vāciņu.
Informāciju par drošo baterijas daļas vāciņu skatiet 5.2. nodaļā.

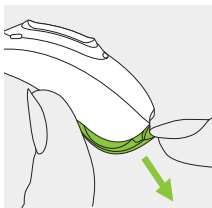

2.

Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.

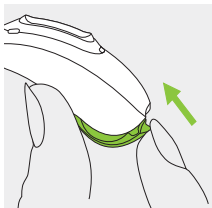

13. myPhonak un myPhonak Junior lietotņu pārskats

Lai uzzinātu vairāk par myPhonak,
apmeklējiet tīmekļa lapu
www.phonak.com/myphonakapp
vai skenējiet QR kodu



Lai instalētu myPhonak, skenējiet QR kodu



Lai saņemtu papildinformāciju par myPhonak
Junior, apmeklējiet lapu
www.phonak.com/junior-ug
vai skenējiet QR kodu



Lai instalētu lietotni myPhonak Junior,
skenējiet QR kodu



14. Roger™ pārskats

Piedzīvojiet skaņas ar Roger™

Roger™ ir intelektiska bezvadu tehnoloģija, kas pārraida runu tieši uz dzirdes aparātiem, palīdzot pārvarēt attāluma un trokšņu radītos šķēršļus. Mikrofons uztver runātāja balsi un bezvadu tīklā pārraida tieši uz Roger™ uztvērējiem* jūsu dzirdes aparātos. Tādējādi varat pilnvērtīgi piedalīties grupu sarunās pat trokšņainā vidē kā restorānī, darba sapulces un skolas aktivitātes.

Lai saņemtu papildinformāciju par Roger™ tehnoloģiju un mikrofoniem, apmeklējiet lapu **www.phonak.com/roger** vai skenējiet QR kodu.



Roger™ mikrofonu jāiegādājas atsevišķi.

*RogerDirect™ ir nepieciešama Roger uztvērēju instalēšana Phonak dzirdes aparātos, ko veic dzirdes speciālists.

15. Klausīšanās publiskās vietās

Jūsu dzirdes aparātam ir telespoles opcija, kas var palīdzēt saklausīt skaņas dažādās sabiedriskās vietās, piemēram, baznīcās, koncertzālēs, vilciena stacijās un pārvaldības ēkās.

Kad redzat šo simbolu, tas nozīmē, ka ir pieejama cilpas sistēma, kas saderīga ar jūsu dzirdes aparātiem. Lūdzu, sazinieties ar dzirdes speciālistu, lai iegūtu papildinformāciju un aktivizētu telespoles funkciju.



Telespoles funkcijas izmantošana

Piekluve jūsu dzirdes speciālista iestatītajai telespoles funkcijai ir iespējama divos veidos.

Tiešā piekluve telespoles programmai ir iespējama, ilgi nospiežot dzirdes aparāta daudzfunkciju pogu.

Telespoles programmai var piekļūt arī ar lietotnes myPhonak vai myPhonak Junior palīdzību. Jums ir jāstāv vai jāsež norādītajā cilpas sistēmas zonā, ko apzīmē oficiālais telespoles simbols.

16. Vides apstākļi

Produkts ir izstrādāts tā, lai darbotos bez problēmām vai ierobežojumiem, ja tiek lietots paredzētajā veidā, ja vien šajā lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi.

Lūdzu, nodrošiniet dzirdes aparāta lietošanu, transportēšanu un glabāšanu atbilstoši tālāk minētajiem nosacījumiem.

	Darbības	Transportēšana	Glabāšana
Temperatūra	No +5 °C līdz +40 °C (no 41 °F līdz 104 °F)	No -20 līdz +60 °C (no -4 ° līdz 140 °F)	No -20 °C līdz +60 °C (no -4 °F līdz 140 °F)
Mitrums (bez kondensāta)	No 0% līdz 85%	No 0% līdz 93%	No 0% līdz 93%
Atmosfēras spiediens	500–1060 hPa	500–1060 hPa	500–1060 hPa

Temperatūras un mitruma vērtības nedrīkst ilgstoši pārsniegt tabulā iepriekš norādītos diapazonus transportēšanas un glabāšanas laikā.

Ja neizmantojat dzirdes aparātu ilgāku laiku, izņemiet bateriju.

Šie dzirdes aparāti ir klasificēti kā IP68 ierīces. Tas nozīmē, ka tie ir ūdensizturīgi, izturīgi pret putekļiem un paredzēti, lai izturētu ikdienas dzīves situācijas. Tos var nēsāt lietū, bet tos nedrīkst pilnībā iegremdēt ūdenī vai lietot, ejot dušā, peldoties vai citās ūdens nodarbībās.

Šos dzirdes aparātus nekādā gadījumā nedrīkst pakļaut hlorēta ūdens, ziepju, sālsūdens vai citu šķidrumu, kas satur ķīmiskas vielas, iedarbībai.

Ja ierīce bijusi pakļauta glabāšanas un transportēšanas apstākļiem ārpus ieteicamajiem lietošanas apstākļiem, pēc ieteicamo vides apstākļu atjaunošanas pagaidiet 15 minūtes un tikai tad iedarbiniet ierīci.

17. Apkope un uzturēšana

Paredzētais kalpošanas laiks:

Dzirdes aparātu paredzētais kalpošanas laiks ir pieci gadi. Tiek prognozēts, ka šajā laikā ierīču lietošana ir droša.

Komerčiālais apkopes periods:

Dzirdes aparātu regulāra un rūpīga apkope veicina izcilu veikspēju ierīču paredzētajā kalpošanas laikā. Sonova AG nodrošina remonta apkopes periodu vismaz piecu gadu garumā pēc atbilstošā dzirdes aparāta un būtisko komponentu izņemšanas no produktu portfeļa. Ievērojiet šeit sniegtos norādījumus. Plašāku informāciju par produkta drošību skatiet 23.2. nodaļā.

Vispārīga informācija

Pirms matu lakas vai kosmētikas lietošanas dzirdes aparāts ir jāizņem no auss, jo šie produkti var to sabojāt.

Kad neizmantojat dzirdes aparātu, atstājiet baterijas daļas vāciņu atvērtu, lai mitrums varētu iztvaikot. Pēc lietošanas obligāti pilnībā izžāvējiet dzirdes aparātu. Glabājiet dzirdes aparātu drošā, sausā un tīrā vietā.

Jūsu dzirdes aparāts ir ūdensizturīgs, un tam nekaitē sviedri un putekļi, ja tiek ievēroti tālāk norādītie nosacījumi.

- Baterijas daļas vāciņš ir pilnīgi aizvērts. Nodrošiniet, lai, baterijas daļas vāciņu aizverot, tajā neieķertos kāds svešķermenis, piemēram, mats.
- Pēc saskares ar ūdeni, sviedriem vai putekļiem dzirdes aparāts tiek notīrīts un izžāvēts.
- Dzirdes aparāts tiek lietots un kopts atbilstoši šai lietošanas instrukcijai.

❶ Dzirdes aparāta lietošana ūdens tuvumā var ierobežot gaisa plūsmas piekļuvi baterijai un tādējādi apturēt tās darbību. Ja dzirdes aparāts pārstāj darboties pēc saskares ar ūdeni, novērsiet problēmu, veicot 22. nodaļā minētās darbības.

Katru dienu

Pārbaudiet, vai ieliktnī un caurulītē nav sakrājis auss sērs un mitrums. Notīriet virsmas ar bezplūksnu drāniņu. Dzirdes aparāta tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, piemēram, sadzīves mazgāšanas līdzekļus, ziepes utt. Nav ieteicams skalot aparāta daļas ar ūdeni, jo caurulītē var palikt mitrums. Ja nepieciešama dzirdes aparāta intensīva tīrīšana, ieteikumus vaicājiēt savam dzirdes speciālistam.

Katru nedēļu

Notīriet auss ieliktni ar mīkstu, mitru drāniņu vai ar īpaši dzirdes aparātu tīrīšanai paredzētu salveti. Lai iegūtu plašākas instrukcijas par apkopi vai informāciju par intensīvāku tīrīšanu, apmeklējiet savu dzirdes speciālistu.

Katru mēnesi

Pārbaudiet, vai nav mainījusies skaņas šļauciņas krāsa un vai nav radušies sacietējumi vai plaisas. Šādu izmaiņu gadījumā skaņas šļauciņa ir jānomaina. Vērsieties pie sava dzirdes speciālista.

18. Auss ieliktņa nomaiņa

Regulāri pārbaudiet un nomainiet vai notīriet auss ieliktni, ja tas izskatās netīrs vai ja pasliktinās dzirdes aparāta skaļums vai skaņas kvalitāte.

19. Remonts un garantija

Vietējā garantija

Par vietējās garantijas nosacījumiem jautājiēt dzirdes speciālistam, pie kura iegādājāties dzirdes aparātus.

Starptautiskā garantija

Sonova AG nodrošina ierobežotu starptautisko garantiju, kas ir spēkā vienu gadu, sākot ar iegādes datumu. Šī ierobežotā garantija attiecas uz dzirdes aparāta ražošanas un materiālu defektiem, bet ne uz piederumu (piemēram, bateriju, caurulīšu, auss ieliktņu, ārējo uztvērēju) defektiem. Garantija ir derīga tikai tad, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments.

Starptautiskā garantija neietekmē jūsu likumīgās tiesības, kas var būt noteiktas piemērojamos valsts tiesību aktos attiecībā uz patēriņa preču pārdošanu.

Garantijas ierobežojums

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai apiešanās, saskares ar ķīmikālijām vai pārmērīgas slodzes dēļ.

Trešo personu vai nepilnvarotu servisa centru radītu bojājumu gadījumā garantija vairs nav spēkā. Šī garantija neattiecas ne uz kādiem dzirdes speciālista pakalpojumiem, kas sniegti viņa darbvietā.

Sērijas numurs (kreisās auss ierīce):

Sērijas numurs (labās auss ierīce):

Iegādes datums:

Pilnvarotais dzirdes speciālists (zīmogs/paraksts):

20. Informācija par atbilstību

Eiropa:

Dzirdes aparāta atbilstības deklarācija

Ar šo Sonova AG apliecina, ka šis produkts atbilst medicīnas ierīču regulas (ES) 2017/745, kā arī radio aprīkojuma direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilnu ES atbilstības deklarācijas tekstu var saņemt no ražotāja vai vietējā Phonak pārstāvja, kura adrese ir norādīta vietnē **www.phonak.com/en-int/certificates** (Phonak atrašanās vietas visā pasaulē).

Austrālija/Jaunzēlande:



R-NZ

Norāda, ka ierīce atbilst attiecīgajām Radiofrekvenču spektra pārvaldības (RSM) un Austrālijas Komunikāciju un mediju pārvaldes (ACMA) normatīvajām prasībām, lai to drīkstētu pārdot Jaunzēlandē un Austrālijā. Atbilstības etiķete R-NZ ir paredzēta radioierīču produktiem, kas tiek piegādāti Jaunzēlandes tirgū saskaņā ar atbilstības līmeņa A1 prasībām.

2. lappusē norādītie bezvadu modeļi ir sertificēti:

Phonak Naída L-UP (L90/L70/L50/L30)

Phonak Naída L-UP Trial

ASV

FCC ID: KWC-BPZ

Kanādas

IC: 2262A-BPZ

1. piezīme.

Šī ierīce atbilst Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission – FCC) noteikumu 15. daļai un Kanādas Rūpniecības departamenta standartam RSS-210. Uz ekspluatāciju attiecas šādi divi nosacījumi:

- 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt bīstamus traucējumus;
- 2) šai ierīcei ir jāiztur visi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

2. piezīme.

Ja ir veiktas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidošana, ko nav tieši apstiprinājis uzņēmums Sonova AG, FCC sniegtā šīs ierīces ekspluatācijas atļauja var tikt anulēta.

3. piezīme.

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces prasībām, ko nosaka FCC noteikumu 15. daļa un Kanādas Rūpniecības departamenta standarts ICES-003.

Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt nopietnus radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar

garantēt, ka noteiktos apstākļos traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce izraisa nopietnus radio vai televīzijas signālu uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst radušos traucējumus, veicot vismaz vienu no tālāk norādītajiem pasākumiem.

- Uztveršanas antenas virziena vai atrašanās vietas maiņa.
- Attāluma palielināšana starp ierīci un uztvērēju.
- Ierīces pievienošana citai strāvas kontaktligzdai, kas nav ķēdē, kurai pievienots uztvērējs.
- Sazināšanās ar tirdzniecības pārstāvi vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

Informācija par dzirdes aparāta radio frekvencēm

Antenas veids	Rezonanses cilpas antena
Darbības frekvence	2,4–2,48 GHz
Modulācija	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Izstarotā jauda (EIRP)	< 1 mW

Bluetooth®

Diapazons	~1 m
Bluetooth®	4.2. Dual režīms
Atbalstītie profili	HFP (bezroku profils), A2DP

Emisiju tests	Atbilstība	Elektromagnētiskās vides norādījumi
RF emisijas CISPR 11	2. grupa B klase	Medicīnas ierīce izmanto RF enerģiju tikai iekšējai funkcijai. Tādējādi RF emisijas ir ļoti mazas un visdrīzāk neradīs traucējumus tuvumā esošajam elektroniskajam aprīkojumam
Harmoniskās emisijas	Atbilst	
Sprieguma svārstības/ mirgošanas emisijas	Atbilst	

Elektromagnētiskā saderība (EMC)

Phonak dzirdes aparātiem ir veiktas EMC pārbaudes saskaņā ar prasībām, kas noteiktas standartā IEC 60601-1-2:2014 vai IEC 60601-1-2:2014 A1 2020.

21. Informācija par simboliem un to apraksti



Ar CE simbolu Sonova AG apliecina, ka šis produkts – ieskaitot piederumus – atbilst Medicīnas ierīču regulas (ES) 2017/745, kā arī Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES prasībām. Aiz CE simbola norādītie cipari atbilst to sertificēto iestāžu kodam, ar kurām notika konsultācijas saskaņā ar iepriekšminēto regulu un direktīvu.



Šis simbols norāda, ka šajā lietotāja instrukcijā raksturotie produkti atbilst standarta EN 60601-1 prasībām, kas attiecas uz B tipa pacientam izmantojamo daļu. Dzirdes aparāta virsma ir norādīta kā B tipa ierīces izmantojamā daļa.



Norāda medicīnas ierīces ražotāju saskaņā ar ES Regulu par medicīnas ierīcēm (ES) 2017/745.



Norāda medicīnas ierīces izgatavošanas datumu.



Norāda pilnvaroto pārstāvi Eiropas Kopienā.
EC REP arī importē preces Eiropas Savienībā.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi izlasīt un ievērot attiecīgo informāciju, kas sniegta šajā lietošanas instrukcijā.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi pievērst uzmanību attiecīgajiem šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem brīdinājumu ziņojumiem.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir svarīgi pievērst uzmanību attiecīgajiem šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem brīdinājumu ziņojumiem



Svarīga informācija par lietošanu un produkta drošumu.



Šis simbols norāda, ka ierīces radītie elektromagnētiskie traucējumi nesasniedz ASV Federālās sakaru komisijas apstiprinātās robežvērtības.



Norāda, ka ierīce atbilst attiecīgajām Radiofrekvenču spektra pārvaldības (RSM) un Austrālijas Komunikāciju un mediju pārvaldes (ACMA) normatīvajām prasībām, lai to drīkstētu pārdot Jaunzēlandē un Austrālijā.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda Sonova AG šādu zīmju lietošana ir saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.



Japānas zīme, ko piešķir sertificētam radioaprikojumam.



Norāda ražotāja sērijas numuru, lai varētu identificēt konkrētu medicīnas ierīci.



Norāda ražotāja kataloga numuru, lai varētu identificēt šo medicīnas ierīci.



Norāda, ka ierīce ir medicīnas ierīce.



Šis simbols norāda, ka ir pieejamas elektroniskās lietošanas instrukcijas.

IP68

Apvalka aizsardzības pakāpes kods. IP68 kods norāda, ka dzirdes aparāts ir ūdensizturīgs un izturīgs pret putekļiem. Tas ir izturējis nepārtrauktu iegremdēšanu 1 metru dziļā saldūdenī 60 minūtes un ievietošanu putekļu kamerā 8 stundas atbilstoši standarta IEC60529 prasībām.



Norāda temperatūras robežvērtības, līdz kādām var droši pakļaut medicīnas ierīci.



Norāda mitruma diapazonu, kādam var droši pakļaut medicīnas ierīci.



Norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kādam var droši pakļaut medicīnas ierīci.



Transportēšanas laikā sargājiet no mitruma.



Pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols ir paredzēts informēšanai, ka šo dzirdes aparātu un baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Vecus vai nelietotus dzirdes aparātus utilizējiet elektropreču atkritumu savākšanas vietās vai atdodiet dzirdes aparātu utilizācijai savam dzirdes speciālistam. Pareizi atbrīvojoties, tiek saudzēta apkārtējā vide un veselība.

22. Problēmu novēršana

Problēma	Cēloņi
Dzirdes aparāts "svilpj"	Dzirdes aparāts nav pareizi ievietots ausī Auss kanālā ir ausu sērs
Dzirdes aparāts ir pārāk skaļš	Skaļums ir pārāk liels
Dzirdes aparāta skaļums nav pietiekams, vai skaņa ir kropļota	Skaļums ir pārāk mazs Zems baterijas uzlādes līmenis Auss ieliktnis bloķēts Ir mainījusies dzirde
Dzirdes aparāts atskaņo divus pīkstienus	Liecina par zemu baterijas uzlādes līmeni
Dzirdes aparāts nedarbojas (nav skaņas pastiprinājuma)	Auss ieliktnis bloķēts Dzirdes aparāts ir izslēgts Baterija pilnībā izlādējusies
Dzirdes aparātu nevar ieslēgt	Baterija pilnībā izlādējusies
Tālruņa zvana funkcija nedarbojas	Dzirdes aparāts darbojas lidmašīnas režīmā Dzirdes aparāts nav savienots pāri ar tālruni

❗ Ja problēma joprojām pastāv, lūdziet palīdzību savam dzirdes speciālistam.

Papildinformāciju skatiet vietnē <https://www.phonak.com/en-int/support>.

Veicamās darbības

Ievietojiet dzirdes aparātu pareizi (6. nodaļa)

Sazinieties ar savu dzirdes speciālistu

Samaziniet skaļumu, ja skaļuma regulēšana ir pieejama (8. nodaļa)

Palieliniet skaļumu, ja skaļuma regulēšana ir pieejama (8. nodaļa)

Nomainiet bateriju (5. nodaļa)

Notīriet auss ieliktni (17. nodaļa)

Sazinieties ar savu dzirdes speciālistu

Nomainiet bateriju nākamo 60 minūšu laikā (5. nodaļa)

Notīriet auss ieliktni (17. nodaļa)

Nospiediet daudzfunkciju pogas apakšējo daļu 3 sekundes (8. nodaļa)

Nomainiet bateriju (5. nodaļa)

Nomainiet bateriju (5. nodaļa)

Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet dzirdes aparātu (12.2. nodaļa)

Savienojiet ierīci pārī ar tālruni (10. nodaļa)

23. Svarīga drošības informācija

Lūdzu, izlasiet attiecīgo drošības informāciju un informāciju par lietošanas ierobežojumu turpmākajās lappusēs, pirms izmantot dzirdes aparātu.

Paredzētais lietojums

Dzirdes aparāts ir paredzēts, lai pastiprinātu un pārraidītu skaņu uz ausi, kompensējot dzirdes traucējumus.

Paredzētais lietotājs:

Paredzēts šādiem lietotājiem:

- Cilvēki ar vājdzirdību
- Vājdzirdīga cilvēka aprūpētāji
- Dzirdes speciālists, kurš atbildīgs par dzirdes aparāta regulēšanu

Paredzētā medicīniskā indikācija

Vājdzirdība:

- Vienpusēja vai abpusēja
- Vājdzirdības veids: konduktīva, sensoneirāla vai jaukta
- Vājdzirdības pakāpes:
 - Izteikta
 - Smaga

Medicīniskās kontrindikācijas

Dzirdes aparātu lietošanas medicīniskās kontrindikācijas:

- Auss deformācija (respektīvi, bloķēts auss kanāls, ārējās auss neesamība)
- Neirāla vājdzirdība (retrokohleāras patoloģijas, piemēram, neesošs/nefunkcionējošs dzirdes nervs)
- Aktīvas vai hroniskas vidusauss vai ārējās auss patoloģijas, hroniskas drenāžas vai izdalījumu pazīmes, hroniska iekaisuma pazīmes

Paredzētā pacientu populācija

Šī ierīce ir paredzēta pacientiem no 3 gadu vecuma, kuri atbilst šī produkta klīniskajām indikācijām.

Klīniskie ieguvumi:

Uzlabojumi runas uztveršanā

Blakusparādības:

Fizioloģiskas dzirdes aparātu blakusparādības kā tinīts, reibonis, sāra uzkrāšanās, pārāk liels spiediens, svīšana vai mitrums, tulznas, nieze un/vai apsārtums, pilnuma sajūta un

to sekas, piemēram, galvassāpes un/vai sāpes ausīs, var novērst vai samazināt jūsu dzirdes aprūpes speciālists. Tradicionālie dzirdes aparāti potenciāli var pakļaut pacientus augstākiem skaņas iedarbības līmeņiem, izraisot nobīdes frekvencēs, ko ietekmē dzirdes trauma.

Primārie kritēriji, lai pacientu nosūtītu pie medicīnas vai cita speciālista diagnozes un/vai ārstēšanas noteikšanai, ir šādi:

- Redzama auss iedzimta vai traumatiska deformācija;
- Aktīvi izdalījumi no auss iepriekšējo 90 dienu laikā;
- Pēkšņa vai strauji progresējoša vājdzirdība vienā vai abās ausīs iepriekšējo 90 dienu laikā;
- Akūts vai hronisks reibonis;
- Audiometriskā gaisa-kaula sprauga, kas līdzvērtīga vai lielāka par 15 dB pie 500 Hz, 1000 Hz un 2000 Hz;
- Redzama ievērojama sēra uzkrāšanās vai svešķermenis auss kanālā;

- Sāpes vai diskomforts ausī;
- Anormāls bungplēvītes un auss kanāla izskats, piemēram:
 - Ārējās auss ejas iekaisums
 - Caurdurta bungplēvīte
 - Citas anomālijas, ko dzirdes speciālists uzskata par medicīniski nozīmīgām

Īpaši rūpīgi jāveic dzirdes aparāta izvēle un uzstādīšana, ja maksimālais skaņas spiediena līmenis pārsniedz 132 decibelus (dB), jo pastāv risks papildus negatīvi ietekmēt dzirdes aparāta lietotāja dzirdi. (Šis nosacījums attiecas tikai uz tiem dzirdes aparātiem, kuru maksimālais skaņas līmenis pārsniedz 132 dB).

Dzirdes speciālists var izlemt, ka nosūtījums nav piemērots pacientam vai nav tā interesēs, šādos gadījumos:

- Ja ir zināms, ka pacienta stāvokli ir pilnībā izmeklējis ārsts un pacientam ir sniegta ārstēšana.
- Ja pacienta stāvoklis nav pasliktinājies vai būtiski mainījies kopš iepriekšējās izmeklēšanas un/vai ārstēšanas.

Ja pacients ir sniedzis pamatotu un kompetentu lēmumu nepiekrīst ārsta apmeklējumam, ir pieļaujams turpināt ar atbilstoša dzirdes aparāta sistēmas ieteikšanu, ņemot vērā šos apsvērumus:

- Ieteikumam nebūs kaitīga ietekme uz pacienta veselību vai labsajūtu;
- Pacienta veselības vēsture apstiprina, ka veikti visi nepieciešamie apsvērumi pacienta labākajās interesēs.

Ja tas ir juridiski nepieciešams, pacients ir parakstījis atrunu, lai apliecinātu, ka ieteikums vērsties pie ārsta ir noraidīts un ir pieņemts pārdomāts lēmums.

Dzirdes aparāts ir piemērots veselības aprūpei mājās, kā arī tā pārnesamības dēļ to var izmantot profesionālās veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu praksēs, zobārstniecības praksēs utt.

Dzirdes aparāts neatjaunos normālu dzirdi, kā arī nenovērsīs un nemazinās dabisku apstākļu izraisītus dzirdes traucējumus. Neregulāra dzirdes aparāta lietošana liedz lietotājam izmantot visas tā sniegtās priekšrocības. Dzirdes aparāta lietošana ir tikai daļa no dzirdes habilitācijas, un, iespējams, ir nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, jāveic dzirdes treniņš un jāapgūst lasīšana no lūpām.

Atbalsi, sliktu skaņas kvalitāti, pārāk skaļas vai pārāk klusas skaņas, neatbilstošu stiprinājumu vai problēmas ar gremošanu vai norīšanu var novērst vai uzlabot precīzas pielāgošanas laikā, ko veic jūsu dzirdes aprūpes speciālists.

Par ikvienu nopietnu starpgadījumu, kas noticis saistībā ar dzirdes aparātu, jāziņo ražotāja pārstāvim un atbildīgajai mītnes valsts iestādei. Par nopietnu starpgadījumu tiek uzskatīts ikviens starpgadījums, kas tieši vai netieši izraisījis, varētu būt izraisījis vai varētu izraisīt kādu no šiem faktoriem:

- a) pacienta, lietotāja vai citas personas nāve;
- b) pacienta, lietotāja vai citas personas veselības stāvokļa īslaicīga vai neatgriezeniska nopietna pasliktināšanās;
- c) nopietns sabiedriskās veselības apdraudējums.

Lai ziņotu par neparedzētu darbību vai notikumu, sazinieties ar ražotāju vai pārstāvi.

23.1. Brīdinājumi par apdraudējumu

-  Jūsu dzirdes aparāti darbojas frekvences diapazonā 2,4 GHz–2,48 GHz. Ja nepieciešams lidot, pārbaudiet, vai lidojumu pakalpojumu sniedzējs pieprasa pārslēgt ierīces lidmašīnas režīmā (skatīt 12. nodaļu).
-  Dzirdes aparātus, kas īpaši ieprogrammēti konkrētam vārdzirdības gadījumam, drīkst lietot tikai tā persona, kurai tie paredzēti. Citas personas tos nedrīkst lietot; pretējā gadījumā var rasties dzirdes bojājumi.
-  Aizliegts veikt dzirdes aparāta izmaiņas vai pārveidošanu, ja tās nav nepārprotami apstiprinājis uzņēmums Sonova AG. Šādas izmaiņas var radīt auss vai dzirdes aparāta bojājumus.
-  Nelietojiet dzirdes aparātu sprādzienbīstamās vietās (raktuvēs vai rūpnieciskās teritorijās, kur pastāv sprādziena risks, ar skābekli piesātinātā vidē vai vietās, kur tiek lietoti uzliesmojoši anestēzijas līdzekļi). Ierīcei nav ATEX sertifikāta.
-  Ja jūtat sāpes ausī vai aiz tās, ja auss ir iekaisusi vai rodas ādas kairinājums un pastiprināti izdalās ausu sērs, sazinieties ar savu dzirdes speciālistu vai ārstu.

 Dzirdes programmas virzienveida mikrofona režīmā samazina fona trokšņus. Nemiet vērā, ka brīdinājuma signāli vai skaņas, kuru avots ir aizmugurē (piemēram, automašīnu radītais troksnis), tiek daļēji vai pilnībā apslāpētas.

 Šis dzirdes aparāts nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Šīs ierīces lietošana bērniem un personām ar kognitīviem traucējumiem ir pastāvīgi jāuzrauga, lai garantētu šo personu drošumu. Dzirdes aparāts ir maza ierīce, un tajā ietilpst mazas detaļas. Neatstājiet bez uzraudzības bērnus un personas ar kognitīviem traucējumiem ar šo dzirdes aparātu. Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, jo dzirdes aparāts vai tā daļas var izraisīt aizrīšanos.


 **BRĪDINĀJUMS!** Šīs baterijas ir bīstamas un var izraisīt smagas traumas, ja tiek norītas vai nokļūst kādā ķermeņa daļā, neatkarīgi no tā, vai baterija ir lietota vai jauna. Glabājiet vietā, kur tām nevar piekļūt bērni, cilvēki ar kognitīviem traucējumiem vai mājdzīvnieki. Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir norīta vai nokļuvusi kādā ķermeņa daļā, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

 Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz personām, kurām ir funkcionējošas implantējamās medicīniskās ierīces (piemēram, elektrokardiostimulatori, defibrilatori utt.).

- Turiet dzirdes aparātu vismaz 15 cm (6 collu) attālumā no funkcionējošā implanta. Ja rodas jebkādi traucējumi, neizmantojiet dzirdes aparātus un sazinieties ar funkcionējošā implanta ražotāju. Ņemiet vērā, ka traucējumus var radīt arī elektroapgādes līnijas, elektrostatiskā izlāde, lidostu metāla detektori utt.
- Turiet magnētus (piemēram, baterijas nodalījuma rīku, EasyPhone magnētu utt.) vismaz 15 cm (6 collu) attālumā no implanta, kas darbojas.

 Citu piederumu, pārveidotāju un kabeļu lietošana (neattiecas uz šī aprīkojuma ražotāja norādītajiem un nodrošinātajiem piederumiem) var palielināt elektromagnētisko emisiju vai samazināt šī aprīkojuma elektromagnētisko noturību un galu galā izraisīt nepareizu darbību.

-  Pārnēsājamo RF sakaru aprīkojumu (tostarp perifērās ierīces, piemēram, antenu kabelus un ārējās antenas) nedrīkst lietot tuvāk par 30 cm (12 collām) no dzirdes aparātu daļām, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma darbība.
-  Ja nēsājat dzirdes aparātu ar pielāgotu auss ieliktni, gādāiet par to, lai auss nesaņemtu spēcīgus fiziskus triecienus. Paredzēts, ka pielāgoti auss ieliktni saglabā stabilitāti standarta lietošanas apstākļos. Ausij saņemot spēcīgu fizisku triecienu (piemēram, nodarbojoties ar sportu), pielāgotais auss ieliktnis var salūzt. Tas var izraisīt auss kanāla vai bungplēvītes pārduršanu.
-  Ja dzirdes aparāts ir ticis pakļauts mehāniskai slodzei vai triecienam, pirms dzirdes aparāta ievietošanas ausī pārliecinieties, vai tā korpuss nav bojāts.
-  Šī aprīkojuma izmantošana blakus citam aprīkojumam vai kopā ar to nav ieteicama, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja šāda izmantošana ir nepieciešama, šis un cits aprīkojums ir jānovēro, lai pārliecinātos par normālu darbību.

⚠ Lielākajai daļai dzirdes aparātu lietotāju ir tāda vārdzirdība, kuras gadījumā netiek prognozēta dzirdes pasliktināšanās, regulāri izmantojot dzirdes aparātu ikdienas situācijās. Tikai nelielai dzirdes aparātu lietotāju ar vārdzirdību pastāv dzirdes pavājināšanās risks pēc ilga lietošanas perioda.

⚠ Dzirdes aparātus nevajadzētu aprīkot ar kapsulām/ausu sēra novēršanas sistēmām, ja tos lieto pacienti, kam ir caurdurta bungplēvīte, iekaisis auss kanāls vai vidusauss ir neaizsargāta kādā citā veidā. Šādos gadījumos ieteicams izmantot klasisko auss ieliktni. Ja auss ieliktnis auss kanālā tomēr ir iestrēdzis, ieteicams vērsties pie ārsta, lai to droši izņemtu.

⚠ Ļoti retos gadījumos pēc dzirdes aparāta izņemšanas no auss, ja auss uzgalis nav droši nostiprināts, tas vai tā daļa var palikt auss kanālā. Ja šādas daļas tomēr iestrēgst auss kanālā, ir noteikti ieteicams vērsties pie ārsta, lai to droši izņemtu.

23.2. Informācija par produkta drošumu

- ① Šie dzirdes aparāti ir ūdensizturīgi, bet ne ūdensdroši. Tie izturēs lietošanu ikdienišķās darbībās un īslaicīgu nejaušu nonākšanu ekstremālos apstākļos. Nekādā gadījumā neiegremdējiet dzirdes aparātu ūdenī! Šie dzirdes aparāti nav domāti ilgstošai un atkārtotai iegremdēšanai ūdenī, piemēram, peldoties vai mazgājoties. Pirms šādām darbībām vienmēr noņemiet dzirdes aparātu, jo tajā ir jutīgas elektroniskās daļas.
- ① Nekādā gadījumā nemazgājiet mikroфона ieejas. Pretējā gadījumā tas var zaudēt savas īpašās akustiskās īpašības.
- ① Sargājiet dzirdes aparātu no karstuma un saules gaismas iedarbības (nekad neatstājiet to pie loga vai automašīnā). Dzirdes aparāta žāvēšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikroviļņu ierīces vai citas sildierīces. Informāciju par piemērotām žāvēšanas metodēm lūdziet savam dzirdes speciālistam.

- ① Kad neizmantojat dzirdes aparātu, atstājiet baterijas daļas vāciņu atvērtu, lai mitrums varētu iztvaikot. Pēc lietošanas obligāti pilnībā izžāvējiet dzirdes aparātu. Glabājiet dzirdes aparātu drošā, sausā un tīrā vietā.
- ① Dzirdes aparātu nedrīkst nomest! Nokrītot uz cietas virsmas, dzirdes aparāts var tikt sabojāts.
- ① Dzirdes aparātam vienmēr lietojiet jaunas baterijas. Ja ir radusies baterijas noplūde, nekavējoties nomainiet to pret jaunu, lai novērstu ādas iekaisumu. Izlietotās baterijas varat atdot savam dzirdes speciālistam.
- ① Ja neizmantojat dzirdes aparātu ilgāku laiku, izņemiet bateriju.

- ① Speciāla medicīniskā vai stomatoloģiskā pārbaude, kurā tiek izmantots tālāk aprakstītais starojums, var negatīvi ietekmēt pareizu dzirdes aparātu darbību. Izņemiet un atstājiet tos citā telpā/vietā pirms tālāk norādīto pārbaudžu veikšanas.
 - Medicīniskās vai stomatoloģiskās rentgenoloģiskās pārbaudes (arī datortomogrāfija).
 - Medicīniskās pārbaudes, veicot MRI/NMRI skenēšanu, kas rada magnētiskos laukus.Dzirdes aparāti nav jāizņem, dodoties cauri drošības kontroles skenerim (lidostā utt.). Ja arī tajā tiek lietoti rentgenstari, to jauda ir tik niecīga, ka neietekmē dzirdes aparātu darbību.
- ① Neizmantojiet dzirdes aparātu vietās, kur aizliegts izmantot elektronisko aprīkojumu.
- ① Kapsula ir jāmaina ik pēc trīs mēnešiem vai tiklīdz tā kļūst cieta vai trausla. Tas nepieciešams, lai novērstu kapsulas atvienošanos no caurulītes gala, ieliktni ievietojot ausī vai izņemot no tās.
- ① Ja dzirdes aparātu ilgstoši neizmantojat, glabājiet to kārbā ar žāvēšanas kapsulu vai vietā ar pietiekamu ventilāciju. Tādējādi mitrums var iztvaikot no dzirdes aparāta, kā arī tiek novērsta iespējama ietekme uz tā veiktspēju.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Jūsu dzirdes speciālists:



EC	REP
----	-----

Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Strasse 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Vācija



Ražotājs:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Šveice

www.phonak.com

029-1306-91/V1.00/2023-05/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

CE
0459

