

Phonak RemoteControl

Návod na použitie



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Vitajte

Blahoželáme vám k výberu zariadenia Phonak RemoteControl!

Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste úplne porozumeli diaľkovému ovládaniu a naplno ho využili.

Ďalšie informácie o vlastnostiach a výhodách vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov alebo zástupca výrobcu.



Informácie o kompatibilite:

O kompatibilite s vaším načúvacím prístrojom sa poraďte s vaším poskytovateľom načúvacích prístrojov.

Phonak – life is on
www.phonak.com




Značka CE udelená: 2020

Obsah

1. Popis	6	5. Riešenie problémov	14
2. Použitie zariadenia Phonak RemoteControl	7	6. Informácie o zhode	16
2.1 Aktivácia zariadenia Phonak RemoteControl	7	7. Informácie o symboloch a ich popis	24
2.2 Zapnutie/vypnutie	7	8. Dôležité bezpečnostné informácie	28
2.3 Prehľad svetelnej indikácie	7	8.1 Upozornenia na riziká	28
2.4 Párovanie zariadenia Phonak RemoteControl s načúvacími prístrojmi	8	8.2 Informácie o bezpečnosti výrobku	31
2.5 Zmena hlasitosti načúvacieho prístroja	10	8.3 Ďalšie dôležité informácie	33
2.6 Zmena programu načúvacieho prístroja	10	9. Starostlivosť a údržba	34
3. Vloženie novej batérie	11	10. Servis a záruka	35
3.1 Otvorte priehradku pre batériu	11	10.1 Platnosť záruky	35
3.2 Vyberte batériu z priehradky pre batériu	11	10.2 Medzinárodná garancia	35
3.3 Vložte novú batériu	11	10.3 Obmedzenie záruky	36
3.4 Zatvorte priehradku pre batériu	12		
4. Resetovanie zariadenia Phonak RemoteControl	13		

1. Popis


So zariadením Phonak RemoteControl môžete zmeniť program a hlasitosť svojich načúvacích prístrojov.

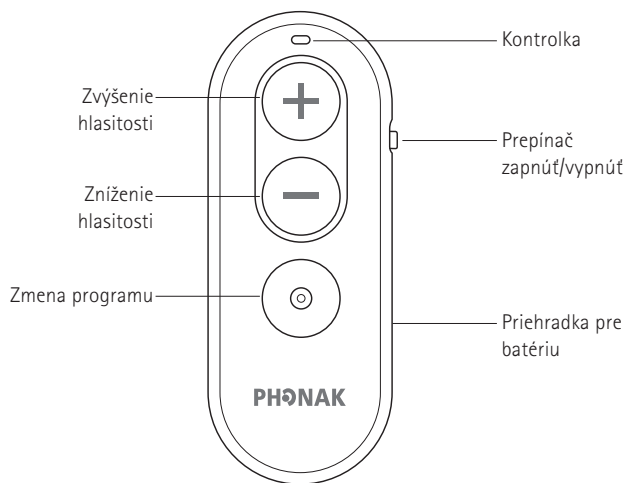

2. Použitie zariadenia Phonak RemoteControl


2.1 Aktivácia zariadenia Phonak RemoteControl

Na aktiváciu zariadenia Phonak RemoteControl vyberte ochranný štítok batérie.

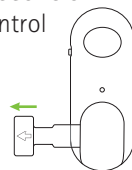

2.2 Zapnutie/vypnutie

Zariadenie zapnite alebo vypnite pomocou prepínača.

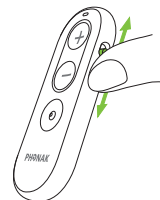

2.3 Prehľad svetelnej indikácie

Svieti nazeleno 3 sekundy		Zapnuté, pripravené na použitie
Bliká namodro		Režim párovania
Svieti nazeleno 5 sekúnd		Spárovanie bolo úspešné
Svieti načerveno 5 sekúnd		Spárovanie zlyhalo
Svieti nazeleno 1 sekundu		Potvrdenie stlačenia tlačidla
Svieti naoranžovo		Výstraha pre batériu
Svieti načerveno		Všeobecná chyba zariadenia
Svieti nazeleno 3 sekundy		Resetovanie bolo úspešné


2.4 Párovanie zariadenia Phonak RemoteControl s načúvacími prístrojmi

Ak chcete používať zariadenie Phonak RemoteControl so svojimi načúvacími prístrojmi, spárujte ich podľa tohto návodu.

① Ideálne párovanie dosiahnete vtedy, keď budete v blízkosti čo najmenšieho počtu iných zariadení s Bluetooth.

① Postup spárovania svojich načúvacích prístrojov stačí vykonať len raz. Po prvom spárovaní sa zariadenie Phonak RemoteControl automaticky pripojí k vašim načúvacím prístrojom.

1. Načúvacie prístroje vypnite a potom ich znova zapnite. Týmto sa prepnú do režimu párovania na dobu až 3 minúty. Položte ich na povrch tak, aby boli vo vzdialenosti 15 cm od zariadenia Phonak RemoteControl.
2. Uistite sa, že je zariadenie Phonak RemoteControl vypnuté.
3. Na zariadení Phonak Remote Control stlačte a podržte tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti „+“, čím ho zapnete.

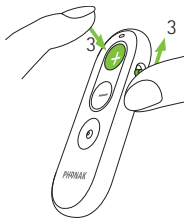

4. Keď svetelná kontrolka začne blikať namodro, uvoľnite tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti „+“. To znamená, že zariadenie Phonak RemoteControl je teraz v režime párovania.
5. Zariadenie Phonak RemoteControl a vaše načúvacie prístroje sa teraz automaticky spárujú.
6. Po úspešnom spárovaní bude kontrolka po dobu 5 sekúnd svietiť nazeleno. Teraz môžete vaše zariadenie Phonak RemoteControl používať.

① Ak kontrolka znova začne blikať namodro a používate dva načúvacie prístroje: zariadenie Phonak RemoteControl je stále v režime párovania a pokúša sa spárovať s druhým načúvacím prístrojom. Po úspešnom spárovaní bude kontrolka po dobu 5 sekúnd svietiť nazeleno. Teraz môžete vaše zariadenie Phonak RemoteControl používať.

① Ak kontrolka začne blikať namodro a používate iba jeden načúvací prístroj: na zariadení Phonak Remote Control stlačte tlačidlo pre zníženie hlasitosti „-“ a manuálne opustíte režim párovania.

① Ak sa párovanie nepodarí, vyhľadajte možné riešenie v časti Riešenie problémov (kapitola 5).

2.5 Zmena hlasitosti načúvacieho prístroja

Stlačením „+“ zvýšite hlasitosť

Stlačením „-“ znížite hlasitosť



2.6 Zmena programu načúvacieho prístroja

Každým stlačením prepínača programov (tlačidla) sa vaše načúvacie prístroje prepnú na ďalší dostupný program.

Stlačením zmeníte program načúvacieho prístroja




❶ V závislosti od konfigurácie vášho načúvacieho prístroja môžu načúvacie prístroje pri potvrdení výberu pípať.

❷ Zmeny sa použijú naraz pre oba načúvacie prístroje.


❸ Ak chcete získať informácie o vašich osobných nastaveniach, požiadajte vášho poskytovateľa načúvacích prístrojov, aby vám vytlačil pokyny k zariadeniu Phonak RemoteControl.

3. Vloženie novej batérie


3.1 Otvorte priehradku pre batériu

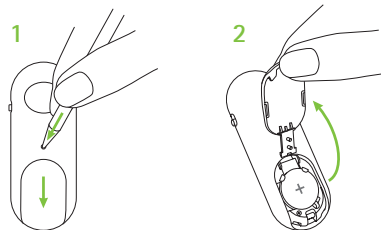

3.2 Vyberte batériu z priehradky pre batériu

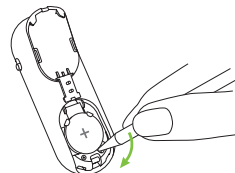


3.3 Vložte novú batériu

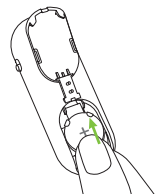

❶ Zariadenie Phonak RemoteControl si vyžaduje lítiovú gombíkovú batériu (CR2032).

3.4 Zatvorte priehradku pre batériu

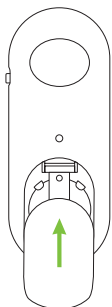

- ❗ Batérie uchovávajúte mimo dosahu detí, mentálne postihnutých osôb a domácich zvierat.
- Toto zariadenie používa lítiovú gombíkovú batériu. Tieto batérie sú pri prehltnutí veľmi nebezpečné. Prehltnutie môže do 2 hodín spôsobiť vážne zranenie alebo smrť z dôvodu chemického popálenia a potenciálnej perforácii pažeráka.
 - V prípade podozrenia na prehltnutie batérie okamžite a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!
 - Po výmene batérie sa uistite, že priehradka pre batériu zariadenia je bezpečne uzatvorená. Použitú batériu nenechávajte bez dozoru a okamžite ju bezpečným spôsobom zlikvidujte. Takmer vybité batérie môžu byť stále nebezpečné.

4. Resetovanie zariadenia Phonak RemoteControl

❗ Resetovaním zariadenia Phonak RemoteControl sa zruší spárovanie s načúvacími prístrojmi.

Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti „+“ a tlačidlo na zmenu programu na viac ako 10 sekúnd.

5. Riešenie problémov

Problém

Párovanie s načúvacími prístrojmi je neúspešné.

Pri stlačení tlačidla nesvieti indikátor

Načúvacie prístroje nereagujú na povel zariadenia Phonak RemoteControl

Súvisle svietiaci červená kontrolka

Príčiny

Môže prebiehať rušenie aktívnymi zariadeniami s Bluetooth.

Dialkové ovládanie je vypnuté

Batéria je vybitá

Načúvacie prístroje sú vypnuté

Načúvacie prístroje nie sú spárované so zariadením RemoteControl

Dialkové ovládanie je vypnuté

Batéria je vybitá

Všeobecná chyba zariadenia

Potrebný postup

Prejdite na miesto s čo najmenším počtom aktívnych zariadení s Bluetooth a skúste to znova (kapitola 2.4).

Zapnite dialkové ovládanie (kapitola 2.2)

Vymeňte batériu (kapitola 3)

Zapnite načúvacie prístroje (prečítajte si návod na použitie načúvacieho prístroja)

Spárujte zariadenie RemoteControl (kapitola 2.4)

Zapnite dialkové ovládanie (kapitola 2.2)

Vymeňte batériu (kapitola 3)

Resetujte zariadenie RemoteControl (kapitola 4) a spárujte si načúvacie prístroje (kapitola 2.4)

❗ Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc poskytovateľa načúvacích prístrojov.

6. Informácie o zhode

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Phonak AG týmto vyhlasuje, že tento výrobok Phonak spĺňa základné požiadavky smernice (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, ako aj smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je možné získať od výrobcu alebo od miestneho zástupcu spoločnosti Phonak, ktorého adresa je uvedená v zozname na internetovej stránke www.phonak.com/en-int/certificates (pobočky spoločnosti Phonak vo svete).

Austrália/Nový Zéland:



R-NZ

Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii. Označenie zhody R-NZ je určené pre rádiové produkty dodávané na trh Nového Zélandu v rámci úrovne zhody A1.

Nasledujúci model má tieto certifikáty:

Phonak RemoteControl

USA FCC ID: KWC-RC1

Kanada IC: 2262A-RC1

Poznámka 1:

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a RSS-210 kanadského federálneho ministerstva pre priemysel. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- 2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka 2:

Zmeny alebo úpravy tohto diaľkového ovládania, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Phonak, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia FCC na prevádzku tohto zariadenia.

Poznámka 3:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC a ICES-003 kanadského federálneho ministerstva pre priemysel. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil toto rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v okruhu inom ako tom, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o radu predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Poznámka 4:

Súlada s japonským zákonom o rozhlasových zariadeniach a japonským telekomunikačným obchodným zákonom

Toto zariadenie vyhovuje japonskému zákonu o rozhlasových zariadeniach (電波法) a japonskému telekomunikačnému obchodnému zákonu (電気通信事業法). Toto zariadenie sa nesmie modifikovať (inak bude udelené číslo označenia neplatné).



R 018-190129

Technická špecifikácia bezdrôtovej komunikácie vášho zariadenia

Typ antény	Unipól
Prevádzková frekvencia	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulácia	GFSK
Vyžarovaný výkon	<2,8 mW
Bluetooth®	
Dosah	~1 m
Bluetooth	4,2
Podporované profily	BLE (GATT)

Súlrad s emisnými normami a normami týkajúcimi sa odolnosti

Emisné normy	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Normy týkajúce sa odolnosti	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

Akúkoľvek závažnú nehodu v súvislosti s týmto zariadením je nutné nahlásiť zástupcovi výrobcu a kompetentnému orgánu v krajine pobytu. Závažná nehoda je charakterizovaná ako akákoľvek nehoda, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, môže viesť alebo mohla viesť k jednému z nasledujúcich stavov:

- smrť pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- dočasné alebo trvalé vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- vážne ohrozenie zdravia verejnosti.

Na nahlásenie neočakávanej činnosti alebo udalosti kontaktujte výrobcu alebo jeho zástupcu.

Dôsledná a pravidelná údržba vášho zariadenia Phonak RemoteControl prispieva k jeho vynikajúcej výkonnosti a dlhej životnosti. Na zaistenie dlhej prevádzkovej životnosti spoločnosť Sonova AG poskytuje servis minimálne päť rokov od skončenia predaja príslušného výrobku.

Ak potrebujete viac informácií o funkciách, výhodách, nastavení, používaní a údržbe alebo oprave vášho príslušenstva, obráťte sa na svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov alebo zástupcu výrobcu.

Ďalšie informácie nájdete v karte údajov k vášmu výrobku.

Akékoľvek informácie týkajúce sa servisnej opravy príslušenstva načúvacích prístrojov získate u svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov.

Určené použitie: Zariadenie Phonak RemoteControl je určené na zmeny programov a hlasitosti načúvacieho prístroja.

Indikácie: Porucha sluchu a načúvacie prístroje s individuálnym nastavením kompatibilné s diaľkovým ovládaním Phonak RemoteControl.

Kontraindikácie: žiadne.

Cieľová populácia: Cieľovou skupinou sú ľudia s poruchou sluchu, ktorí používajú kompatibilné načúvacie prístroje značky Phonak. Žiadne obmedzenia týkajúce sa úrovne poruchy sluchu.

Zariadenie Phonak RemoteControl je vhodné pre prostredie domácej zdravotníckej starostlivosti a z dôvodu jeho prenosnosti sa môže stať, že sa bude používať v prostredí profesionálneho zdravotníckeho zariadenia, napríklad v lekárskech ambulanciách, zubných ambulanciách a pod.

7. Informácie o symboloch a ich popis



Spoločnosť Sonova AG symbolom CE potvrdzuje, že tento výrobok vrátane príslušenstva spĺňa požiadavky nariadenia 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (EÚ), ako aj smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Čísla nasledujúce za symbolom CE zodpovedajú kódom certifikovaných inštitúcií, s ktorými boli vykonané konzultácie podľa vyššie uvedených smerníc.



Tento symbol označuje, že výrobky opísané v tomto návode spĺňajú požiadavky pre aplikovanú časť typu B podľa normy EN 60601-1. Povrch načúvacieho prístroja je špecifikovaný ako aplikovaná časť typu B.



Udáva výrobcu zdravotníckej pomôcky, ako je definované v európskej smernici (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.



Udáva dátum výroby zdravotníckej pomôcky.



Udáva splnomocneného zástupcu v Európskej únii. Zástupca v EÚ je tiež dovozcom do Európskej únie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítal a zohľadnil príslušné informácie uvedené v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť príslušným výstražným upozorneniam v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol znamená, že používateľ musí venovať pozornosť relevantným varovaniam súvisiacim s batériami, ktoré sú uvedené v týchto návodoch na použitie.



Dôležité informácie pre manipuláciu a bezpečnosť výrobku.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítal a vzal na vedomie príslušné informácie uvedené v tomto návode na použitie.



Tento symbol označuje, že elektromagnetická interferencia zo zariadenia je nižšia než limity, ktoré schválila Federálna komisia USA pre komunikáciu.



Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Sonova AG je licencované. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Japonská značka pre certifikované rádiové zariadenie.



Označuje sériové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať konkrétnu zdravotnícku pomôcku.



Udáva, že toto zariadenie je zdravotnícka pomôcka.



Označuje katalógové číslo výrobcu, aby bolo možné zdravotnícku pomôcku identifikovať.



Prepravná a skladovacia teplota:
-20 °C až +60 °C.
Teplota pri prevádzke:
0 °C až +40 °C.



Vlhkosť počas skladovania: 0 % až 70 %, ak sa zariadenie nepoužíva.



Atmosférický tlak počas prevádzky, prepravy a skladovania: 500 hPa až 1 060 hPa.



Počas prepravy udržiavajte v suchu.



Symbol s preškrtnutým odpadkovým košom vás upozorňuje na to, že tento načúvací prístroj, ako aj nabíjačka, sa nesmú vyhodiť do bežného domového odpadu. Staré alebo nepoužívané načúvacie prístroje a nabíjačku zlikvidujte na miestach určených na likvidáciu elektronického odpadu alebo načúvací prístroj a nabíjačku odovzdajte na likvidáciu svojmu poskytovateľovi načúvacích prístrojov. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie

8. Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si prečítajte informácie na nasledujúcich stranách

8.1 Upozornenia na riziká

⚠ Vaše zariadenie funguje vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu skontrolujte, či letecká spoločnosť vyžaduje, aby boli zariadenia vypnuté.

⚠ Uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu detí vo veku menej ako 3 roky, mentálne postihnutých osôb a domácich zvierat.

⚠ Toto diaľkové ovládanie používa digitálne kódovaný prenos s nízkym výkonom na komunikáciu s vaším načúvacím systémom. Hoci je to nepravdepodobné, je možné rušenie lekárskeho zariadení (napr. kardiostimulátorov, defibrilátorov atď.). Preto používatelia nesmú nosiť toto diaľkové ovládanie v náprsnom vrecku alebo v jeho blízkosti.

⚠ Zmeny alebo úpravy zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Sonova, sú zakázané. Podobné zmeny môžu zariadenie poškodiť.

⚠ Ak sa vyskytnú problémy, ktoré sa nebudú dať odstrániť podľa odporúčaní v časti o riešení problémov v tomto návode na použitie, poraďte sa s vaším poskytovateľom načúvacích prístrojov/predajcom.

⚠ Toto zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Deti a osoby s kognitívnou poruchou môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom, aby sa zaistila ich bezpečnosť. Je to drobné zariadenie a obsahuje malé časti. Nenechávajte deti a osoby s kognitívnou poruchou bez dohľadu s týmto zariadením. V prípade prehĺtnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo nemocnicu, keďže by mohli zariadenie alebo jeho časti spôsobiť udusenie!

⚠ Nepoužívajte toto zariadenie hneď vedľa iného zariadenia alebo na inom zariadení, pretože to môže viesť k nesprávnemu fungovaniu. Ak bude takéto použitie potrebné, toto zariadenie a druhé zariadenie pozorujte, či fungujú normálne.

⚠ Ak zariadenie nepoužívate dlhšie obdobie, batériu vyberte.

 Nepoužívajte zariadenie na miestach s nebezpečenstvom výbuchu (horľavé anestetiká, bane alebo priemyselné oblasti s nebezpečenstvom výbuchu), v prostrediach s vysokým obsahom kyslíka alebo v oblastiach, kde sú zakázané elektronické zariadenia.

 Používanie iného príslušenstva, prevodníkov a káblov než tých, ktoré určil alebo dodal výrobca tohto zariadenia, môže viesť k zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti tohto zariadenia a nesprávnemu fungovaniu.

 Prenosné rádiovýfrekvenčné komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténové káble a externé antény) sa nesmú používať bližšie ako 30 cm od akejkoľvek časti zariadenia Phonak RemoteControl vrátane káblov špecifikovaných výrobcom. V opačnom prípade sa môže zhoršiť výkon tohto zariadenia.

 **VAROVANIE:** Batérie v zariadení sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenia v prípade ich prehltnutia alebo vloženia do vnútra tela bez ohľadu na to, či je batéria použitá alebo nová! Uchovávajte mimo dosahu detí, osôb s kognitívnou poruchou alebo zvierat. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo jej vloženiu do časti tela, okamžite sa neodkladne poraďte s lekárom!

8.2 Informácie o bezpečnosti výrobku

- ① Chráňte zariadenie pred nadmernou vlhkosťou (kúpanie, plávanie), teplom (radiátor, palubná doska v automobile) alebo pred priamym kontaktom s pokožkou pri potení (cvičenie, fitness, šport).
- ① Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo. Náraz na tvrdý povrch môže vaše zariadenie poškodiť.

- ❗ Špeciálne lekárske alebo zubné vyšetrenie vrátane nižšie opísaného žiarenia môže nepriaznivo ovplyvniť správnu funkčnosť zariadenia. Pred vyšetrením si ho vyberte a nechajte ho mimo vyšetrovacej miestnosti/ vyšetrovacieho priestoru:

- lekárske alebo zubné vyšetrenie s röntgenovým žiarením (vrátane snímania CT),
- lekárske vyšetrenia s MRI/NMRI snímaním s vytváraním magnetických polí.

- ❗ Chráňte konektory zariadenia a priestor na batériu pred nečistotami a úlomkami.
- ❗ Digitálne kódovaná prenosová technológia použitá v tomto zariadení je veľmi spoľahlivá a nedochádza pri nej prakticky k žiadnemu rušeniu inými zariadeniami. Treba však poznamenať, že pri používaní načúvacieho systému v blízkosti počítačového vybavenia, väčších elektronických inštalácií alebo iných silných elektromagnetických polí môže byť nevyhnutné zotrvať aspoň 60 cm od rušivého zariadenia, aby nebolo narušené správne fungovanie.

- ❗ Udržiavajte zariadenie vo vzdialenosti minimálne 10 cm od akýchkoľvek magnetov.
- ❗ Keď sa zariadenie nepoužíva, vypnite ho a bezpečne odložte.
- ❗ Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde sú elektronické zariadenia zakázané.

8.3 Ďalšie dôležité informácie

- ❗ Elektronické zariadenia s vysokým výkonom, väčšie elektronické inštalácie a kovové konštrukcie môžu zhoršiť a výrazne skrátiť prevádzkový dosah.
- ❗ Ak načúvacie prístroje nereagujú na zariadenie z dôvodu nezvyčajného rušivého poľa, vzdialte sa od takéhoto rušivého poľa.

9. Starostlivosť a údržba

Čistenie zariadenia

Na čistenie používajte utierku, ktorá neuvolňuje vlákna. Preferuje sa čistenie nasucho. V prípade potreby sa povrch môže vyčistiť jemným mydlovým roztokom. Handrička by však mala byť len navlhčená, nie mokrá, aby sa zabránilo preniknutiu vlhkosti do zariadenia. Nepoužívajte agresívne látky, ako sú napríklad rozpúšťadlá alebo riedidlá, pretože tieto môžu poškodiť povrch zariadenia.

10. Servis a záruka

10.1 Platnosť záruky

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

10.2 Medzinárodná garancia

Spoločnosť Sonova poskytuje jednoročnú obmedzenú medzinárodnú garanciu, ktorá platí odo dňa zakúpenia. Táto obmedzená garancia sa vzťahuje iba na výrobné chyby a chyby materiálu na samotnom zariadení, nie však na príslušenstvo. Garancia je platná až po predložení dokladu o zakúpení tovaru.

Medzinárodná garancia nemá žiadny vplyv na zákonné práva, ktoré môžete mať na základe miestnej záruky alebo príslušnej miestnej legislatívy týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru.

10.3 Obmedzenie záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám alebo nadmerným namáhaním. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené predajcom zariadení na jeho prevádzke.

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Autorizovaný predajca
(pečiatka/podpis):

Poznámky

Poznámky

[illegible]

Poznámky



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Nemecko



Výrobca:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švajčiarsko
www.phonak.com

Distibútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.
so sídlom Radlinského 27,
811 07 Bratislava
www.artsonic.sk
www.phonak.sk