




## Phonak Sky L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)


## Štandardný a mini hák HE11

Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

## Úroveň výstupného akustického tlaku

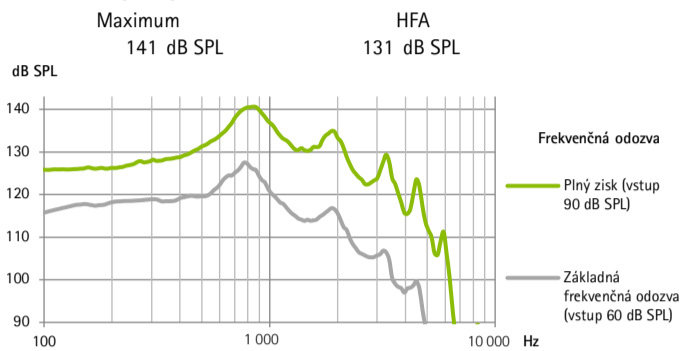


## Akustický zisk

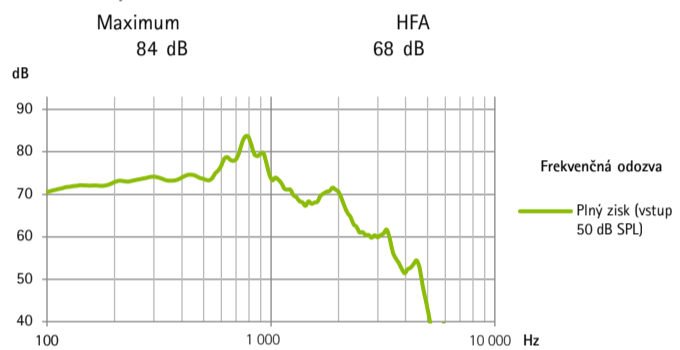

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >4 700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	3,3	mA		
Predpokladaný čas prevádzky*	188	h		
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19	dB SPL		


## Citlivosť indukčnej cievky

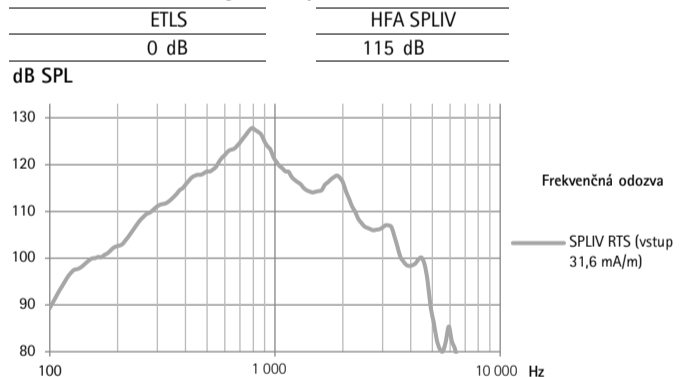


## Štandardný a mini hák HE11 680

Dáta väzby kupleru 2 cm<sup>3</sup>ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)  
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

## Úroveň výstupného akustického tlaku

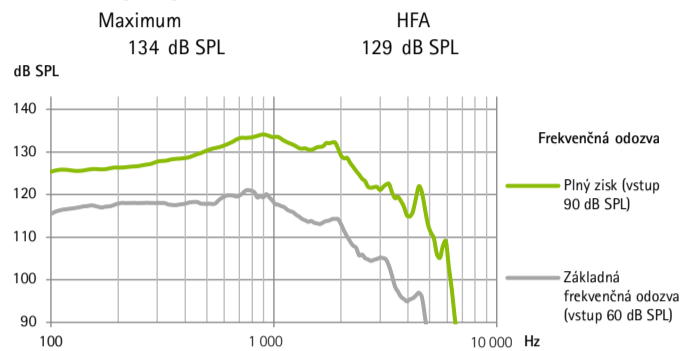


## Akustický zisk

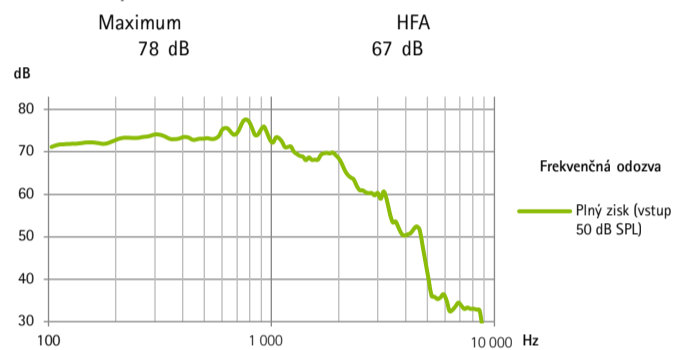

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >4 700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	2,8	mA		
Predpokladaný čas prevádzky*	221	h		
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19	dB SPL		

## Citlivosť indukčnej cievky

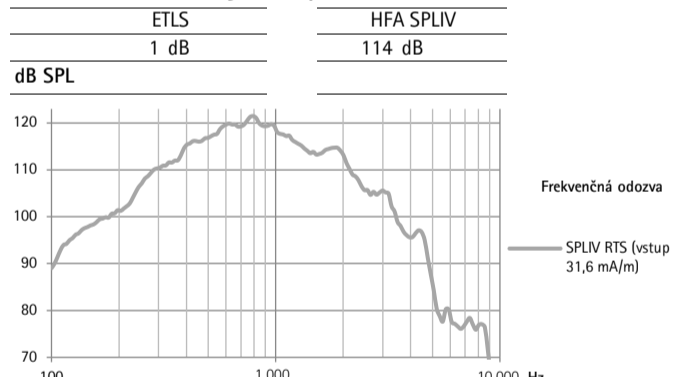

## Všeobecné informácie o teste

- Používajú sa špecifické nastavenia merania. Nastavenie RTS s ovládaním hlasitosti.
- Zariadenie pracuje v lineárnom režime.
- Rozširovanie na nízkej úrovni je aktívne.
- Všetky získané údaje sú namerané s nastaveniami merania Phonak Target.
- Latencia zvukového signálu stanovená v súlade s vnútornou normou je 6,2 ms.

## Upozornenie

- ⚠ Tento načúvací prístroj má výstupnú hladinu zvukového tlaku, ktorá môže prekročiť 132 dB SPL. Pri nastavovaní tohto prístroja treba postupovať obzvlášť opatrne, pretože hrozí riziko zhoršenia zvyškového sluchu používateľa.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.

\*Výkon batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie, posluchového prostredia a ušnej koncovky. Nezabudnite, že pri nenabíjateľných zinko-vzduchových batériách sa môže prevádzkový čas líšiť v závislosti od modelu batérie.

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Švajčiarsko  
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK  
life is on