




Phonak Sky L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standardní a mini hák HE11


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku

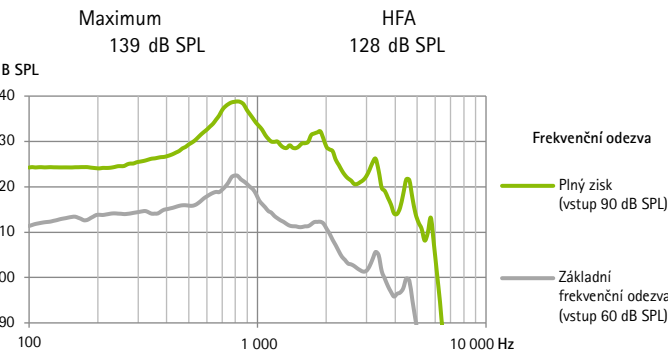


Akustický zisk

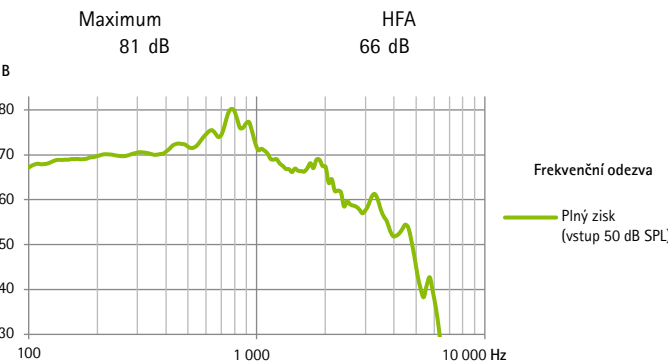

Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 4 900 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Proud v baterii	2,1 mA			
Předpokládaná doba provozu*	143 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Citlivost indukční cívky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dB SPL

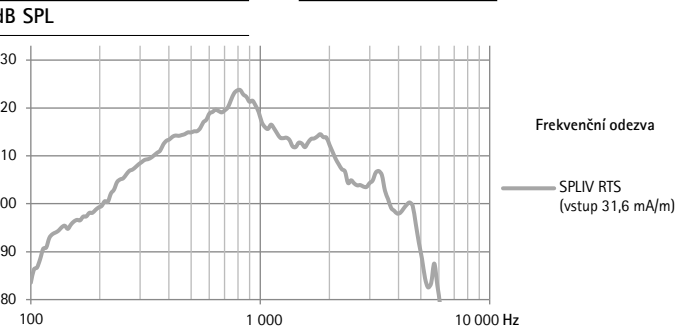


Standardní a mini hák HE11 680


Data vazby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku

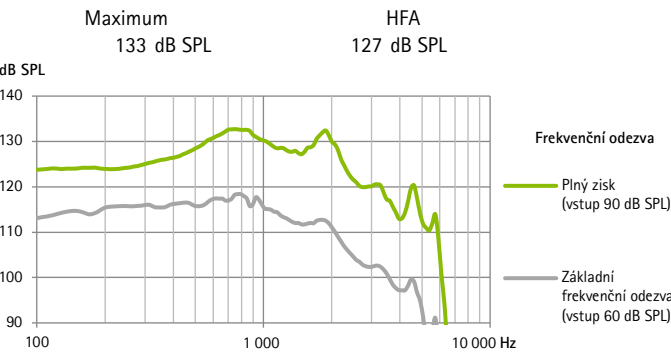


Akustický zisk

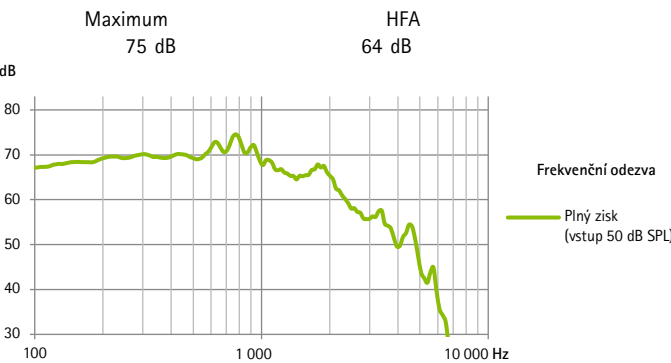

Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 5 700 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Proud v baterii	2,2 mA			
Předpokládaná doba provozu*	136 h			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Citlivost indukční cívky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dB SPL

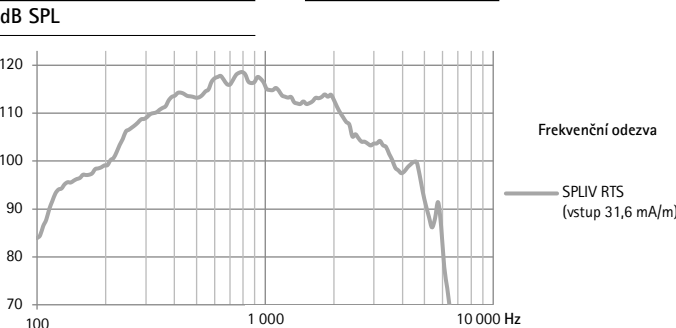

Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V / impedance 6,2 Ω.
- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Upozornění

- ⚠ Toto sluchadlo má výstupní hladinu zvukového tlaku, která může překročit 132 dB SPL. Při nastavování tohoto zařízení je třeba dbát zvláštní opatrnosti, hrozí riziko poškození zbytkového sluchu uživatele.
- ⚠ Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.
- ⚠ Vzniklý zvukový tlak (SPL) v uších dětí může být podstatně vyšší než u průměrné dospělé osoby. Pro korekci cílové hodnoty se doporučuje naměřená hodnota RECD pro nastavení OSPL90.

*Předpokládaná doba provozu baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie, poslechovém prostředí a typu ušní koncůvek. Upozorňujeme, že u nedobíjecích zinko-vzduchových baterií se doba provozu může lišit podle velikosti baterie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

