



Phonak Sky™ L

Technický list


Phonak Sky L-SP (L90/L70/L50/L30/Trial)

Štandardný a mini hák HE11


Dáta väzby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Úroveň výstupného akustického tlaku

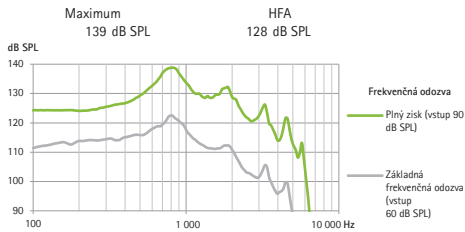


Akustický zisk

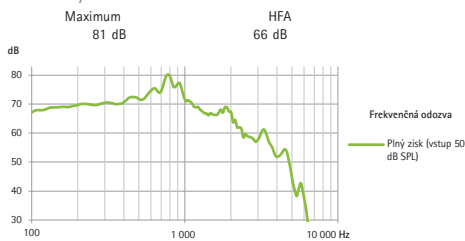

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - >4 900 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Prúd v batérii	2,1	mA		
Predpokladaný čas prevádzky*	143	h		
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19	dB SPL		

Citlivosť indukčnej cievky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	112 dB SPL

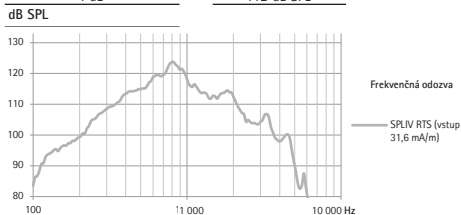

Všeobecné informácie o teste

- Napájacie napätie 1,3 V/impedancia 6,2 Ω.
- Používajú sa špecifické nastavenia merania. Nastavenie RTS s ovládaním hlasitosti.
- Zariadenie pracuje v lineárnom režime.
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna.
- Všetky získané údaje sú namerané s nastaveniami merania vo Phonak Targete.
- Latencia zvukového signálu stanovená v súlade s vnútornou normou je 6,2 ms.

Upozornenie

- ⚠ Tento načúvací prístroj má výstupnú hladinu zvukového tlaku, ktorá môže prekročiť 132 dB SPL. Pri nastavovaní tohto prístroja treba postupovať obzvlášť opatrne, pretože hrozí riziko zhoršenia zvyškového sluchu používateľa.
- ⚠ Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.
- ⚠ Vzniknutý zvukový tlak (SPL) v ušiach detí môže byť výrazne vyšší ako u priemerných dospelých. Na korekciu cieľovej hodnoty sa odporúča nameraná hodnota RECD pre nastavenie OSPL90.


*Predpokladaná doba prevádzky batérie závisí od aktívnych funkcií, používania bezdrôtového príslušenstva, poruchy sluchu, veku batérie, posluchového prostredia a typu ušnej koncovky. Nezabudnite, že pri nenabíjateľných zinko-vzduchových batériách sa môže prevádzkový čas líšiť v závislosti od veľkosti batérie.

Štandardný a mini hák HE11 680


Dáta väzby kupleru 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Úroveň výstupného akustického tlaku

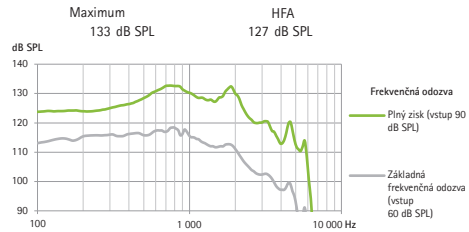

Akustický zisk

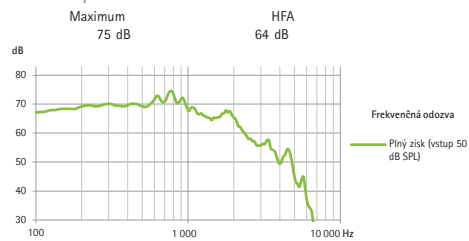

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - > 5 700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Prúd v batérii	2,2	mA		
Predpokladaný čas prevádzky*	136	h		
Ekvivalentná úroveň vstupného hluku	19	dB SPL		

Citlivosť indukčnej cievky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	111 dB SPL

